

NL: CUPNOVA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Intelligente Ventouse Massager met Negatieve Druk

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende productmodellen: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


OPLADEN

Dit apparaat werkt op een oplaadbare batterij. Zodra het volledig is opgeladen, werkt het draadloos en kan het niet worden ingeschakeld tijdens het opladen.

- Tijdens het opladen knippert het witte indicatielampje. Wanneer het volledig is opgeladen, blijft het lampje branden.
 - Het apparaat heeft een automatische timer van 20 minuten. Het digitale display toont een afteltimer van 20 minuten en schakelt automatisch uit wanneer de tijd verstreken is.
 - Oplaadtijd en gebruiksduur zijn afhankelijk van de specificaties van de adapter.
 - Om de werking te pauzeren, drukt u kort op de aan/uit-knop. Druk nogmaals om de werking voort te zetten.
-

OVERZICHT VAN DE CONTROLS

DS-A12 Besturing

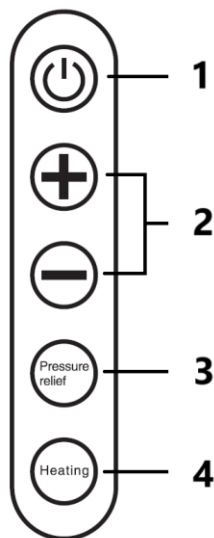

Dit model beschikt over **12 intensiteitsniveaus, verwarmings- en drukverlichtingsfuncties.**

1. **Aan/uit-knop:** Schuif de schakelaar omhoog, druk vervolgens 2 seconden in om het apparaat in te schakelen. Het digitale display licht op en toont "00". Na 2 seconden begint de afteltimer van 20 minuten. Druk opnieuw 2 seconden in om het apparaat uit te schakelen; het display zal uitgaan.

2. **Intensiteitsinstelling ([+], [-]):** Druk kort op deze knoppen om de intensiteit van de negatieve druk te verhogen of te verlagen. De niveaus variëren van 0 tot 12 (waarbij 0 geen zuiging betekent). Standaard begint het apparaat op niveau 3. Elke aanpassing werkt het display bij en de afteltimer van 20 minuten verschijnt opnieuw na 2 seconden.
3. **Drukverlichtingsknop:** Wanneer de zuiging actief is, druk kort op deze knop om 1 seconde lucht vrij te geven, zodat het gemakkelijker wordt om de zuigkop te verwijderen.
4. **Verwarmingsknop:** Druk kort om de temperatuur in te stellen. Verwarming is standaard uit (niveau 0). De niveaus variëren van 0 tot 12, waarbij elk niveau de temperatuur geleidelijk verhoogt. Op het hoogste niveau bereikt de temperatuur ongeveer 45°C (113°F). Het rode lampje aan de onderkant licht op wanneer de verwarming actief is. Door opnieuw op de knop te drukken, wordt het verwarmingsniveau gereset naar 0 en wordt het display dienovereenkomstig bijgewerkt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. **Voorbereiding:** Zet het apparaat aan en kies de gewenste instellingen. Breng essentiële olie aan op het te behandelen lichaamsdeel voor gebruik. Voor gevoelige huid, test eerst op de binnenkant van de onderarm of achter het oor voordat u het volledig aanbrengt. Als er roodheid, zwelling of jeuk optreedt, stop dan onmiddellijk met gebruiken.
2. **Schrappenmodus:**
 - Breng een kleine hoeveelheid essentiële olie aan op de huid (**breng geen olie direct op het apparaat aan**).
 - Stel de negatieve druk in op een laag niveau, bevestig het apparaat op de huid en beweeg het in één richting.
 - Behandel elk gebied niet meer dan 20 keer, beginnend met een lichte druk en geleidelijk de intensiteit verhogen.
 - Het apparaat is uitgerust met een groot filterdoek om te voorkomen dat olie de interne componenten beschadigt. **Vervang het filter na elk gebruik.** Het kan worden gereinigd en opnieuw gebruikt zodra het droog is.
3. **Ventouse-modus:**
 - Kies een geschikt niveau van negatieve druk.
 - Laat het apparaat 3–5 minuten op de huid zuigen.
 - Om de zuigkop te verwijderen, kantel het apparaat en trek het omhoog of druk op de drukverlichtingsknop.
 - **Gebruik geen essentiële olie in de ventouse-modus.**

ONDERHOUD EN REINIGING

1. Bewaar het apparaat op een veilige plaats om vallen of schade te voorkomen.
2. Bewaar het in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van direct zonlicht en corrosieve stoffen.
3. Buiten het bereik van kinderen houden.

4. Als het langere tijd niet wordt gebruikt, zet het apparaat uit en laad het elke twee maanden op.
5. Neem voor technische problemen contact op met een professional. Demonteer het apparaat niet zelf.
6. Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
7. Reinig met een zachte, licht vochtige spons of doek. Vermijd agressieve chemische reinigingsmiddelen.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Stel het niet bloot aan water, hoge luchtvochtigheid of andere vloeistoffen om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.