

EE: CUPNOVA - KASUTUSJUHEND

Intelligentne negatiivse rõhuga kupumassaažija

See kasutusjuhend kehtib järgmiste tootemudelite kohta: **DS-A10, DS-A11, DS-A12.**

LAADIMINE


See seade töötab laetava akuga. Kui see on täielikult laetud, toimib see juhtmevabalt ja seda ei saa laadimise ajal sisse lülitada.

- Laadimise ajal vilgub valge märgutuli. Kui see on täielikult laetud, jääb tuli püsima.
- Seadmel on 20-minutiline automaatne taimer. Digitaalne näidik näitab 20-minutilist tagasiarvestust ja lülitub automaatselt välja, kui aeg on möödunud.
- Laadimisaeg ja kasutusaeg sõltuvad adapteri spetsifikatsioonidest.
- Töötamise peatamiseks vajutage lühidalt toitenuppu. Jätkamiseks vajutage seda uuesti.

ÜLEVAADE JUHTIMISSEADISTEST

DS-A12 juhtimisseadmed

Sellel mudelil on **12 intensiivsustaset, soojendus-** ja **rõhulangetamisfunktsioonid.**

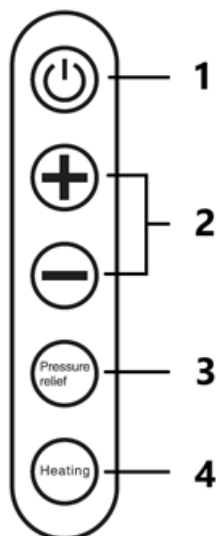

Sellel mudelil on **12 intensiivsustaset, soojendus-** ja **rõhulangetamisfunktsioonid.**

1. **Toitenupp:** Lükake lüliti üles, seejärel vajutage ja hoidke 2 sekundit all, et seade sisse lülitada. Digitaalne ekraan süttib ja näitab "00". Pärast 2 sekundit algab 20-minutiline tagasiarvestus. Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke uuesti 2 sekundit all; ekraan lülitub välja.
2. **Intensiivsuse reguleerimine ([+], [-]):** Vajutage neid nuppe lühidalt, et suurendada või vähendada negatiivse rõhu intensiivsust. Tasemed ulatuvad 0-st kuni 12-ni (kus 0 tähendab, et imemist ei toimu). Vaikimisi alustab seade tasemel 3. Iga reguleerimine ajakohastab ekraani ja 20-minutiline loendur ilmub uuesti 2 sekundi pärast.

3. **Rõhuvabastuse nupp:** Kui imemine on aktiivne, vabastab selle nupu vajutamine 1 sekundi jooksul lühiajaliselt õhku, mis hõlbustab tasside eemaldamist.
 4. **Soojendusnupp:** Vajutage lühidalt, et reguleerida temperatuuri. Küte on vaikimisi välja lülitatud (tase 0). Tasemed ulatuvad 0-st kuni 12-ni, kusjuures iga tase suurendab temperatuuri järk-järgult. Maksimaalsel seadistusel saavutab temperatuur ligikaudu 45 °C (113 °F). Punane tuli alumisel küljel põleb, kui kütmine on aktiivne. Nupu uuesti vajutamisel taastatakse kuumutustase 0-le ja näidik uuendatakse vastavalt.
-

KASUTUSJUHISED

1. **Ettevalmistus:** Pärast seadme sisselülitamist valige soovitud seaded. Enne kasutamist kandke eeterlikku õli sihtkoha kehapiirkonnale. Tundliku naha puhul testige enne täielikku kasutamist küünarvarre siseküljel või kõrva taga. Kui tekib punetus, turse või sügelus, lõpetage kohe kasutamine.
 2. **Kraapimisrežiim:**
 - Kandke väike kogus eeterlikku õli nahale(**ärge kandke õli otse masinale**).
 - Seadke negatiivne rõhk madalale tasemele, kinnitage seade nahale ja liigutage seda ühes suunas.
 - Iga piirkonda tuleks töödelda mitte rohkem kui 20 korda, alustades õrnalt ja suurendades järk-järgult intensiivsust.
 - Seade on varustatud suure filtrivattaga, et vältida õli sattumist ja sisemiste komponentide kahjustamist. **Vahetage filtri vatt pärast iga kasutamist välja.** Seda saab puhastada ja uuesti kasutada, kui see on kuivanud.
 3. **Tassimisrežiim:**
 - Valige sobiv negatiivse rõhu tase.
 - Laske seadmel imeda nahka 3-5 minutit.
 - Tasside eemaldamiseks kallutage seadet ja tõmmake üles või vajutage rõhu vähendamise nuppu.
 - **Ärge kasutage tassimisrežiimi puhul eeterlikku õli.**
-

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

1. Hoidke seadet turvalises kohas, et vältida kukkumist või kahjustusi.
2. Hoidke seda kuivas, hästi ventileeritud kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja söövitavatest ainetest.
3. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
4. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, lülitage see välja ja laadige see iga kahe kuu tagant uuesti.
5. Tehniliste probleemide korral võtke ühendust spetsialistiga. Ärge võtke seadet ise lahti.
6. Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske sellel jahtuda.
7. Puhastage pehme, kergelt niiske käsna või lapiga. Vältige karmi keemilisi puhastusvahendeid.
8. Seade ei ole veekindel. Ärge pange seda kokku vee, suure niiskuse või muude vedelikega, et vältida lühiseid või elektrilööki.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.