

RO: CUPNOVA - MANUAL DE UTILIZARE

Masaj inteligent cu ventuze cu presiune negativă

Acest manual de instrucțiuni se aplică următoarelor modele de produse: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

ÎNCĂRCARE


Acest dispozitiv funcționează pe baza unei baterii reîncărcabile. Odată încărcat complet, acesta funcționează fără fir și nu poate fi pornit în timpul încărcării.

- În timpul încărcării, indicatorul luminos alb clipește. Când este complet încărcat, lumina rămâne fixă.
 - Dispozitivul include un cronometru automat de 20 de minute. Afișajul digital afișează o numărătoare inversă de 20 de minute și se oprește automat la expirarea timpului.
 - Timpul de încărcare și durata de utilizare depind de specificațiile adaptorului.
 - Pentru a întrerupe funcționarea, apăsați scurt butonul de alimentare. Apăsați-l din nou pentru a-l relua.
-

PREZENTARE GENERALĂ A COMENZILOR

Comenzi DS-A12

Acest model dispune de **12 niveluri de intensitate, încălzire** și funcții de **reducere a presiunii**.

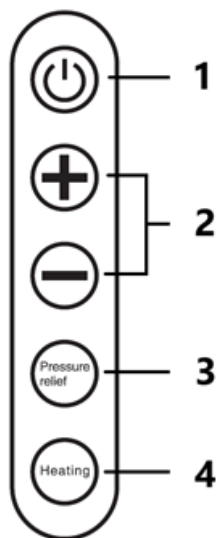

Acest model dispune de **12 niveluri de intensitate, încălzire** și funcții de **reducere a presiunii**.

1. **Buton de pornire:** Glisați comutatorul în sus, apoi apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Afișajul digital se va aprinde și va arăta "00". După 2 secunde, începe numărătoarea inversă de 20 de minute. Pentru a-l opri, apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde din nou; afișajul se va stinge.
2. **Reglarea intensității ([+], [-]):** Apăsați scurt aceste butoane pentru a crește sau a reduce intensitatea presiunii negative. Nivelurile variază de la 0 la 12 (unde 0 înseamnă nicio

aspirație). În mod implicit, dispozitivul pornește de la nivelul 3. Fiecare ajustare actualizează afișajul, iar numărătoarea inversă de 20 de minute reapare după 2 secunde.

3. **Buton de eliberare a presiunii:** Când aspirația este activă, apăsarea acestui buton eliberează scurt aerul timp de 1 secundă, facilitând îndepărtarea cupei.
4. **Buton de încălzire:** Apăsați scurt pentru a regla temperatura. Încălzirea este oprită în mod implicit (nivelul 0). Nivelurile variază de la 0 la 12, fiecare nivel crescând treptat temperatura. La setarea maximă, temperatura atinge aproximativ 45°C (113°F). Lumina roșie de la bază se aprinde atunci când încălzirea este activă. Apăsarea din nou a butonului resetează nivelul de încălzire la 0, iar afișajul se actualizează corespunzător.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Pregătire:** După pornirea dispozitivului, selectați setările dorite. Aplicați ulei esențial pe zona corpului vizată înainte de utilizare. Pentru pielea sensibilă, testați pe partea interioară a antebrațului sau în spatele urechii înainte de aplicarea completă. Dacă apare roșeață, umflături sau mâncărime, întrerupeți imediat utilizarea.
2. **Mod de răzuire:**
 - Aplicați o cantitate mică de ulei esențial pe piele(**nu aplicați uleiul direct pe aparat**).
 - Setati presiunea negativă la un nivel scăzut, fixați dispozitivul pe piele și mișcați-l într-o singură direcție.
 - Fiecare zonă nu trebuie tratată de mai mult de 20 de ori, începând ușor și crescând treptat intensitatea.
 - Dispozitivul este echipat cu o vată filtrantă mare pentru a preveni pătrunderea uleiului și deteriorarea componentelor interne. **Înlocuiți vată filtrantă după fiecare utilizare.** Acesta poate fi curățat și reutilizat odată uscat.
3. **Mod de cupaj:**
 - Selectați un nivel adecvat de presiune negativă.
 - Lăsați dispozitivul să aspire pielea timp de 3-5 minute.
 - Pentru a îndepărta cupa, fie înclinați dispozitivul și trageți în sus, fie apăsați butonul de eliberare a presiunii.
 - **Nu utilizați ulei esențial pentru modul de cupping.**

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

1. Depozitați dispozitivul într-un loc sigur pentru a preveni căderile sau deteriorările.
2. Păstrați-l într-o zonă uscată, bine ventilată, departe de lumina directă a soarelui și de substanțele corozive.
3. Păstrați-l departe de îndemâna copiilor.
4. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, opriți alimentarea și reîncărcați la fiecare două luni.
5. Pentru probleme tehnice, contactați un profesionist. Nu dezamblați singur dispozitivul.
6. Înainte de curățare, scoateți dispozitivul din priză și lăsați-l să se răcească.

7. Curățați cu un burete sau o cârpă moale, ușor umedă. Evitați detergenții chimici agresivi.
 8. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu îl expuneți la apă, umiditate ridicată sau alte lichide pentru a preveni scurtcircuitele sau șocurile electrice.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.