

IT: CUPNOVA – MANUALE UTENTE

Massaggiatore intelligente a pressione negativa per coppettazione

Questo manuale d'uso si applica ai seguenti modelli: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


RICARICA

Questo dispositivo funziona con batteria ricaricabile. Una volta completamente carico, opera senza fili e non può essere acceso durante la ricarica.

- Durante la ricarica, la spia bianca lampeggia. Quando la carica è completa, la spia rimane accesa in modo fisso.
 - Il dispositivo include un timer automatico di 20 minuti. Il display digitale mostra un conto alla rovescia di 20 minuti e si spegne automaticamente allo scadere del tempo.
 - Il tempo di ricarica e la durata d'uso dipendono dalle specifiche dell'adattatore di alimentazione.
 - Per mettere in pausa il funzionamento, premere brevemente il pulsante di accensione. Premere di nuovo per riprendere l'uso.
-

PANORAMICA DEI COMANDI

Comandi del modello DS-A12

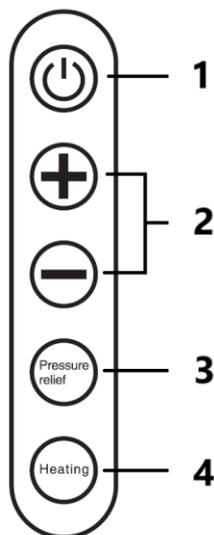

Questo modello dispone di **12 livelli di intensità**, funzione **riscaldamento** e **rilascio della pressione**.

1. **Pulsante di accensione/spegnimento:** Spostare l'interruttore verso l'alto, quindi premere e tenere premuto per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il display digitale si illuminerà e mostrerà "00". Dopo 2 secondi, inizierà il conto alla rovescia di 20 minuti. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto per 2 secondi; lo schermo si spegnerà.
2. **Regolazione dell'intensità ([+], [-]):** Premendo brevemente questi pulsanti, è possibile aumentare o diminuire la pressione negativa. I livelli vanno da 0 a 12 (0 significa nessuna

aspirazione). Il dispositivo si accende automaticamente al livello 3. Ogni modifica viene visualizzata sullo schermo e, dopo 2 secondi, il conto alla rovescia di 20 minuti riappare.

3. **Pulsante di rilascio della pressione:** Quando l'aspirazione è attiva, premendo brevemente questo pulsante si rilascia l'aria per 1 secondo, facilitando la rimozione della coppetta.
4. **Pulsante di riscaldamento:** Premendo brevemente, è possibile regolare la temperatura. Il riscaldamento è disattivato di default (livello 0). I livelli vanno da 0 a 12, con un incremento progressivo della temperatura. Alla massima impostazione, la temperatura raggiunge circa 45°C (113°F). Quando il riscaldamento è attivo, una luce rossa alla base del dispositivo si accenderà. Premendo nuovamente il pulsante, il livello di riscaldamento tornerà a 0 e lo schermo verrà aggiornato.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Preparazione:** Dopo aver acceso il dispositivo, selezionare le impostazioni desiderate. Applicare olio essenziale sulla zona da trattare prima dell'uso. Se hai la pelle sensibile, testare prima l'olio sulla parte interna dell'avambraccio o dietro l'orecchio. Se compaiono arrossamento, gonfiore o prurito, interrompere immediatamente l'uso.
2. **Modalità scraping (raschiamento):**
 - Applicare una piccola quantità di olio essenziale sulla pelle (**non applicare direttamente sul dispositivo**).
 - Impostare un basso livello di pressione negativa, posizionare il dispositivo sulla pelle e spostarlo in una sola direzione.
 - Non trattare la stessa zona più di 20 volte. Iniziare con bassa intensità e aumentarla gradualmente.
 - Il dispositivo è dotato di un ampio filtro in cotone per evitare che l'olio penetri nelle componenti interne. **Il filtro deve essere sostituito dopo ogni utilizzo.** Può essere lavato e riutilizzato una volta asciutto.
3. **Modalità coppettazione:**
 - Selezionare un livello di pressione negativa adeguato.
 - Lasciare il dispositivo sulla pelle per 3–5 minuti.
 - Per rimuovere la coppetta, inclinare il dispositivo e sollevarlo oppure premere il pulsante di rilascio della pressione.
 - **Non utilizzare olio essenziale in questa modalità.**

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Conservare il dispositivo in un luogo sicuro, evitando cadute o danni.
2. Tenerlo in un ambiente asciutto e ben ventilato, lontano da luce solare diretta e sostanze corrosive.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, spegnere e ricaricare ogni due mesi.

5. Per problemi tecnici, rivolgersi a un professionista. Non smontare il dispositivo autonomamente.
6. Prima della pulizia, scollegare il dispositivo dalla corrente e lasciarlo raffreddare.
7. Pulire con una spugna morbida leggermente umida o un panno. Evitare detergenti aggressivi.
8. Il dispositivo non è impermeabile. Non esporlo a acqua, umidità elevata o altri liquidi, per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.