

FR: CUPNOVA – MANUEL DE L'UTILISATEUR

Masseur à Ventouse à Pression Négative Intelligent

Ce manuel d'instructions s'applique aux modèles de produits suivants : **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


CHARGEMENT

Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. Une fois complètement chargé, il fonctionne sans fil et ne peut pas être allumé pendant la charge.

- Pendant le chargement, le voyant blanc clignote. Une fois complètement chargé, le voyant reste allumé.
 - L'appareil comprend un minuteur automatique de 20 minutes. L'affichage numérique affiche un compte à rebours de 20 minutes et s'éteint automatiquement lorsque le temps est écoulé.
 - Le temps de charge et la durée d'utilisation dépendent des spécifications de l'adaptateur.
 - Pour mettre l'appareil en pause, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez à nouveau pour reprendre.
-

APERÇU DES COMMANDES

Commandes du DS-A12

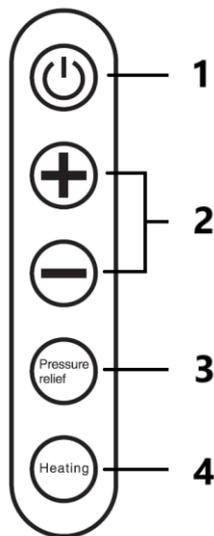

Ce modèle dispose de 12 niveaux d'intensité, de fonctions de chauffage et de soulagement de la pression.

1. **Bouton d'Alimentation** : Faites glisser l'interrupteur vers le haut, puis appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'affichage numérique s'allume et affiche "00". Après 2 secondes, le compte à rebours de 20 minutes commence. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez à nouveau pendant 2 secondes ; l'affichage s'éteindra.

2. **Réglage de l'Intensité ([+], [-])** : Appuyez brièvement sur ces boutons pour augmenter ou diminuer l'intensité de la pression négative. Les niveaux varient de 0 à 12 (où 0 signifie sans aspiration). Par défaut, l'appareil commence au niveau 3. Chaque ajustement met à jour l'affichage, et le compte à rebours de 20 minutes réapparaît après 2 secondes.
3. **Bouton de Soulagement de la Pression** : Lorsque l'aspiration est active, appuyez brièvement sur ce bouton pour libérer de l'air pendant 1 seconde, facilitant ainsi le retrait de la ventouse.
4. **Bouton de Chauffage** : Appuyez brièvement pour ajuster la température. Le chauffage est éteint par défaut (niveau 0). Les niveaux varient de 0 à 12, chaque niveau augmentant progressivement la température. Au réglage maximum, la température atteint environ 45°C (113°F). La lumière rouge à la base s'allume lorsque le chauffage est actif. Appuyer à nouveau sur le bouton réinitialise le niveau de chauffage à 0, et l'affichage est mis à jour en conséquence.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. **Préparation** : Après avoir allumé l'appareil, sélectionnez les paramètres souhaités. Appliquez de l'huile essentielle sur la zone ciblée du corps avant utilisation. Pour les peaux sensibles, effectuez un test sur l'avant-bras interne ou derrière l'oreille avant une application complète. Si des rougeurs, gonflements ou démangeaisons apparaissent, arrêtez immédiatement l'utilisation.
2. **Mode de Grattage** :
 - Appliquez une petite quantité d'huile essentielle sur la peau (**ne pas appliquer directement sur l'appareil**).
 - Réglez la pression négative à un faible niveau, fixez l'appareil à la peau et déplacez-le dans une seule direction.
 - Chaque zone ne doit pas être traitée plus de 20 fois, en commençant doucement et en augmentant progressivement l'intensité.
 - L'appareil est équipé d'un grand filtre en coton pour empêcher l'huile de pénétrer et d'endommager les composants internes. **Remplacez le filtre après chaque utilisation.** Il peut être nettoyé et réutilisé une fois sec.
3. **Mode de Ventouse** :
 - Sélectionnez un niveau de pression négative approprié.
 - Laissez l'appareil aspirer la peau pendant 3 à 5 minutes.
 - Pour retirer la ventouse, inclinez l'appareil et tirez vers le haut ou appuyez sur le bouton de soulagement de la pression.
 - **Ne pas utiliser d'huile essentielle en mode ventouse.**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Rangez l'appareil dans un endroit sûr pour éviter les chutes ou les dommages.
2. Conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des substances corrosives.

3. Tenez-le hors de portée des enfants.
4. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rechargez-le tous les deux mois.
5. Pour toute question technique, contactez un professionnel. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
6. Avant de nettoyer, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
7. Nettoyez-le avec une éponge ou un chiffon doux et légèrement humide. Évitez les produits de nettoyage chimiques agressifs.
8. L'appareil n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'eau, à une forte humidité ou à d'autres liquides pour éviter les courts-circuits ou les chocs électriques.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.