

CZ: CUPNOVA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Inteligentní masážní přístroj s negativním tlakem

Tento návod k použití se vztahuje na následující modely výrobků: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


NABÍJENÍ

Toto zařízení funguje na dobíjecí baterii. Po úplném nabití funguje bezdrátově a nelze jej zapnout během nabíjení.

- Během nabíjení bliká bílé indikátorové světlo. Po úplném nabití světlo zůstane stále.
- Zařízení obsahuje automatický časovač na 20 minut. Digitální displej zobrazuje odpočet 20 minut a po uplynutí času se automaticky vypne.
- Doba nabíjení a doba použití závisí na specifikacích adaptéru.
- Pro pozastavení provozu krátce stiskněte tlačítko napájení. Opětovným stisknutím pokračujte.

PŘEHLED OVLÁDÁNÍ

Ovládání DS-A12

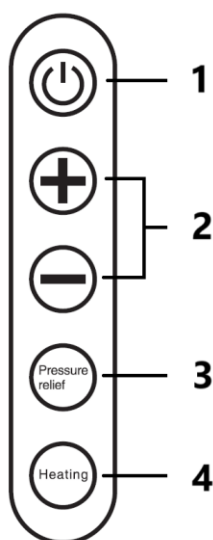

Tento model má **12 úrovní intenzity, funkci ohřevu a úlevu od tlaku.**

1. Tlačítko napájení: Posuňte přepínač nahoru, poté stiskněte a držte po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli. Digitální displej se rozsvítí a zobrazí „00“. Po 2 sekundách začne odpočet 20 minut. Pro vypnutí opět stiskněte a držte po dobu 2 sekund; displej se vypne.
2. Nastavení intenzity ([+], [-]): Krátce stiskněte tato tlačítka pro zvýšení nebo snížení intenzity negativního tlaku. Úrovně se pohybují od 0 do 12 (kde 0 znamená žádné sání). Zařízení je nastaveno na úroveň 3. Každá úprava aktualizuje displej a po 2 sekundách se znovu objeví odpočet 20 minut.

3. Tlačítko úlevy od tlaku: Když je sání aktivní, krátkým stisknutím tohoto tlačítka se uvolní vzduch na 1 sekundu, což usnadní odstranění přísavky.
 4. Tlačítko ohřevu: Krátce stiskněte pro nastavení teploty. Ohřev je ve výchozím nastavení vypnutý (úroveň 0). Úrovně se pohybují od 0 do 12, přičemž každá úroveň postupně zvyšuje teplotu. Na maximálním nastavení dosáhne teplota přibližně 45°C (113°F). Červené světlo na spodní straně se rozsvítí, když je ohřev aktivní. Opětovným stisknutím tlačítka se ohřev resetuje na úroveň 0 a displej se odpovídajícím způsobem aktualizuje.
-

INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. **Příprava:** Po zapnutí zařízení vyberte požadovaná nastavení. Před použitím naneste na cílovou část těla esenciální olej. Pro citlivou pokožku nejprve otestujte na vnitřní straně předloktí nebo za uchem před úplnou aplikací. Pokud dojde k zarudnutí, otokům nebo svědění, okamžitě přestaňte používat.
 2. **Mód škrábání:**
 - Naneste malé množství esenciálního oleje na pokožku (**neaplikujte olej přímo na zařízení**).
 - Nastavte nízkou úroveň negativního tlaku, přiložte zařízení na pokožku a pohybujte jím v jednom směru.
 - Každá oblast by měla být ošetřena maximálně 20krát, začněte jemně a postupně zvyšujte intenzitu.
 - Zařízení je vybaveno velkým filtračním vatovým nástavcem, který zabraňuje vniknutí oleje a poškození vnitřních komponent. **Filtr vyměňte po každém použití.** Po vysušení ho lze vyčistit a znovu použít.
 3. **Mód přísavky:**
 - Vyberte vhodnou úroveň negativního tlaku.
 - Nechte zařízení sát na pokožce po dobu 3–5 minut.
 - Pro odstranění přísavky nakloňte zařízení a vytáhněte ho nahoru nebo stiskněte tlačítko úlevy od tlaku.
 - **V módu přísavky nepoužívejte esenciální olej.**
-

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Ukládejte zařízení na bezpečném místě, abyste předešli pádu nebo poškození.
2. Udržujte ho na suchém, dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo a korozivní látky.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud zařízení není dlouho používáno, vypněte ho a nabijte každé dva měsíce.
5. V případě technických problémů kontaktujte odborníka. Nepokoušejte se zařízení rozebírat sami.
6. Před čištěním odpojte zařízení a nechte ho vychladnout.
7. Čistěte jemnou, mírně vlhkou houbou nebo hadříkem. Vyhněte se agresivním chemickým čisticím prostředkům.
8. Zařízení není vodotěsné. Nevystavujte ho vodě, vysoké vlhkosti ani jiným kapalinám, aby se předešlo zkratu nebo elektrickému šoku.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.