

SK: CUPNOVA – NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentný masážny prístroj s negatívnym tlakom

Tento návod na použitie sa vzťahuje na nasledujúce modely produktov: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


NABÍJANIE

Toto zariadenie funguje na dobíjateľnú batériu. Po úplnom nabití funguje bezdrôtovo a nemôže byť zapnuté počas nabíjania.

- Počas nabíjania bliká biele indikátorové svetlo. Po úplnom nabití svetlo zostáva stále.
- Zariadenie obsahuje automatický časovač na 20 minút. Digitálny displej zobrazuje odpočítavanie 20 minút a po uplynutí času sa automaticky vypne.
- Doba nabíjania a doba používania závisia od špecifikácií adaptéra.
- Na pozastavenie prevádzky krátko stlačte tlačidlo napájania. Opätovným stlačením pokračujte v prevádzke.

PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV

Ovládanie DS-A12

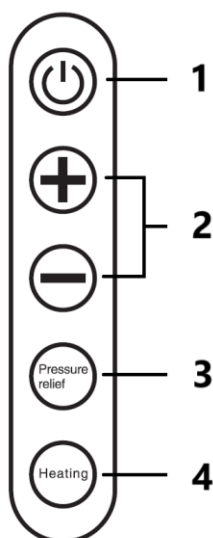

Tento model má **12 úrovní intenzity, funkciu zahrievania a funkciu úľavy od tlaku.**

1. **Tlačidlo napájania:** Posuňte prepínač nahor, potom stlačte a držte 2 sekundy, aby ste zapli zariadenie. Digitálny displej sa rozsvieti a zobrazí "00". Po 2 sekundách začne odpočítavanie 20 minút. Na vypnutie stlačte a držte 2 sekundy opäť; displej sa vypne.
2. **Nastavenie intenzity ([+], [-]):** Krátkym stlačením týchto tlačidiel zvýšte alebo znížte intenzitu negatívneho tlaku. Úrovne sa pohybujú od 0 do 12 (kde 0 znamená žiadne nasávanie). Zariadenie je prednastavené na úroveň 3. Každá zmena aktualizuje displej a po 2 sekundách sa opäť zobrazí odpočítavanie 20 minút.

3. Tlačidlo úľavy od tlaku: Keď je nasávanie aktívne, krátkym stlačením tohto tlačidla uvoľníte vzduch na 1 sekundu, čo uľahčí odstránenie banky.
 4. Tlačidlo zahrievania: Krátkym stlačením nastavte teplotu. Zahrievanie je predvolene vypnuté (úroveň 0). Úrovne sa pohybujú od 0 do 12, pričom každá úroveň zvyšuje teplotu postupne. Pri maximálnom nastavení teplota dosahuje približne 45°C (113°F). Červené svetlo na spodnej strane sa rozsvieti, keď je zahrievanie aktívne. Opätovným stlačením tlačidla sa zahrievanie vráti na úroveň 0 a displej sa podľa toho aktualizuje.
-

POKYNY NA POUŽITIE

1. **Príprava:** Po zapnutí zariadenia vyberte požadované nastavenia. Pred použitím naneste esenciálny olej na cieľovú časť tela. Pre citlivú pokožku najprv otestujte na vnútornej strane predlaktia alebo za uchom pred úplným použitím. Ak dôjde k začervenaniu, opuchu alebo svrbeniu, okamžite prestaňte používať.
 2. **Mód škrabania:**
 - Naneste malé množstvo esenciálneho oleja na pokožku (**neaplikujte olej priamo na zariadenie**).
 - Nastavte negatívny tlak na nízku úroveň, priložte zariadenie na pokožku a pohybujte ním jedným smerom.
 - Každá oblasť by mala byť ošetrená maximálne 20-krát, začnite jemne a postupne zvyšujte intenzitu.
 - Zariadenie je vybavené veľkým filtračným vatovým nástavcom, ktorý zabraňuje vniknutiu oleja do zariadenia a poškodeniu vnútorných komponentov. **Po každom použití vymieňajte filter.** Po vysušení ho môžete vyčistiť a opätovne použiť.
 3. **Mód baňkovania:**
 - Vyberte vhodnú úroveň negatívneho tlaku.
 - Nechajte zariadenie nasávať pokožku po dobu 3-5 minút.
 - Na odstránenie banky nakloňte zariadenie a vytiahnite ho hore alebo stlačte tlačidlo úľavy od tlaku.
 - **V móde baňkovania nepoužívajte esenciálny olej.**
-

ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Ukladajte zariadenie na bezpečnom mieste, aby ste predišli jeho pádu alebo poškodeniu.
2. Udržujte ho na suchom, dobre vetranom mieste, mimo priamych slnečných lúčov a korozívnych látok.
3. Uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho a nabijte každé dva mesiace.
5. V prípade technických problémov kontaktujte odborníka. Nepokúšajte sa zariadenie demontovať sami.
6. Pred čistením odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
7. Čistite mäkkou, mierne vlhkou hubkou alebo handričkou. Vyhnite sa používaniu agresívnych čistiacich prostriedkov.

8. Zariadenie nie je vodotesné. Nevystavujte ho vode, vysokej vlhkosti alebo iným tekutinám, aby ste predišli skratom alebo úrazu elektrickým prúdom.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.