

PL: CUPNOVA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny masażer do bańkowania z negatywnym ciśnieniem

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących modeli produktów: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


ŁADOWANIE

Urządzenie działa na akumulatorze, który można naładować. Po pełnym naładowaniu działa bezprzewodowo i nie może być włączane podczas ładowania.

- Podczas ładowania miga białe światło wskaźnika. Po pełnym naładowaniu światło pozostaje włączone.
 - Urządzenie wyposażone jest w automatyczny timer na 20 minut. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje odliczanie 20 minut i wyłącza się automatycznie po upływie czasu.
 - Czas ładowania i czas użytkowania zależą od specyfikacji adaptera.
 - Aby wstrzymać działanie, naciśnij krótko przycisk zasilania. Naciśnij ponownie, aby wznowić działanie.
-

PRZEGLĄD STEROWANIA

Sterowanie DS-A12

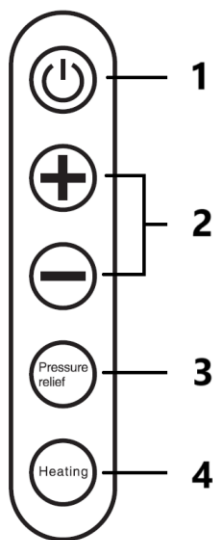

Ten model posiada **12 poziomów intensywności, funkcję podgrzewania oraz funkcję ulgi odcisnięcia**.

1. **Przycisk zasilania:** Przesuń przełącznik w górę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz cyfrowy zaświeci się i wyświetli "00". Po 2 sekundach rozpocznie się odliczanie 20 minut. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy; wyświetlacz zgaśnie.
2. **Regulacja intensywności ([+], [-]):** Naciśnij krótko te przyciski, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność negatywnego ciśnienia. Poziomy mieści się w zakresie od 0 do 12 (gdzie 0

oznacza brak ssania). Domyślnie urządzenie jest ustawione na poziom 3. Każda zmiana aktualizuje wyświetlacz, a odliczanie 20 minut pojawi się ponownie po 2 sekundach.

3. **Przycisk ulgi odcisnięcia:** Kiedy ssanie jest aktywne, naciśnij krótko ten przycisk, aby uwolnić powietrze na 1 sekundę, co ułatwia usunięcie bańki.
4. **Przycisk podgrzewania:** Naciśnij krótko, aby dostosować temperaturę. Podgrzewanie jest domyślnie wyłączone (poziom 0). Poziomy mieści się w zakresie od 0 do 12, z każdym poziomem stopniowo zwiększającym temperaturę. Przy maksymalnym ustawieniu temperatura wynosi około 45°C (113°F). Czerwone światło u podstawy zapala się, gdy podgrzewanie jest aktywne. Ponowne naciśnięcie przycisku zresetuje poziom podgrzewania na 0, a wyświetlacz zostanie odpowiednio zaktualizowany.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. **Przygotowanie:** Po włączeniu urządzenia wybierz odpowiednie ustawienia. Nałóż olejek eteryczny na docelowy obszar ciała przed użyciem. W przypadku skóry wrażliwej, przed pełnym zastosowaniem, przetestuj na wewnętrznej stronie przedramienia lub za uchem. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie, natychmiast zaprzestań użytkowania.
2. **Tryb skrobania:**
 - Nałóż małą ilość olejku eterycznego na skórę (**nie nakładaj olejku bezpośrednio na urządzenie**).
 - Ustaw negatywne ciśnienie na niski poziom, przyłóż urządzenie do skóry i poruszaj nim w jednym kierunku.
 - Każdy obszar nie powinien być traktowany więcej niż 20 razy, zaczynając delikatnie i stopniowo zwiększając intensywność.
 - Urządzenie jest wyposażone w duży filtr bawełniany, który zapobiega przedostawaniu się oleju do wnętrza i uszkodzeniu komponentów wewnętrznych. **Filtr należy wymienić po każdym użyciu.** Można go wyczyścić i ponownie używać po wyschnięciu.
3. **Tryb bańki:**
 - Wybierz odpowiedni poziom negatywnego ciśnienia.
 - Pozwól urządzeniu na ssanie skóry przez 3–5 minut.
 - Aby usunąć bańkę, pochyl urządzenie i pociągnij w górę lub naciśnij przycisk ulgi odcisnięcia.
 - W trybie bańki nie stosuj olejków eterycznych.

OBŚŁUGA I CZYSZCZENIE

1. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec jego upadkowi lub uszkodzeniu.
2. Przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i substancji korozyjnych.
3. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyłącz je i ładuj co dwa miesiące.
5. W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z profesjonalistą. Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.

6. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
7. Czyść miękką, lekko wilgotną gąbką lub ściereczką. Unikaj agresywnych środków czyszczących.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wystawiaj go na działanie wody, wysokiej wilgotności ani innych cieczy, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.