

SI: CUPNOVA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Inteligentni masažer z negativnim tlakom za vakuumsko terapijo

Ta uporabniški priročnik velja za naslednje modele: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


POLNJENJE

Ta naprava deluje na polnilno baterijo. Ko je popolnoma napolnjena, deluje brezžično in se med polnjenjem ne more vklopiti.

- Med polnjenjem bela indikatorska lučka utripa. Ko je naprava popolnoma napolnjena, lučka sveti neprekinjeno.
- Naprava ima samodejni časovnik 20 minut. Digitalni zaslon prikazuje odštevanje 20 minut in se po preteku časa samodejno izklopi.
- Čas polnjenja in trajanje delovanja sta odvisna od specifikacij napajalnega adapterja.
- Za začasno prekinitev delovanja kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. Ponovno ga pritisnite za nadaljevanje delovanja.

PREGLED KRMILNIH TIPK

Krmilne tipke modela DS-A12

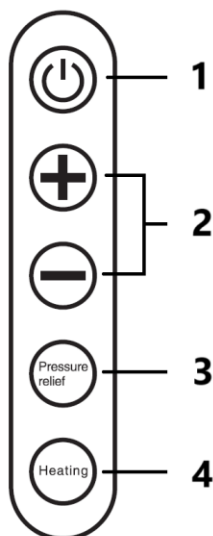

Ta model ima **12 stopenj intenzivnosti**, funkcijo **gretja** in **prostitev pritiska**.

1. **Gumb za vklop/izklop:** Drsnik premaknite navzgor, nato pritisnite in držite 2 sekundi, da vklopite napravo. Digitalni zaslon se bo prižgal in prikazal "00". Po 2 sekundah se začne 20-minutno odštevanje. Za izklop ponovno pritisnite in držite 2 sekundi; zaslon se bo ugasnil.
2. **Prilagajanje intenzivnosti ([+], [-]):** S kratkim pritiskom povečate ali zmanjšate negativni tlak. Stopenj je od 0 do 12 (0 pomeni brez sesanja). Naprava se privzeto zažene na stopnji 3. Vsaka sprememba se prikaže na zaslonu, po 2 sekundah pa se ponovno prikaže 20-minutno odštevanje.

3. **Gumb za sprostitvev pritiska:** Ko je sesanje aktivno, kratkim pritiskom naprava sprosti zrak za 1 sekundo, kar olajša odstranjevanje skodelice.
 4. **Gumb za gretje:** S kratkim pritiskom prilagodite temperaturo. Gretje je privzeto izklopljeno (stopnja 0). Stopenj je od 0 do 12, pri čemer vsaka stopnja postopoma povečuje temperaturo. Pri najvišji stopnji temperatura doseže približno 45 °C (113 °F). Ko je funkcija gretja aktivna, se prižge rdeča lučka na dnu naprave. Ponoven pritisk ponastavi stopnjo na 0, kar se prikaže na zaslonu.
-

NAVODILA ZA UPORABO

1. **Priprava:** Po vklopu naprave izberite željene nastavitve. Pred uporabo na kožo nanesite eterično olje. Če imate občutljivo kožo, najprej preizkusite olje na notranji strani podlakti ali za ušesom. Če se pojavi rdečica, oteklina ali srbenje, nemudoma prenehajte z uporabo.
 2. **Način strganja:**
 - Na kožo nanesite majhno količino eteričnega olja (**ne nanašajte olja neposredno na napravo**).
 - Nastavite nizko stopnjo negativnega tlaka, namestite napravo na kožo in jo premikajte v eni smeri.
 - Vsako področje obdelajte največ 20-krat, začnite nežno in postopoma povečujte intenzivnost.
 - Naprava ima velik bombažni filter, ki preprečuje vdor olja v notranje komponente. **Filter je treba po vsaki uporabi zamenjati.** Lahko ga operete in ponovno uporabite, ko se posuši.
 3. **Način vakuumskega terapijanja:**
 - Izberite primerno stopnjo negativnega tlaka.
 - Napravo pustite na koži 3–5 minut.
 - Za odstranitev skodelice nagnite napravo in jo potegnite navzgor ali pritisnite gumb za sprostitvev pritiska.
 - **Za ta način ne uporabljajte eteričnega olja.**
-

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

1. Napravo shranjujte na varnem mestu, da preprečite padec ali poškodbo.
 2. Hranite jo v suhem in dobro prezračenem prostoru, stran od sončne svetlobe in korozivnih snovi.
 3. Hranite izven dosega otrok.
 4. Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo izklopite in vsaka dva meseca popolnoma napolnite.
 5. Za tehnične težave se obrnite na strokovnjaka. Naprave ne razstavljajte sami.
 6. Pred čiščenjem izključite napravo iz napajanja in jo pustite, da se ohladi.
 7. Očistite jo z mehko, rahlo vlažno gobico ali krpo. Izogibajte se agresivnim kemikalijam.
 8. Naprava ni vodoodporna. Ne izpostavljajte je vodi, visoki vlagi ali drugim tekočinam, da preprečite kratki stik ali električni udar.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.