

HR: CUPNOVA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Inteligentni masažer s negativnim tlakom za vakuumsko čaširanje

Ovaj korisnički priručnik odnosi se na sljedeće modele: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

PUNJENJE


Ovaj uređaj radi na punjivu bateriju. Kada je potpuno napunjen, funkcionira bežično i ne može se uključiti tijekom punjenja.

- Tijekom punjenja bijelo indikatorsko svjetlo treperi. Kada je uređaj potpuno napunjen, svjetlo ostaje stalno upaljeno.
- Uređaj ima automatski timer od 20 minuta. Digitalni zaslon prikazuje odbrojanje od 20 minuta i automatski se isključuje nakon isteka vremena.
- Vrijeme punjenja i trajanje rada ovise o specifikacijama adaptera.
- Za privremeno zaustavljanje rada kratko pritisnite tipku za uključivanje. Ponovno pritisnite za nastavak rada.

PREGLED KONTROLA

Kontrole modela DS-A12

Ovaj model ima **12 razina intenziteta**, funkciju **grijanja** i **otpuštanja tlaka**.

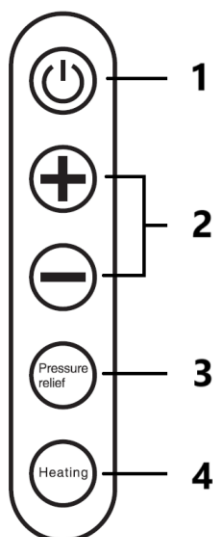

1. **Tipka za uključivanje:** Pomaknite prekidač prema gore, zatim pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje uređaja. Digitalni zaslon će se upaliti i prikazati "00". Nakon 2 sekunde započinje odbrojanje od 20 minuta. Za isključivanje, ponovno pritisnite i držite 2 sekunde; zaslon će se ugasiti.
2. **Podešavanje intenziteta ([+], [-]):** Kratkim pritiskom povećavate ili smanjujete negativni tlak. Razine su od 0 do 12 (gdje 0 znači bez usisavanja). Uređaj se pri pokretanju automatski postavlja na razinu 3. Svaka promjena prikazuje se na zaslonu, a odbrojanje od 20 minuta ponovno se pojavljuje nakon 2 sekunde.

3. **Tipka za otpuštanje tlaka:** Kada je usisavanje aktivno, kratkim pritiskom otpušta se zrak na 1 sekundu, što olakšava uklanjanje čaše.
 4. **Tipka za grijanje:** Kratkim pritiskom podešava se temperatura. Grijanje je isključeno (razina 0) pri pokretanju. Razine su od 0 do 12, pri čemu svaka razina povećava temperaturu postepeno. Pri maksimalnoj postavci temperatura dostiže približno 45°C (113°F). Kada je funkcija grijanja aktivna, crveno svjetlo na dnu uređaja se upali. Ponovnim pritiskom vraća se na razinu 0, a prikaz na zaslonu se ažurira.
-

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. **Priprema:** Nakon uključivanja uređaja odaberite željene postavke. Prije upotrebe nanesite esencijalno ulje na željeni dio tijela. Za osjetljivu kožu, isprobajte ulje na unutarnjoj strani podlaktice ili iza uha prije pune primjene. Ako se pojavi crvenilo, oticanje ili svrbež, odmah prekinite korištenje.
 2. **Način struganja:**
 - Nanesite malu količinu esencijalnog ulja na kožu (**ne nanositi ulje izravno na uređaj**).
 - Postavite niski negativni tlak, pričvrstite uređaj na kožu i povlačite ga u jednom smjeru.
 - Svako područje tretirajte najviše 20 puta, postupno povećavajući intenzitet.
 - Uređaj je opremljen velikim filterom od pamuka koji sprječava ulazak ulja i štiti unutarnje komponente. **Filter pamuk treba zamijeniti nakon svake upotrebe.** Može se očistiti i ponovo koristiti kada se osuši.
 3. **Način vakuumskeg čaširanja:**
 - Odaberite odgovarajuću razinu negativnog tlaka.
 - Ostavite uređaj da prijanja na kožu 3–5 minuta.
 - Za uklanjanje čaše nagnite uređaj i povucite ga prema gore ili pritisnite tipku za otpuštanje tlaka.
 - **Ne koristite esencijalno ulje za način čaširanja.**
-

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Pohranite uređaj na sigurno mjesto kako biste spriječili padove i oštećenja.
 2. Čuvajte na suhom i prozračnom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i korozivnih tvari.
 3. Držite izvan dohvata djece.
 4. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, isključite ga i potpuno napunite svaka dva mjeseca.
 5. Za tehničke probleme obratite se stručnjaku. Ne rastavljajte uređaj sami.
 6. Prije čišćenja, isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi.
 7. Očistite mekanom, lagano navlaženom spužvom ili krpom. Izbjegavajte agresivna kemijska sredstva.
 8. Uređaj nije voodootporan. Ne izlažite ga vodi, visokoj vlažnosti ili drugim tekućinama, kako biste spriječili kratki spoj ili strujni udar.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.