

BG: SUPNOVA - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интелигентен масажор с чаша за отрицателно налягане

Това ръководство за употреба се отнася за следните модели продукти: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

ЗАРЕЖДАНЕ


Това устройство работи с презареждаща се батерия. След като бъде напълно заредено, то функционира безжично и не може да бъде включено, докато се зарежда.

- По време на зареждането бялата индикаторна светлина мига. Когато е напълно заредена, светлината остава постоянна.
- Устройството включва 20-минутен автоматичен таймер. Дигиталният дисплей показва 20-минутно обратно броене и се изключва автоматично след изтичане на времето.
- Времето за зареждане и продължителността на използване зависят от спецификациите на адаптера.
- За да спрете работа, натиснете за кратко бутона за захранване. Натиснете го отново, за да продължите.

ПРЕГЛЕД НА УПРАВЛЕНИЕТО

Управление на DS-A12

Този модел разполага с **12 нива на интензивност**, функции за **нагряване** и **освобождаване на налягането**.

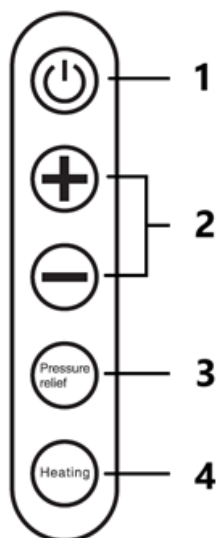

Този модел разполага с **12 нива на интензивност**, **отопление** и функции за **освобождаване на налягането**.

1. **Бутон за захранване:** Плъзнете превключвателя нагоре, след което натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите устройството. Дигиталният дисплей ще светне и ще покаже "00". След 2 секунди започва 20-минутното обратно броене. За да го изключите, отново натиснете и задръжте за 2 секунди; дисплеят ще се изключи.

2. **Регулиране на интензивността ([+], [-]):** Натиснете кратко тези бутони, за да увеличите или намалите интензивността на отрицателното налягане. Нивата варират от 0 до 12 (където 0 означава липса на засмукване). По подразбиране устройството стартира на ниво 3. Всяка настройка актуализира дисплея, а 20-минутното обратно броене се появява отново след 2 секунди.
 3. **Бутон за освобождаване на налягането:** Когато засмукването е активно, натискането на този бутон освобождава за кратко въздух за 1 секунда, което улеснява изваждането на чашата.
 4. **Бутон за нагряване:** Натиснете кратко, за да регулирате температурата. Отоплението е изключено по подразбиране (ниво 0). Нивата варират от 0 до 12, като на всяко ниво температурата се увеличава прогресивно. При максимална настройка температурата достига приблизително 45°C (113°F). Червената лампичка в основата свети, когато отоплението е активно. Повторното натискане на бутона връща нивото на отопление на 0 и дисплеят се актуализира съответно.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. **Приготвяне:** След като включите устройството, изберете желаните настройки. Нанесете етерично масло върху целевата зона на тялото преди употреба. За чувствителна кожа, преди пълното нанасяне направете тест върху вътрешната част на предмишницата или зад ухото. Ако се появи зачервяване, подуване или сърбеж, незабавно прекратете употребата.
 2. **Режим на изстъргване:**
 - Нанесете малко количество етерично масло върху кожата (**не нанасяйте маслото директно върху машината**).
 - Настройте отрицателното налягане на ниско ниво, прикрепете устройството към кожата и го движете в една посока.
 - Всяка зона трябва да се третира не повече от 20 пъти, като се започне леко и постепенно се увеличава интензивността.
 - Устройството е оборудвано с голям памучен филтър, за да се предотврати навлизането на масло и повреждането на вътрешните компоненти. **Сменяйте филтърния памук след всяка употреба.** Той може да бъде почистен и използван повторно, след като изсъхне.
 3. **Режим на работа с чаша:**
 - Изберете подходящо ниво на отрицателно налягане.
 - Оставете устройството да засмуква кожата в продължение на 3-5 минути.
 - За да отстраните чашата, наклонете устройството и го издърпайте нагоре или натиснете бутона за освобождаване на налягането.
 - **Не използвайте етерични масла за режима на чашодържане.**
-

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

1. Съхранявайте устройството на безопасно място, за да предотвратите падане или повреда.
2. Съхранявайте на сухо, добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина и корозивни вещества.
3. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
4. Ако не се използва за продължителен период от време, изключвайте захранването и зареждайте на всеки два месеца.
5. При технически проблеми се обърнете към специалист. Не разглобявайте устройството сами.
6. Преди почистване изключете устройството от електрическата мрежа и го оставете да изстине.
7. Почиствайте с мека, леко влажна гъба или кърпа. Избягвайте използването на агресивни химически почистващи препарати.
8. Устройството не е водоустойчиво. Не го излагайте на вода, висока влажност или други течности, за да предотвратите късо съединение или токов удар.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.