

LV: CUPNOVA - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Inteliģentais negatīvā spiediena kausa masāžas aparāts

Šī lietošanas pamācība attiecas uz šādiem izstrādājumu modeļiem: **DS-A10, DS-A11, DS-A12.**

UZLĀDZĒŠANA


Šī ierīce darbojas ar uzlādējamu akumulatoru. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā darbojas bezvadu režīmā, un uzlādes laikā to nevar ieslēgt.

- Uzlādes laikā mirgo balta indikatora gaismiņa. Kad uzlāde ir pilnībā pabeigta, indikators ir vienmērīgs.
- Ierīcē ir 20 minūšu automātiskais taimeris. Digitālais displejs rāda 20 minūšu atpakaļskaitīšanu un automātiski izslēdzas, kad šis laiks ir pagājis.
- Uzlādes laiks un lietošanas ilgums ir atkarīgs no adaptera specifikācijām.
- Lai apturētu darbību, īsi nospiediet ieslēgšanas pogu. Lai atsāktu darbību, nospiediet to vēlreiz.

VADĪBAS IERĪČU PĀRSKATS

DS-A12 vadības ierīces

Šim modelim ir **12 intensitātes līmeņi**, **sildīšanas** un **spiediena samazināšanas** funkcijas.

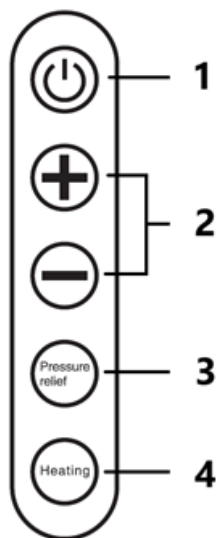

Šim modelim ir **12 intensitātes līmeņi**, **sildīšanas** un **spiediena samazināšanas** funkcijas.

1. **Iedarbināšanas poga:** Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes. Digitālais displejs iedegsies un rādīs "00". Pēc 2 sekundēm sāksies 20 minūšu atpakaļskaitīšana. Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet un turiet 2 sekundes; displejs izslēgsies.
2. **Intensitātes regulēšana ([+], [-]):** Īsi nospiediet šīs pogas, lai palielinātu vai samazinātu negatīvā spiediena intensitāti. Līmeņu diapazons ir no 0 līdz 12 (kur 0 nozīmē, ka nav

iesūkšanas). Pēc noklusējuma ierīce ieslēdzas 3. līmenī. Katra regulēšana atjaunina displeju, un pēc 2 sekundēm atkal parādās 20 minūšu atpakaļskaitīšanas rādījums.

3. **Spiediena samazināšanas poga:** Kad ir ieslēgta sūkņēšana, nospiežot šo pogu, uz 1 sekundi īslaicīgi tiek izlaists gaiss, tādējādi atvieglojot krūzes izņemšanu.
4. **Sildīšanas poga:** Īsi nospiediet, lai regulētu temperatūru. Pēc noklusējuma sildīšana ir izslēgta (0 līmenis). Līmeņu diapazons ir no 0 līdz 12, un katrs līmenis pakāpeniski palielina temperatūru. Maksimālajā iestatījumā temperatūra sasniedz aptuveni 45 °C (113 °F). Kad sildīšana ir ieslēgta, pamatnē iedegas sarkana gaisma. Vēlreiz nospiežot pogu, sildīšanas līmenis tiek atjaunots līdz 0, un displejs attiecīgi atjauninās.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. **Sagatavošana:** Pēc ierīces ieslēgšanas izvēlieties vēlamos iestatījumus. Pirms lietošanas uzklājiet ēterisko eļļu uz mērķa ķermeņa zonas. Ja āda ir jutīga, pirms pilnīgas lietošanas izmēģiniet uz iekšējās apakšdelma daļas vai aiz auss. Ja rodas apsārtums, pietūkums vai nieze, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
2. **Skrāpēšanas režīms:**
 - Uzklājiet nelielu daudzumu ēteriskās eļļas uz ādas(**nelietojiet eļļu tieši uz aparāta**).
 - Iestatiet zemu negatīvo spiedienu, piestipriniet ierīci pie ādas un kustiniet to vienā virzienā.
 - Katru zonu apstrādājiet ne vairāk kā 20 reizes, sākot viegli un pakāpeniski palielinot intensitāti.
 - Ierīce ir aprīkota ar lielu kokvilnas filtru, lai novērstu eļļas iekļūšanu un iekšējo komponentu bojāšanu. **Pēc katras lietošanas reizes nomainiet filtra vati.** Pēc izžūšanas to var iztīrīt un izmantot atkārtoti.
3. **Kausēšanas režīms:**
 - Izvēlieties piemērotu negatīvā spiediena līmeni.
 - Ļaujiet ierīcei iesūkt ādu 3-5 minūtes.
 - Lai izņemtu krūzi, vai nu nolieciet ierīci un pavelciet uz augšu, vai nospiediet spiediena atbrīvošanas pogu.
 - **Neizmantojiet ēterisko eļļu kausēšanas režīmā.**

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1. Uzglabājiet ierīci drošā vietā, lai novērstu kritienus vai bojājumus.
2. Uzglabāt sausā, labi vēdināmā vietā, prom no tiešiem saules stariem un kodīgām vielām.
3. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
4. Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izslēdziet strāvas padevi un reizi divos mēnešos uzlādējiet ierīci.
5. Tehnisku problēmu gadījumā sazinieties ar speciālistu. Neizjauciet ierīci paši.
6. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no tīkla un ļaujiet tai atdzist.

7. Tīriet ar mīkstu, nedaudz mitru sūkli vai drānu. Izvairieties no asiem ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.
 8. Ierīce nav ūdensizturīga. Nepakļaujiet to ūdens, augsta mitruma vai citu šķidrumu iedarbībai, lai novērstu īssavienojumu vai elektrošoku.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.