

SR (Latn.): CUPNOVA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Inteligentni masažer sa negativnim pritiskom za vakuumsku terapiju

Ovo korisničko uputstvo važi za sledeće modele: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


PUNJENJE

Ovaj uređaj radi na punjivu bateriju. Kada se potpuno napuni, funkcioniše bežično i ne može se uključiti dok je na punjenju.

- Tokom punjenja bela indikator lampica treperi. Kada je uređaj potpuno napunjen, lampica svetli neprekidno.
- Uređaj ima automatski tajmer od 20 minuta. Digitalni ekran prikazuje odbrojavanje od 20 minuta i po isteku vremena automatski se isključuje.
- Vreme punjenja i trajanje upotrebe zavise od specifikacija adaptera za napajanje.
- Za privremenu pauzu u radu kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Ponovo ga pritisnite da nastavite rad.

PREGLED KONTROLA

Kontrole modela DS-A12

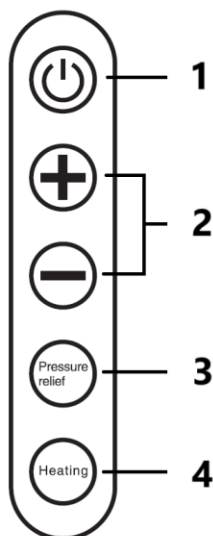

Ovaj model ima **12 nivoa intenziteta**, funkciju **grejanja** i **oslobađanja pritiska**.

1. **Dugme za uključivanje/isključivanje:** Pomaknite prekidač nagore, zatim pritisnite i držite 2 sekunde da biste uključili uređaj. Digitalni ekran će se uključiti i prikazati "00". Nakon 2 sekunde, zapoće odbrojavanje od 20 minuta. Za isključivanje ponovo pritisnite i držite 2 sekunde; ekran će se ugasiti.
2. **Podešavanje intenziteta ([+], [-]):** Kratkim pritiskom povećavate ili smanjujete negativni pritisak. Nivoi su od 0 do 12 (0 znači bez usisavanja). Uređaj se podrazumevano uključuje na nivou 3. Svaka promena se prikazuje na ekranu, a nakon 2 sekunde ponovo se prikazuje odbrojavanje od 20 minuta.

3. **Dugme za oslobađanje pritiska:** Kada je usisavanje aktivno, kratkim pritiskom uređaj oslobađa vazduh na 1 sekundu, olakšavajući uklanjanje čašice.
 4. **Dugme za grejanje:** Kratkim pritiskom podešavate temperaturu. Grejanje je podrazumevano isključeno (nivo 0). Nivoi su od 0 do 12, pri čemu svaki nivo postepeno povećava temperaturu. Na maksimalnom nivou, temperatura dostiže oko 45 °C (113 °F). Kada je funkcija grejanja aktivna, crveno svetlo na dnu uređaja će se upaliti. Ponovnim pritiskom nivo se vraća na 0, a ekran se ažurira.
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. **Priprema:** Nakon uključivanja uređaja, podesite željena podešavanja. Pre upotrebe nanosite eterično ulje na kožu. Ako imate osetljivu kožu, prvo testirajte ulje na unutrašnjoj strani podlaktice ili iza uha. Ako se pojavi crvenilo, otok ili svrab, odmah prekinite upotrebu.
 2. **Režim struganja:**
 - Nanesite malu količinu eteričnog ulja na kožu (**ne nanosite ulje direktno na uređaj**).
 - Podesite nizak nivo negativnog pritiska, postavite uređaj na kožu i pomerajte ga u jednom pravcu.
 - Svaku oblast tretirajte najviše 20 puta, počnite blago i postepeno povećavajte intenzitet.
 - Uređaj ima veliki pamučni filter koji sprečava ulazak ulja u unutrašnje komponente. **Filter je potrebno zameniti nakon svake upotrebe.** Može se oprati i ponovo koristiti nakon što se osuši.
 3. **Režim vakuumske terapije:**
 - Izaberite odgovarajući nivo negativnog pritiska.
 - Ostavite uređaj na koži 3–5 minuta.
 - Da biste uklonili čašicu, nagnite uređaj i povucite ga nagore ili pritisnite dugme za oslobađanje pritiska.
 - **Ne koristite eterično ulje u ovom režimu.**
-

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Čuvajte uređaj na sigurnom mestu, kako biste sprečili pad ili oštećenje.
 2. Držite ga na suvom i dobro provetrenom mestu, dalje od sunčeve svetlosti i korozivnih supstanci.
 3. Držite van domašaja dece.
 4. Ako uređaj ne koristite duže vreme, isključite ga i puniti svaka dva meseca.
 5. Za tehničke probleme obratite se stručnjaku. Ne rastavljajte uređaj sami.
 6. Pre čišćenja isključite uređaj iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
 7. Očistite ga mekom, blago vlažnom sunđerom ili krpom. Izbegavajte agresivne hemikalije.
 8. Uređaj nije voodootporan. Ne izlažite ga vodi, visokoj vlažnosti ili drugim tečnostima, kako biste sprečili kratak spoj ili strujni udar.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CUPNOVA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Интелигентни масажер са негативним притиском за вакуумску терапију

Ово корисничко упутство важи за следеће моделе: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**


ПУЊЕЊЕ

Овај уређај ради на пуњиву батерију. Када се потпуно напуни, функционише бежично и не може се укључити док је на пуњењу.

- Током пуњења бела индикатор лампица трепери. Када је уређај потпуно напуњен, лампица светли непрекидно.
- Уређај има аутоматски тајмер од 20 минута. Дигитални екран приказује одбројавање од 20 минута и по истеку времена аутоматски се искључује.
- Време пуњења и трајање употребе зависе од спецификација адаптера за напајање.
- За привремену паузу у раду кратко притисните дугме за укључивање/искључивање. Поново га притисните да наставите рад.

ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА

Контроле модела DS-A12

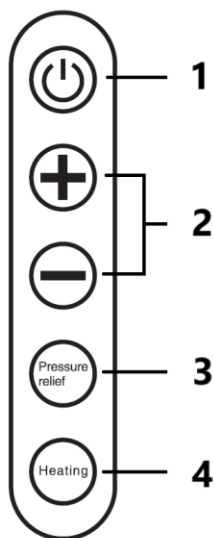

Овај модел има **12 нивоа интензитета**, функцију **грејања** и **ослобађања притиска**.

1. **Дугме за укључивање/искључивање:** Померите прекидач нагоре, затим притисните и држите 2 секунде да бисте укључили уређај. Дигитални екран ће се укључити и приказати "00". Након 2 секунде, започеће одбројавање од 20 минута. За искључивање поново притисните и држите 2 секунде; екран ће се угасити.
2. **Подешавање интензитета ([+], [-]):** Кратким притиском повећавате или смањујете негативни притисак. Нивои су од 0 до 12 (0 значи без усисавања). Уређај се подразумевано укључује на нивоу 3. Свака промена се приказује на екрану, а након 2 секунде поново се приказује одбројавање од 20 минута.

3. **Дугме за ослобађање притиска:** Када је усисавање активно, кратким притиском уређај ослобађа ваздух на 1 секунду, олакшавајући уклањање чашице.
 4. **Дугме за грејање:** Кратким притиском подешавате температуру. Грејање је подразумевано искључено (ниво 0). Нивои су од 0 до 12, при чему сваки ниво постепено повећава температуру. На максималном нивоу, температура достиже око 45 °C (113 °F). Када је функција грејања активна, црвено светло на дну уређаја ће се упалити. Поновним притиском ниво се враћа на 0, а екран се ажурира.
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. **Припрема:** Након укључивања уређаја, подесите жељена подешавања. Пре употребе нанесите етерично уље на кожу. Ако имате осетљиву кожу, прво тестирајте уље на унутрашњој страни подлактице или иза уха. Ако се појави црвенило, оток или свраб, одмах прекините употребу.
 2. **Режим стругања:**
 - Нанесите малу количину етеричног уља на кожу (**не наносите уље директно на уређај**).
 - Подесите низак ниво негативног притиска, поставите уређај на кожу и померајте га у једном правцу.
 - Сваку област третирајте највише 20 пута, почните благо и постепено повећавајте интензитет.
 - Уређај има велики памучни филтер који спречава улазак уља у унутрашње компоненте. **Филтер је потребно заменити након сваке употребе.** Може се опрати и поново користити након што се осуши.
 3. **Режим вакуумске терапије:**
 - Изаберите одговарајући ниво негативног притиска.
 - Оставите уређај на кожи 3–5 минута.
 - Да бисте уклонили чашицу, нагните уређај и повуците га нагоре или притисните дугме за ослобађање притиска.
 - **Не користите етерично уље у овом режиму.**
-

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

1. Чувајте уређај на сигурном месту, како бисте спречили пад или оштећење.
2. Држите га на сувом и добро проветреном месту, даље од сунчеве светлости и корозивних супстанци.
3. Држите ван домашаја деце.
4. Ако уређај не користите дуже време, искључите га и пуните свака два месеца.
5. За техничке проблеме обратите се стручњаку. Не растављајте уређај сами.
6. Пре чишћења искључите уређај из напајања и оставите га да се охлади.
7. Очистите га меком, благо влажном сунђером или крпом. Избегавајте агресивне хемикалије.

8. Уређај није водоотпоран. Не излажите га води, високој влажности или другим течностима, како бисте спречили кратак спој или струјни удар.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније