

# HU: CUPNOVA - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## Intelligens negatív nyomású csészemasszázs gép

Ez a használati útmutató a következő termékmodellekre vonatkozik: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

---

### TÖLTÉS


Ez a készülék újratölthető akkumulátorral működik. Ha teljesen feltöltődött, vezeték nélkül működik, és töltés közben nem kapcsolható be.

- Töltés közben a fehér jelzőfény villog. Teljesen feltöltve a fény folyamatosan világít.
  - A készülék 20 perces automatikus időzítővel rendelkezik. A digitális kijelző 20 perces visszaszámlálást mutat, és az idő leteltével automatikusan kikapcsol.
  - A töltési idő és a használat időtartama az adapter specifikációjától függ.
  - A működés szüneteltetéséhez nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A folytatáshoz nyomja meg újra.
- 

### KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE

#### DS-A12 kezelőszervek

Ez a modell **12 intenzitási szinttel**, **fűtéssel** és **nyomáscsökkentő** funkcióval rendelkezik.

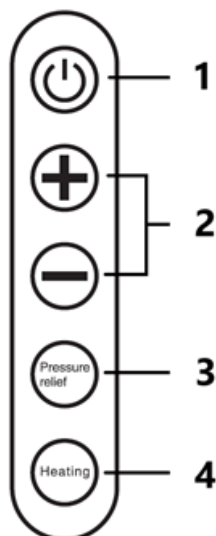

Ez a modell **12 intenzitási szinttel**, **fűtéssel** és **nyomáscsökkentő** funkciókkal rendelkezik.

1. **Bekapcsológomb:** Csúsztassa felfelé a kapcsolót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A digitális kijelző világítani fog, és a "00" feliratot fogja mutatni. A 2 másodperc elteltével megkezdődik a 20 perces visszaszámlálás. Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 2 másodpercig; a kijelző kikapcsol.
2. **Az intenzitás beállítása ([+], [-]):** Nyomja meg röviden ezeket a gombokat a negatív nyomás intenzitásának növeléséhez vagy csökkentéséhez. A szintek 0-tól 12-ig terjednek (ahol a 0 azt

jelenti, hogy nincs szívás). Alapértelmezés szerint a készülék a 3. szinten indul. Minden egyes beállítás frissíti a kijelzőt, és a 20 perces visszaszámlálás 2 másodperc után újra megjelenik.

3. **Nyomáscsökkentő gomb:** Amikor a szívás aktív, ennek a gombnak a megnyomásával 1 másodpercre rövid időre kiengedi a levegőt, megkönnyítve ezzel a csésze eltávolítását.
4. **Fűtés gomb:** A hőmérséklet beállításához nyomja meg röviden. A fűtés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva (0. szint). A szintek 0-tól 12-ig terjednek, és minden szint fokozatosan növeli a hőmérsékletet. A maximális beállításnál a hőmérséklet megközelítőleg 45°C (113°F). A talpnál lévő piros lámpa világít, ha a fűtés aktív. A gomb ismételt megnyomásával a fűtési szint 0-ra áll vissza, és a kijelző ennek megfelelően frissül.

---

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **Előkészítés:** A készülék bekapcsolása után válassza ki a kívánt beállításokat. Használat előtt vigyen fel illóolajat a célzott testfelületre. Érzékeny bőr esetén a teljes alkalmazás előtt tesztelje az alkar belső részén vagy a fül mögött. Ha bőrpír, duzzanat vagy viszketés jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát.
2. **Kaparó üzemmód:**
  - Vigyen fel kis mennyiségű illóolajat a bőrre **(ne vigye fel az olajat közvetlenül a gépre)**.
  - Állítsa a negatív nyomást alacsony szintre, rögzítse a készüléket a bőrhöz, és mozgassa azt egy irányba.
  - Minden területet legfeljebb 20-szor kell kezelni, finoman kezdve és fokozatosan növelve az intenzitást.
  - A készülék nagyméretű szűrőpamuttal van ellátva, hogy megakadályozza az olaj bejutását és a belső alkatrészek károsodását. **Minden használat után cserélje ki a szűrővattát.** Száradás után megtisztítható és újra felhasználható.
3. **Cupping üzemmód:**
  - Válassza ki a megfelelő negatív nyomásszintet.
  - Hagyja, hogy a készülék 3-5 percig szívja a bőrt.
  - A csésze eltávolításához vagy döntse meg a készüléket és húzza felfelé, vagy nyomja meg a nyomáscsökkentő gombot.
  - **Ne használjon illóolajat a csészézési módhoz.**

---

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Tárolja a készüléket biztonságos helyen, hogy elkerülje a leesést vagy sérülést.
2. Tartsa száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és maró anyagoktól távol.
3. Tartsa gyermekek elől elzárva.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket, és kéthavonta töltsen fel.
5. Műszaki problémák esetén forduljon szakemberhez. Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
6. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni.
7. Tisztítsa puha, enyhén nedves szivaccsal vagy ruhával. Kerülje a durva kémiai tisztítószereket.

8. A készülék nem vízálló. Ne tegye ki víznek, magas páratartalomnak vagy más folyadékoknak, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy áramütést.
- 

#### **UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:**



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.