

LT: CUPNOVA - VARTOTOJO VADOVAS

Išmanusis neigiamo slėgio puodelių masažuoklis

Ši instrukcija taikoma šiems gaminių modeliams: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

ĮKROVIMAS


Šis prietaisas veikia naudodamas įkraunamą akumuliatorių. Visiškai įkrautas prietaisas veikia belaidžiu būdu, o įkrovimo metu jo įjungti negalima.

- Įkrovimo metu mirksi balta indikatoriaus lemputė. Kai visiškai įkrautas, lemputė išlieka pastovi.
 - Prietaise yra 20 minučių automatinis laikmatis. Skaitmeniniame ekrane rodomas 20 minučių atgalinis skaičiavimas, o pasibaigus laikui automatiškai išsijungia.
 - Įkrovimo laikas ir naudojimo trukmė priklauso nuo adapterio specifikacijų.
 - Norėdami pristabdyti veikimą, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką. Norėdami tęsti, paspauskite jį dar kartą.
-

VALDIKLIŲ APŽVALGA

DS-A12 valdikliai

Šiame modelyje yra **12 intensyvumo lygių, šildymo ir slėgio mažinimo** funkcijos.

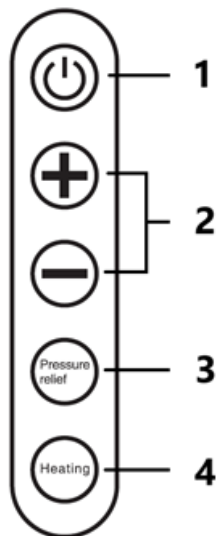

Šiame modelyje yra **12 intensyvumo lygių, šildymo ir slėgio mažinimo** funkcijos.

1. **Maitinimo mygtukas:** Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte prietaisą. Skaitmeninis ekranas užsidegs ir rodys "00". Po 2 sekundžių prasidės 20 minučių atgalinis skaičiavimas. Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite ir palaikykite 2 sekundes; ekranas išsijungs.
2. **Intensyvumo reguliavimas ([+], [-]):** Trumpai paspauskite šiuos mygtukus, kad padidintumėte arba sumažintumėte neigiamo slėgio intensyvumą. Lygiai svyruoja nuo 0 iki 12 (kai 0 reiškia,

kad nėra siurbimo). Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas paleidžiamas 3 lygiu. Kiekvieno reguliavimo metu atnaujinamas ekranas, o po 2 sekundžių vėl rodomas 20 minučių atgalinis skaičiavimas.

3. **Slėgio mažinimo mygtukas:** Kai įjungtas siurbimas, paspaudus šį mygtuką 1 sekundę trumpam išleidžiamas oras, todėl puodelį lengviau išimti.
4. **Šildymo mygtukas:** Trumpai paspauskite, kad sureguliuotumėte temperatūrą. Pagal numatytuosius nustatymus šildymas yra išjungtas (0 lygis). Lygiai svyruoja nuo 0 iki 12, kiekviename lygyje temperatūra didinama palaipsniui. Esant maksimaliam nustatymui, temperatūra pasiekia maždaug 45 °C (113 °F). Kai šildymas įjungtas, dugne šviečia raudona lemputė. Paspaudus mygtuką dar kartą, šildymo lygis atstatomas į 0, o ekranas atitinkamai atnaujinamas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. **Paruošimas:** Įjungę prietaisą, pasirinkite norimus nustatymus. Prieš naudodami patepkite eteriniu aliejumi tikslinę kūno sritį. Jautriai odai prieš naudodami visą priemonę išbandykite ant vidinės dilbio pusės arba už ausies. Jei atsiranda paraudimas, patinimas ar niežulys, nedelsdami nutraukite naudojimą.
2. **Šveitimo režimas:**
 - Nedidelį eterinio aliejaus kiekį užtepkite ant odos (**netepkite aliejaus tiesiai ant aparato**).
 - Nustatykite žemą neigiamo slėgio lygį, pridėkite prietaisą prie odos ir judinkite jį viena kryptimi.
 - Kiekvieną sritį reikėtų apdoroti ne daugiau kaip 20 kartų, pradedant švelniai ir palaipsniui didinant intensyvumą.
 - Prietaisas turi didelį medvilninį filtrą, kad aliejus nepatektų ir nepažeistų vidinių komponentų. **Po kiekvieno naudojimo pakeiskite filtravimo vatą.** Ją galima išvalyti ir naudoti pakartotinai, kai ji išdžiūsta.
3. **Puodelių režimas:**
 - Pasirinkite tinkamą neigiamo slėgio lygį.
 - Leiskite prietaisui siurbti odą 3-5 minutes.
 - Norėdami išimti taure, pakreipkite prietaisą ir patraukite aukštyn arba paspauskite slėgio mažinimo mygtuką.
 - **Nenaudokite eterinio aliejaus puodelių režimui.**

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

1. Laikykite prietaisą saugioje vietoje, kad jis nenukristų ir nebūtų pažeistas.
2. Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir korozinių medžiagų.
3. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Jei nenaudojamas ilgesnį laiką, išjunkite maitinimą ir kas du mėnesius įkraukite prietaisą.
5. Kilus techniniams klausimams, kreipkitės į specialistą. Neišardykite prietaiso patys.

6. Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
 7. Valykite minkšta, šiek tiek drėgna kempine arba šluoste. Venkite aštrių cheminių valiklių.
 8. Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar elektros smūgio, nelaikykite jo vandenyje, didelėje drėgmėje ar kituose skysčiuose.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.