



KORISNIČKI PRIRUČNIK

FOOTPAD

Broj modela: YQL-001




Tehničke specifikacije:

Ime proizvoda	PODLOGA ZA NOGE
napon	Alkalna baterija 1.5 V, 2 x AAA
Načini rada	6 (A-F)
Frekvencija	1-100 Hz
Izlaz	8 mA
Veličina	32x29 cm
Težina	57,4 g

Paket uključuje:

- 1 x jastučić za masažu stopala
- 1 x uklonjivi prekidač za upravljanje
- 1 x uputstvo za upotrebu
- 2 x AAA baterije

Pregled proizvoda:

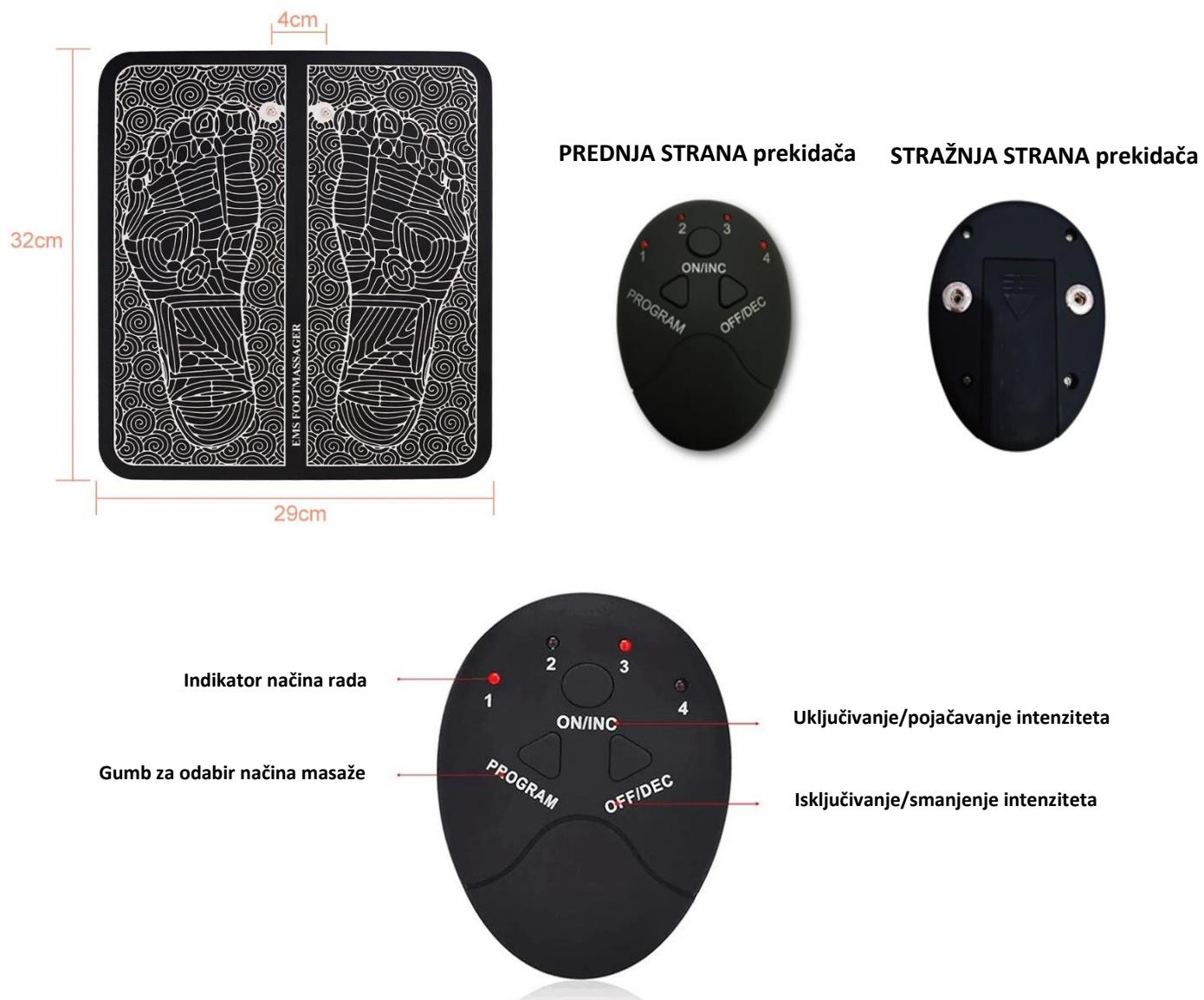

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod se ne smije koristiti za ublažavanje nedijagnosticirane boli, ovo nije medicinski uređaj. Prije liječenja bilo kojeg stanja boli, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Koristite niski intenzitet i kraće trajanje uporabe kako biste izbjegli pretjeranu stimulaciju.
- Ovaj proizvod nije igračka! Kako biste izbjegli rizik od električnog udara ili drugih ozljeda, stavite proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Ovaj proizvod nije vodo otporan, nemojte ga uranjati niti dovoditi u dodir s vodom.
- OPASNOST OD UDARA: Neka Vam ruke budu suhe kada mijenjate baterije. Uklonite odjeljak za baterije samo kada mijenjate baterije. Nemojte uranjati ovaj proizvod u vodu i nemojte ga koristiti u neposrednoj blizini izvora vode ili predmeta koji sadrže vodu.
- Ovaj uređaj zahtijeva baterije za rad. Umetnite bateriju s ispravnim polaritetom i umetnite samo preporučenu vrstu baterije.
- Molimo uklonite istrošene baterije iz proizvoda.
- Treba koristiti samo baterije iste ili ekvivalentne vrste kao što je preporučeno.
- Ne pokušavajte ponovno napuniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Ne stvarajte kratki spoj na priključnim stezalkama. Ne pokušavajte ni na koji način modificirati ovaj proizvod. U slučaju kvara, molimo potražite stručni savjet ili kontaktirajte svog dobavljača.
- Nemojte koristiti proizvode ako imate bilo kakve zdravstvene probleme na nogama ili imate rane na nogama.
- Čuvajte ovaj stroj na suhom mjestu, daleko od izvora vode. Nemojte izlagati odjeljak za baterije kada pohranjujete ovaj proizvod.
- Prilikom rada s uređajem koristite samo pribor koji je isporučen s proizvodom.
- NEMOJTE koristiti uređaj na mjestima visoke vlažnosti, kao što su kupaonice. Izbjegavajte stavljanje ovog proizvoda u vlažnu okolinu dulje vrijeme tijekom skladištenja. Ako se površina zaprlja, očistite je suhom krpom.
- NE dopustite da uređaj dođe u kontakt s bilo kojom vrstom metala, poput nakita.
- Koristite ovaj proizvod samo za njegovu namjenu – za masažu stopala. Koristiti samo na golin nogama.
- NEMOJTE koristiti uređaj na drugim dijelovima tijela (lice, prsa, kralježnica, ramena, ...), te na bilo kojim dijelovima koji su tetovirani ili sadrže plastične ili metalne implantate. Koristite ovaj proizvod samo za njegovu namjenu – za masažu stopala.
- NE KORISTITE AKO ste trudni, imate srčanu bolest bilo koje vrste, imate srčani stimulator ili integrirani defibrilator, ili patite od duboke venske tromboze ili visokog krvnog tlaka.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao drugi kućni otpad u cijeloj EU. Kako bismo spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivo korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustav predaje i prikupljanja ili kontaktirajte prodavača kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavatelj može prihvatiti proizvod u ekološki sigurno recikliranje.




Izjava proizvođača da je proizvod usklađen sa zahtjevima važećih EU direktiva.

UPUTE ZA UPOTREBU

Ovaj uređaj koristi EMS tehnologiju za masažu stopala. Električna mišićna stimulacija (EMS), također poznata kao neuromuskularna električna stimulacija (NMES) je izazivanje mišićne kontrakcije pomoću električnih impulsa. Impulsi oponašaju akcijski potencijal koji dolazi iz središnjeg živčanog sustava, uzrokujući kontrakciju mišića. EMS se pokazao prilično učinkovitim kao proaktivno sredstvo za jačanje/opuštanje mišića. Stimulacijom plantarnih živaca i poticanjem pokreta mišića, mišići potkoljenice mogu se vježbati dok sjedite.

Upotreba proizvoda

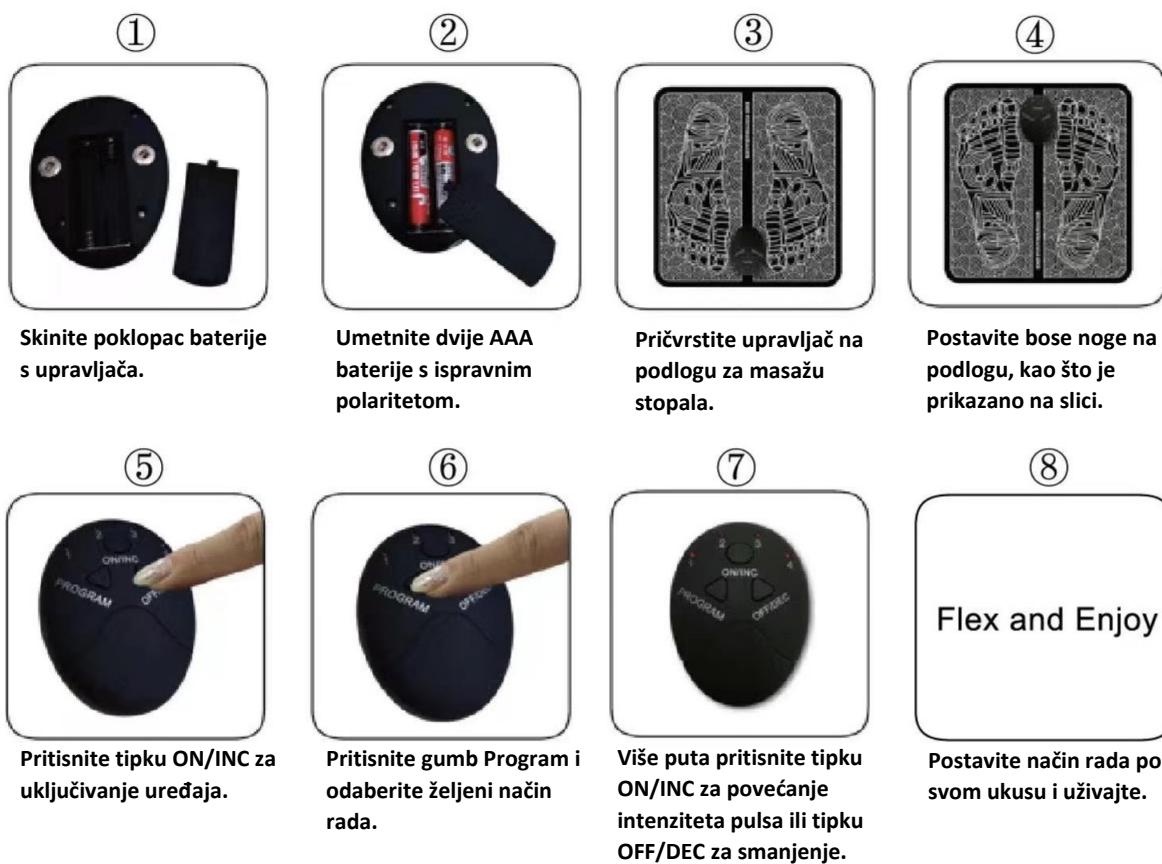

- Uređaj se automatski isključuje nakon 12 minuta korištenja.
- Uređaj se automatski isključuje ako ne stavite noge na prostirku.

Indikacija aktivnog načina rada

