



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

FOOTPAD

Modeļa Nr.: YQL-001



Tehniskās specifikācijas:

Produkta nosaukums	FOOTPAD
Spriegums	Alkaline battery 1.5V, 2x AAA
Režimi	6 (A-F)
Frekvence	1-100Hz
Izeja	8mA
Izmērs	32x29cm
Svars	57,4g

Iepakojumā ietilpst:

- 1x pēdu masāžas spilventiņš
- 1x noņemams darbības režīma slēdzis
- 1x lietotāja rokasgrāmata
- 2x AAA baterijas

Produkta apraksts:



PRIEKŠĒJĀ režīma slēdzis



AIZMUGURĒJĀ režīma slēdzis



BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot nediagnosticētu sāpju mazināšanai, tā nav medicīnas ierīce. Pirms jebkādu sāpju ārstēšanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.
- Lietojiet mazas intensitātes un īsāku lietošanas laiku, lai izvairītos no pārmērīgas stimulācijas.
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai citu traumu riska, novietojiet izstrādājumu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Šis izstrādājums nav ūdensnecaurļaidīgs, neiegremdējiet to ūdenī un neatstājiet saskarē ar ūdeni.
- Elektro traumas risks: bateriju nomainīšanas laikā turiet rokas sausas. Izņemiet bateriju nodalījumu tikai tad, kad nomainiet baterijas. Neiegremdējiet šo izstrādājumu ūdenī un nelietojiet to tiešā ūdens avotu vai ūdens tuvumā.
- Lai šī ierīce darbotos, ir nepieciešamas baterijas. Ievietojiet bateriju pareizajā polaritātē un ievietojiet tikai ieteiktā tipa bateriju.
- Izņemiet no izstrādājuma izlietotās baterijas.
- Jāizmanto tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas, kā ieteikts.
- Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas.
- Neizveidojiet īssavienojumu barošanas spailēs. Nemēģiniet nekādā veidā pārveidot šo izstrādājumu. Bojājumu gadījumā lūdziet profesionālu padomu vai sazinieties ar piegādātāju.
- Neizmantojiet izstrādājumus, ja jums ir jebkāsi veselības problēmas ar kājām vai uz kājām ir brūces.
- Uzglabājiet šo ierīci sausās telpās, prom no ūdens avotiem. Uzglabājot šo izstrādājumu, neatveriet akumulatora nodalījumu.
- Lietojot ierīci, izmantojiet tikai izstrādājumam pievienotos piederumus.
- Neizmantojiet ierīci vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabās. Neuzglabājiet šo ierīci ilgstoši mitrā vidē, kamēr tā tiek uzglabāta. Ja virsma ir netīra, notīriet to ar sausu drānu.
- Neļaujiet ierīcei saskarties ar jebkāda veida metālu, piemēram, juvelierizstrādājumiem.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tam paredzētajam mērķim - pēdu masāžai. Lietojiet tikai uz kailām pēdām.
- NEIZMANTO lietot ierīci uz citām ķermeņa daļām (sejas, krūtīm, mugurkaula, pleciem, ...), kā arī uz jebkurām daļām, kas ir tetovētas vai kurās ir plastmasas vai metāla implantanti. Lietojiet šo ierīci tikai paredzētajam mērķim - pēdu masāžai.
- NEIZMANTOJIET, ja esat grūtniece, ja Jums ir jebkāda veida sirds slimība, ja Jums ir elektrokardiostimulators vai integrēts defibrilators, ja Jums ir dziļo vēnu tromboze vai augsts asinsspiediens.

OTRREIZĒJĀS PĀRSTRĀDES UN IZNĪCINĀŠANAS INSTRUKCIJAS



Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest tāpat kā citus sadzīves atkritumus visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirgotājs var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.










Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

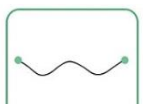
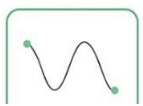
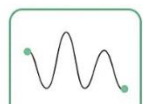



Šī ierīce izmanto EMS tehnoloģiju pēdu masāžai. Elektriskā muskuļu stimulācija (EMS), pazīstama arī kā neiromuskulārā elektrostimulācija (NMES), ir muskuļu kontrakcijas izraisīšana, izmantojot elektriskos impulsus. Impulsi imitē darbības potenciālu, kas nāk no centrālās nervu sistēmas, izraisot muskuļu saraušanos. Ir pierādīts, ka EMS ir diezgan efektīvs proaktīvs līdzeklis muskuļu nostiprināšanai/relaksēšanai. Stimulējot plantāros nervus un veicinot muskuļu kustības, sēžot var vingrināt muskuļus.

Produkta lietošana

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>Noņemiet akumulatora vāciņu no režīma selektora.</p>	<p>Uzstādiet divas AAA baterijas ar pareizu polaritāti.</p>	<p>Pievienojiet režīma pārslēgšanas ierīci pēdu masāžas paklāja tapām.</p>	<p>Novietojiet basas kājas uz paklāja, kā parādīts attēlā.</p>
<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 	<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> <p>Flex and Enjoy</p>
<p>Nospiediet pogu ON/INC, lai ieslēgtu ierīci.</p>	<p>Nospiediet programmu pogu un izvēlieties vēlamo režīmu.</p>	<p>Atkārtoti nospiediet pogu ON/INC, lai palielinātu impulsa intensitāti, vai pogu OFF/DEC, lai to samazinātu.</p>	<p>Iestatiet sev piemērotu režīmu un baudiet.</p>

- Ierīce automātiski izslēdzas pēc 12 lietošanas minūtēm.
- Ierīce automātiski izslēdzas, ja kājas nav novietotas uz paklāja.

Aktīvā režīma indikācija

<p>Red ● ○ ○ ○ ○ mode -A</p>	<p>Red ○ ● ○ ○ ○ -B</p>	<p>Red ● ● ○ ○ ○ -C</p>	<p>Red ○ ○ ● ○ ○ -D</p>	<p>Red ○ ○ ○ ● ○ -E</p>	<p>Red ○ ○ ● ● ○ -F</p>
					
<p>MASĀŽA</p>	<p>GETTING</p>	<p>SCRAPE</p>	<p>ELBOW PRINTERS</p>	<p>AKUPUNKTŪRA</p>	<p>DOME TERAPIJA</p>