


HU: GROWNETIC – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKÁTTEKINTÉS

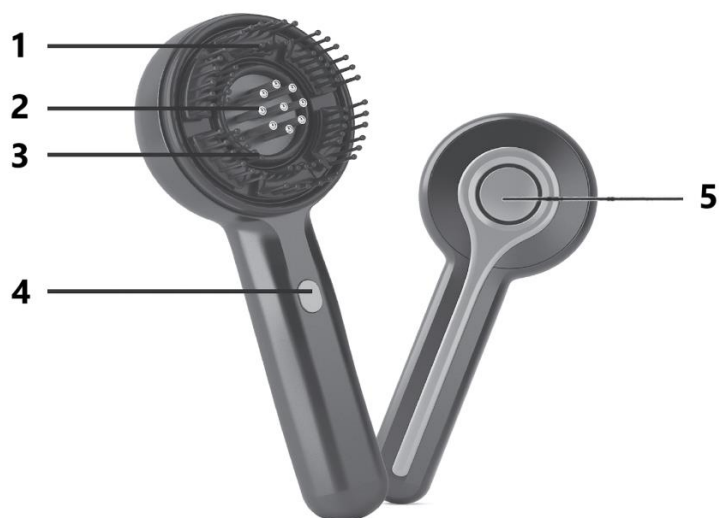


1. Massázsfej
2. Folyadékvezető fej
3. Infravörös fény
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. Folyadéktartály fedél

Termékjellemzők


- Terméknév: GROWNETIC
- Névleges feszültség: 3,7V
- Névleges teljesítmény: 5W
- Akkumulátor kapacitás: 1400mAh
- Töltőcsatlakozó: Type-C
- Csomag mérete: 242 x 116 x 65 mm

Termékfunkciók

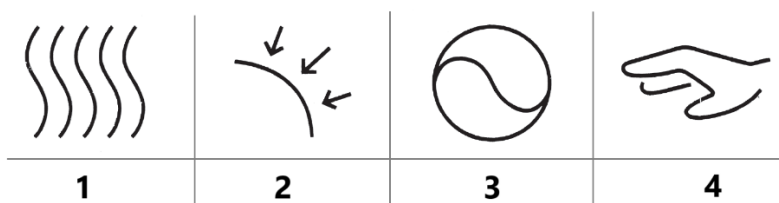

1. Fejbőr masszázs
2. Infravörös fényterápia
3. Golyóval szabályozott folyadékadagolás
4. Ergonomikus fogás

Csomag tartalma

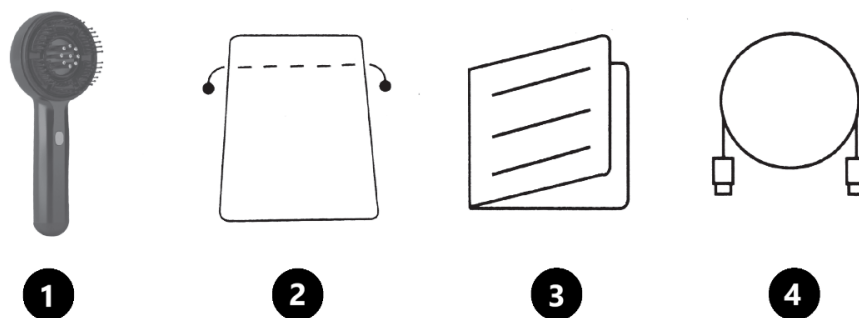

1. Fő készülék
2. Tároló táska
3. Használati útmutató
4. Töltőkábel

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ez a termék háztartási elektronikus egészségügyi eszköz, és nem helyettesíti az orvosi berendezéseket. Nem alkalmas diagnózisra, kezelésre vagy kereskedelmi célokra.
2. Használat előtt távolítsa el minden kiegészítőt vagy tárgyat, amely zavarhatja a masszázst.
3. Fájdalom vagy kellemetlenség esetén hagyja abba a használatot.
4. Hiba esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és forduljon ügyfélszolgálatához. Ne próbálja meg saját maga megjavítani.
5. Tartsa be a biztonsági előírásokat, különösen speciális környezetben való használat esetén.
6. Csak megfelelő, a gyártó által javasolt töltőt használjon. Ne keverje más töltőkészülékekkel.
7. A terméket tartsa távol tűztől, nedvességtől és korrozív környezettől.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjegyzés: A készülék használat közben nem tölthető. A használat megkezdése előtt mindig húzza ki a töltőt.

Bekapcsolás és módválasztás

- Tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg egy "csipogó" hangot nem hall – ez jelzi a bekapcsolást. A készülék alapértelmezés szerint az 1. módban indul.
- A Be-/kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával válthat a különböző módok között. Egy "cseppenő" hang jelzi a sikeres módváltást.
 - **1. mód:** Gyors masszázs + infravörös fény
 - **2. mód:** Lassú masszázs + infravörös fény
 - **3. mód:** Váltakozó gyors és lassú masszázs + infravörös fény

Folyadék hozzáadása

1. Nyissa ki a folyadéktartály fedelét, és töltsön bele megfelelő hajápoló készítményt. Ne lépje túl a 3 ml-t a pazarlás elkerülése érdekében.
2. Minden használat után tisztítsa meg a tartályt a higiénia megőrzése érdekében.

3. A különböző ápolószerek befolyásolhatják az adagolás sebességét. Alacsonyabb koncentráció esetén előfordulhat kisebb szivárgás – szükség esetén azonnal tisztítsa meg.
4. Figyelmeztetés: Ne adjon hozzá ismeretlen vagy maró hatású anyagokat, mert károsíthatják a készüléket.

INTELLIGENS IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

A készülék 10 perces automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik.

Kikapcsolás

Tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A külső felület tisztításához öblítse le vízzel. Ügyeljen rá, hogy a töltőportot ne érje víz.
2. Minden használat után tiszta vízzel öblítse át a folyadéktartályt és a kifolyónyílást, hogy elkerülje az eltömődést.
3. Törölje szárazra a készüléket, majd tárolja jól szellőző, száraz helyen.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. A normál működés során hallható „zümögő” vagy „kattogó” hangok nem jelentenek meghibásodást.
2. Az új termékek tartalmazhatnak minimális mennyiségű folyadékot a gyári minőségellenőrzés miatt – ez normális és biztonságos.

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a töltőporthoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB porthoz vagy egy 5V-os adapterhez, majd dugja be egy konnektorba.
3. Töltés közben a jelzőfény villog. Teljes töltés esetén a piros fény folyamatosan világít.
4. A töltési idő körülbelül 3 óra.

Megjegyzések:

- A töltés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz.
- A készülék és az adapter enyhe melegedése töltés közben normális.

TÖLTÉS BEFEJEZÉSE

Húzza ki az adaptert, és távolítsa el a töltőkábelt.

HIBAKERESÉS

Ha problémát észlel, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel a készüléket
Gyenge masszázshintenzitás	Lemerült akkumulátor	Töltse fel a készüléket


FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék leselejtezése előtt távolítsa el az akkumulátort a vonatkozó szabályozások betartásával.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Az akkumulátort a helyi környezetvédelmi előírások szerint dobja ki.
- A szétszerelést kizárólag szakemberek végezhetik.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

1. Válassza le a külső áramforrást, és távolítsa el a készülékházat.
2. Húzza ki, majd óvatosan vegye ki az akkumulátort.
3. Adja le az akkumulátort egy kijelölt újrahasznosító helyen.
4. Kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat.

A FEDÉL KINYITÁSA

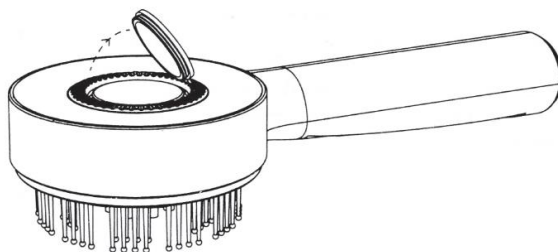

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Ha 3 hónapnál hosszabb ideig tárolja, használat előtt újratöltés szükséges.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül falhoz, padlóhoz vagy mennyezethez a sérülések elkerülése érdekében.
- A tárolási hely legyen jól szellőző, száraz, napfénytől és korrozív gázoktól mentes.
- A termék kialakítása ütésvédelmet biztosít légi, vasúti, közúti és tengeri szállításhoz.
- Kerülje az eső, hó, felborulás vagy ütdés hatását a szállítás során.

ÁRAMELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁS

- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége a megadott tartományon belül van-e.
- Védje a készüléket a nedvességtől, portól és rágcsálóktól.
- A készüléket csak kikapcsolt állapotban tisztítsa.
- Tárolja biztonságos helyen, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Meghibásodás esetén csak szakember végezheti a javítást – ne próbálja meg saját maga megjavítani.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.