

# RO: GUGUPURE – MANUAL DE UTILIZARE

## PARAMETRII PRODUSULUI

- Denumire produs: GUGUPURE
- Tip produs: Spatulă ultrasonică pentru frumusețe
- Model: C-1
- Tensiune nominală: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Tensiune de ieșire: 5V/500mA
- Mod de încărcare: Reîncărcabil (baterie litiu)
- Greutate netă: Aproximativ 99g
- Putere: 2W
- Dimensiuni: 55 x 165 x 15,5 mm

---

## CARACTERISTICI PRODUS

1. Curăță în profunzime și îndepărtează celulele moarte.
2. Descompune pigmentii și estompează petele.
3. Reduce ridurile și îmbunătățește elasticitatea pielii.
4. Stimulează circulația sângelui și a limfei.
5. Favorizează regenerarea celulelor pielii și permeabilitatea.
6. Masează pielea, facilitează absorbția nutrienților și elimină impuritățile.
7. Nu dăunează pielii și nu are efecte secundare.
8. Design frumos, ușor de utilizat, operare simplă, portabil.

---

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Undele ultrasonice sunt vibrații mecanice de înaltă frecvență utilizate pe scară largă în domeniul medical și cosmetic. Aceste unde produc efecte mecanice, efecte termice și procese catalitice. Vibrațiile de joasă intensitate și frecvență ridicată creează o rezonanță ușoară la nivelul pielii, activează celulele și îmbunătățesc permeabilitatea cutanată. Favorizează deschiderea glandelor sudoripare, închiderea porilor și îmbunătățirea aspectului general al pielii.

Dispozitivele de curățare și îngrijire ultrasonică folosesc ultrasunete și nanotehnologie pentru a îmbunătăți sănătatea pielii. Cu 24.000 de vibrații pe secundă, moleculele de apă suferă frecare intensă, crescând temperatura în straturile profunde ale pielii. Aceasta stimulează metabolismul celular, accelerează microcirculația și ajută la eliminarea toxinelor.

Prin modificarea fluxului de ioni, se îmbunătățește permeabilitatea membranei celulare și microcirculația intracelulară, transformând acizii grași în CO<sub>2</sub> și H<sub>2</sub>O, favorizând astfel reducerea țesutului adipos și obținerea unei pielii mai ferme. Folosit împreună cu produse cosmetice specifice, efectul este sporit.

Vibrațiile de înaltă frecvență oferă un masaj profund, stimulează descompunerea grăsimilor, îmbunătățesc microcirculația, elimină celulele grase și facilitează eliminarea toxinelor. Capătul tip spatulă pătrunde între 4-7 cm în piele, pulverizând cosmeticile, eliminând impuritățile, excesul de sebum și urmele de machiaj. Ajută la curățarea porilor, dizolvarea sebumului și a celulelor moarte, asigurând o curățare rapidă și eficientă. Undele ultrasonice funcționează ca o spălare în profunzime a

pielii, eliminând murdăria, celulele moarte, sebumul și alte impurități, în timp ce facilitează absorbția nutrienților.


---

## PREZENTARE PRODUS



1. Cap de luminare a pielii
  2. Afișaj indicator de stare
  3. Buton de Pornire / Selectare Mod
- 

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

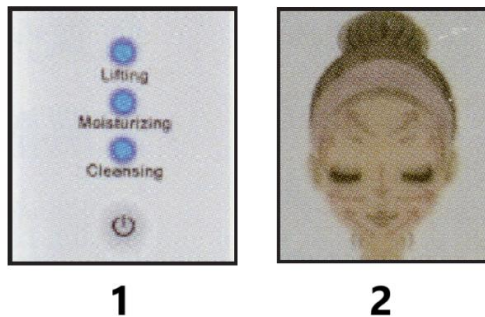

### Mod Curățare

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni aparatul.
2. Selectați modul de curățare. Se recomandă utilizarea unui produs de curățare facială înainte. După curățarea feței, folosiți aparatul.
3. Aplicați produsul pe față.
4. Folosiți capătul de iluminare pentru a curăța pielea conform figurii 2.

### Mod Hidratare

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.
2. Apăsați de două ori pentru a selecta modul Hidratare. Se recomandă folosirea unei măști sau a unui serum. După absorbție, utilizați aparatul.

3. Aplicați loțiunea pe față.
4. Folosiți capătul de iluminare pentru a distribui produsul conform figurii 2.

### Mod Lifting & Fermitate

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.
2. Apăsăți de trei ori pentru a selecta modul Lifting & Fermitate. Se recomandă utilizarea unui serum nutritiv.
3. Aplicați serum pe față.
4. Folosiți capătul de iluminare pentru a masa serum-ul în piele conform figurii 2.

---


### ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit.
2. Curățați aparatul cu o cârpă umedă sau cu alcool, în special capătul și carcasa. Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice corozive.
3. După curățare, depozitați-l într-un loc uscat. Nu îl lăsați în baie sau în locuri umede. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

---

### INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Conectați cablul USB la portul USB. Deși aparatul vine complet încărcat, se recomandă o reîncărcare înainte de prima utilizare.
2. Încărcați-l conectându-l la un computer, adaptor (neinclus) sau încărcător de telefon. În timpul încărcării, indicatorul LED clipește, iar la finalul încărcării rămâne aprins constant. Asigurați-vă că este complet încărcat înainte de utilizare.
3. Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe suprafața capătului de iluminare.

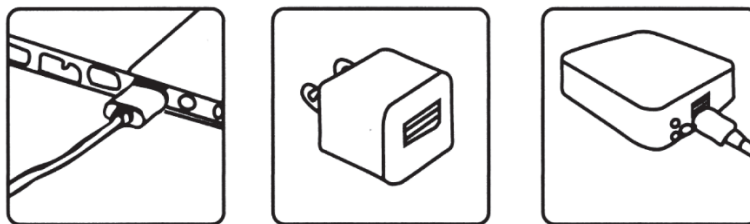

---

### AVERTISMENTE PENTRU ÎNCĂRCARE

- Dacă aparatul nu pornește la apăsarea butonului, încărcați-l.
- Când bateria este descărcată, va emite un semnal sonor „bip-bip” și se va opri automat. Încărcați-l imediat.
- După 10 minute de inactivitate, aparatul intră în mod standby, iar după încă 1 minut se va opri automat.
- Timpul complet de încărcare este de aproximativ 150 minute (peste 5 ore la prima încărcare). Poate fi folosit continuu timp de aproximativ 80 minute.
- Este recomandată încărcarea regulată.

---

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.