

BG: GUGUPURE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

- Име на продукта: GUGUPURE
- Тип продукт: Ултразвукова козметична шпатула
- Модел: C-1
- Номинално напрежение: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Изходно напрежение: 5V/500mA
- Начин на зареждане: Акумулаторна (литиева батерия)
- Тегло: Около 99g
- Мощност: 2W
- Размери: 55 x 165 x 15.5 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

1. Дълбоко почиства и премахва мъртвите кожни клетки.
2. Разгражда пигменти, изсветлява петна.
3. Намалява бръчките и подобрява еластичността на кожата.
4. Стимулира кръвообращението и лимфния метаболизъм.
5. Подобрява регенерацията и пропускливостта на кожните клетки.
6. Масажира кожата, въвежда хранителни вещества и изхвърля нечистотии.
7. Без увреждане на кожата или странични ефекти.
8. Красив дизайн, лесна употреба, проста работа и компактност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ултразвуковите вълни са високочестотни механични вибрационни вълни, широко използвани в медицината и козметиката. Тези механични вълни съчетават механично действие, топлинен ефект и катализиране. При ниска енергия и висока честота ултразвукът предизвиква лек резонанс върху кожата, като засилва клетъчната активност и пропускливостта. Това подпомага отварянето на порите, стяга ги и подобрява външния вид на кожата.

Ултразвуковите почистващи и козметични уреди използват ултразвук и нанотехнологии за подобряване на състоянието на кожата. С 24 000 вибрации в секунда тези вълни предизвикват интензивно триене между молекулите, повишавайки температурата в по-дълбоките слоеве на кожата. Това ускорява клетъчния метаболизъм, стимулира микроциркулацията и насърчава извеждането на метаболитни отпадъци.

Чрез преобразуване на йонния поток се увеличава пропускливостта на клетъчните мембрани, подпомагайки вътреклетъчни микротоци, които превръщат мастните киселини в CO₂ и H₂O. Този процес намалява мастния обем, водейки до по-стегнат и оформен вид. В комбинация със специализирани козметични продукти ефектът е още по-изразен.

Високочестотните вибрации позволяват дълбок масаж и ускоряват изгарянето на мастни клетки. Това подобрява микроциркулацията, разгражда мастните натрупвания и подпомага извеждането им от тялото. Специалната шпатула прониква 4-7 см под кожата и използва акустични вълни за атомизиране на козметични лосиони, премахвайки замърсявания, излишен себум и козметични остатъци. Това отпушва порите и емулгира потта и замърсяванията,


постигайки по-бързо и ефективно почистване. Ултразвукът действа като прецизна пералня за кожата, отстранявайки мъртвите клетки, себума и други нечистотии, като същевременно подобрява усвояването на полезни вещества.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Глава за изсветляване на кожата
 2. Област на статус дисплея
 3. Бутон за включване / избор на режим
-

НАЧИН НА УПОТРЕБА

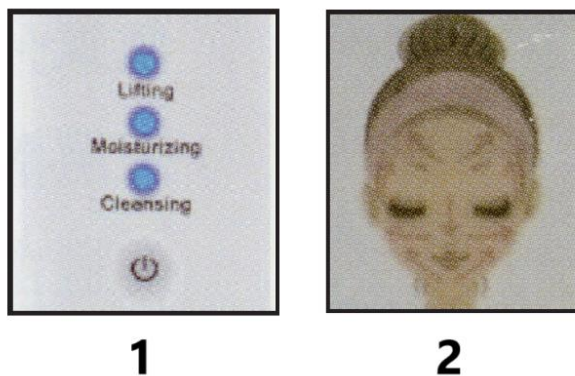

Режим за почистване

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството.
2. Изберете режим за почистване. Препоръчва се предварително измиване с почистващ гел.
3. Нанесете продукта върху лицето.
4. Използвайте главата за изсветляване за почистване, както е показано на фигура 2.

Режим за овлажняване

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството.
2. Натиснете два пъти бутона за овлажняване. Препоръчва се използване на маска за лице предварително.
3. Нанесете лосион върху лицето.
4. Използвайте главата за изсветляване, както е показано на фигура 2.

Режим за лифтинг и стягане


1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството.
2. Натиснете три пъти бутона, за да изберете режима за лифтинг и стягане. За най-добър ефект използвайте със серум.
3. Нанесете серума върху лицето.
4. Масажирайте серума с главата за изсветляване, както е показано на фигура 2.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

1. Уверете се, че устройството е изключено.
2. Почиствайте с влажна кърпа или спирт, без да използвате разтворители, разреждатели и други агресивни препарати.
3. След почистване съхранявайте на сухо място, далеч от банята или влажни помещения. Пазете от деца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете USB кабела към устройството. Батерията е заредена при доставка, но се препоръчва първоначално зареждане.
2. Свържете кабела към компютър, адаптер (продава се отделно) или зарядно за телефон. LED светлината мига по време на зареждане и светва постоянно, когато батерията е заредена. Уверете се, че батерията е напълно заредена преди употреба.
3. Преди първа употреба отстранете защитното фолио от главата за изсветляване.

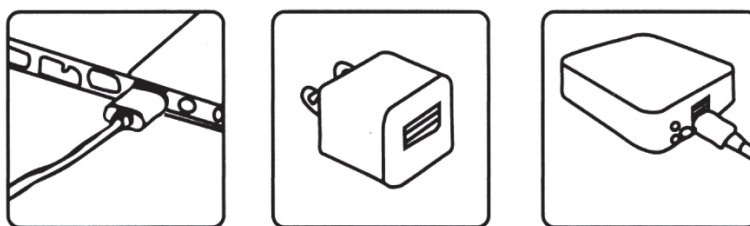

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ

- Ако устройството не се включва при натискане на бутона, заредете го.
- При ниско ниво на батерията се чува "бийп-бийп", след което устройството се изключва — заредете го незабавно.
- След 10 минути бездействие устройството преминава в режим на готовност, а след още 1 минута се изключва автоматично.

- Пълното зареждане отнема около 150 минути (за първи път — над 5 часа). След зареждане работи около 80 минути.
- Препоръчва се устройството да се зарежда редовно.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.