

UA: GUGUPURE – ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Назва продукту: GUGUPURE
- Тип продукту: Ультразвукова косметична лопатка
- Модель: C-1
- Номінальна напруга: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Вихідна напруга: 5V/500mA
- Спосіб заряджання: Акумуляторна (літієва батарея)
- Вага: приблизно 99g
- Потужність: 2W
- Розміри: 55 x 165 x 15.5 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

1. Глибоко очищає, видаляє ороговілі клітини.
2. Розщеплює пігментні плями, висвітлює шкіру.
3. Зменшує зморшки, покращує еластичність.
4. Стимулює кровообіг і лімфодренаж.
5. Покращує регенерацію та проникність клітин.
6. Масажує, вводить активні речовини, виводить забруднення.
7. Не пошкоджує шкіру, без побічних ефектів.
8. Стильний дизайн, проста експлуатація, компактний розмір.

ОПИС ПРОДУКТУ

Ультразвукові хвилі — це високочастотні механічні коливання, які активно використовуються в медицині та косметології. Вони поєднують механічну дію, тепловий ефект і каталіз. При низькій енергії та високій частоті ультразвук м'яко впливає на шкіру, активуючи клітини та покращуючи проникність. Це допомагає розкрити пори, підтягнути їх і покращити зовнішній вигляд.

Ультразвуковий косметологічний апарат використовує ультразвук і нанотехнології для догляду за шкірою. 24 000 коливань на секунду спричиняють мікротертя між молекулами, підвищуючи температуру глибоких шарів шкіри. Це пришвидшує обмін речовин, стимулює мікроциркуляцію та виведення токсинів.

Завдяки зміні іонного потоку, підвищується проникність клітинних мембран, активізуються внутрішньоклітинні мікроструми, які перетворюють жирні кислоти в CO_2 і H_2O . Це допомагає зменшити об'єм жирових клітин, підтягнути та вирівняти контури обличчя. Використання разом зі спеціальними косметичними засобами підсилює ефект.


Високочастотна вібрація глибоко масажує, активізує обмін речовин, руйнує жирові відкладення та виводить їх. Спеціальна лопатка проникає на глибину 4-7 см, перетворює косметичні засоби в дрібнодисперсний туман, видаляє забруднення, надлишки себуму та косметики. Вона прочищає пори, емульгує забруднення, забезпечуючи швидке та ефективне очищення. Ультразвук діє як міні-пральна машинка для шкіри, видаляючи відмерлі клітини, себум і залишки макіяжу, водночас сприяючи кращому всмоктуванню активних речовин.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОДУКТУ




1. Лопатка для освітлення шкіри
2. Індикаторний дисплей
3. Кнопка живлення / вибору режиму

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

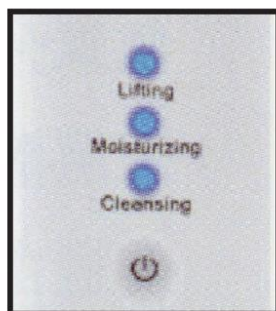

1

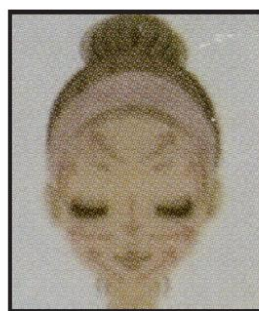

2

Режим очищення

1. Утримуйте кнопку живлення 2 секунди для ввімкнення.
2. Виберіть режим очищення. Рекомендується попереднє очищення шкіри гелем.
3. Нанесіть гель на обличчя.
4. Очистіть шкіру лопаткою, як показано на малюнку 2.

Режим зволоження

1. Утримуйте кнопку живлення 2 секунди для ввімкнення.
2. Двічі натисніть кнопку для вибору режиму зволоження. Рекомендується попередньо використати тканинну маску.

3. Нанесіть лосьйон на обличчя.
4. Обробіть шкіру лопаткою, як показано на малюнку 2.

Режим підтягування


1. Утримуйте кнопку живлення 2 секунди для ввімкнення.
2. Тричі натисніть кнопку для вибору режиму підтягування. Для кращого ефекту використовуйте сироватку.
3. Нанесіть сироватку.
4. Масажуйте шкіру лопаткою, як показано на малюнку 2.

ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено.
2. Протріть прилад вологою серветкою або спиртом. Не використовуйте розчинники, бензин, ацетон чи миючі засоби.
3. Зберігайте в сухому місці, далеко від ванної або вологих приміщень. Бережіть від дітей.

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАРЯДЖАННЯ

1. Під'єднайте USB-кабель до приладу. Прилад постачається із попереднім зарядом, але перед першим використанням рекомендується повністю зарядити.
2. Підключіть кабель до комп'ютера, адаптера (купується окремо) або зарядного пристрою для телефону. Індикатор блиматиме під час зарядки і світитиме постійно, коли заряджено повністю.
3. Перед першим використанням зніміть захисну плівку з лопатки.

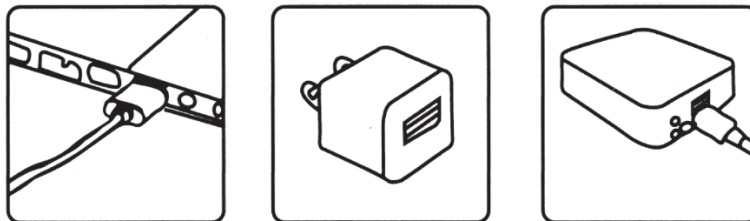

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ

- Якщо прилад не вмикається — зарядьте його.
 - При низькому заряді пролунає сигнал «біп-біп» — після цього прилад вимкнеться.
 - Через 10 хвилин бездіяльності прилад переходить в режим очікування, а через 1 хвилину вмикається.
 - Повне зарядження займає близько 150 хвилин (перший раз — понад 5 годин). Після зарядки працює приблизно 80 хвилин.
 - Рекомендується регулярно заряджати прилад.
-

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.