

МК: ГУГУПУРЕ – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Име на производ: ГУГУПУРЕ
- Тип на производ: Ултразвучна beauty лопатичка
- Модел: С-1
- Рейтинг на напон: АС 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Излезен напон: 5V/500mA
- Начин на полнење: Полнива (Литиумска батерија)
- Бруто тежина: Приближно 99g
- Снага: 2W
- Димензии: 55 x 165 x 15,5 mm

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

1. Длабински чисти и отстранува мртви клетки на кожата.
2. Дезинтегрира пигменти, ги избледува флеките.
3. Намалува брчки и ја подобрува еластичноста на кожата.
4. Промовира циркулација на крвта и лимфен метаболизам.
5. Ја подобрува регенерацијата на клетките на кожата и пропустливоста.
6. Масира кожа, внесува хранливи материи и го отстранува нечистотијата.
7. Не предизвикува оштетување на кожата или нуспојави.
8. Привлечен дизајн, лесен за користење, едноставна операција и пренослив.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Ултразвучните бранови се високофреквентни механички вибрациски бранови кои се користат во медицински и козметички третмани. Овие механички бранови произведуваат комбинација на механички ефекти, термички ефекти и катализа. Со мала енергија и високофреквентни вибрации, ултразвучните бранови создаваат благи резонантни ефекти на кожата, што ја подобрува виталноста на клетките и ја зголемува пропустливоста. Ова помага да се отворат знојните жлезди, да се стегнат порите и да се подобри општиот изглед на кожата.

Ултразвучните чистачи и козметички уреди користат ултразвук и нанотехнологија за подобрување на изгледот на кожата. Со 24.000 вибрации во секунда, овие вибрации предизвикуваат интензивно триење помеѓу молекулите, зголемувајќи ја температурата во подлабоките слоеви на кожата. Ова ја зголемува метаболизмот на клетките, го забрзува микроциркулацијата и го поттикнува елиминирањето на метаболичкиот отпад. Преку конверзија на јонскиот тек се подобрува пропустливоста на клеточната мембрана, поттикнувајќи микротокови во клетките кои ги претвораат масните киселини во CO₂ и H₂O. Овој процес помага во намалувањето на волуменот на масните, доведувајќи до појасен и поцврст изглед. Кога се користи со целни козметички производи, ефектите се уште поизразени.

Високофреквентните вибрации овозможуваат длабока масажа и ја зголемуваат согорувањето на масните клетки. Ова ја подобрува микроциркулацијата, ги разградува масните клетки и ги олеснува отпадните продукти да се исфрлат од телото. Специјалната лопатаста сонда продира 4-7 cm под кожата, каде што со акустични бранови атомизира козметички лосиони,


отстранувајќи нечистотија, вишок себум и остатоци од козметички производи. Ова помага во отстранување на блокираните пори и емаулгирање на потта и луспи, што резултира со побрзо и поефикасно чистење. Ултразвукот работи слично на прецизна машина за перење, чистејќи ја кожата, отстранувајќи мртви клетки на кожата, себум и други нечистотии, и оптимизирајќи ја апсорпцијата на хранливи материи.

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ



1. Светлеца глава за кожа
 2. Област за прикажување на статус
 3. Прекинувач за вклучување / Дугме за избор на режим
-

НАЧИН НА УПОТРЕБА

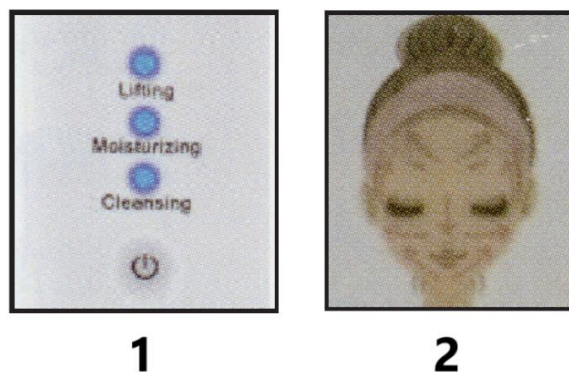

Режим на чистење

1. Притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди за да го вклучите уредот.
2. Изберете го режимот за чистење. Препорачува се да се користи чистач за лице прво. Користете го по чистењето на лицето.
3. Нанесете го производот на лицето.

4. Користете ја светлечката глава за чистење, како што е прикажано на сликата 2.

Режим на хидратација

1. Притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди за да го вклучите уредот.
2. Притиснете го копчето за режим на хидратација два пати. Препорачува се да се користи маска за лице претходно. Користете го по апсорбирањето на хранливите материи.
3. Нанесете лосион на лицето.
4. Користете ја светлечката глава за да го нанесете лосионот, како што е прикажано на сликата 2.

Режим на подигнување и затегнување


1. Притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди за да го вклучите уредот.
2. Притиснете го копчето три пати за да го изберете режимот за подигнување и затегнување. За најдобри резултати, користете го со серум.
3. Нанесете серум на лицето.
4. Користете ја светлечката глава за да го масирате серумот, како што е прикажано на сликата 2.

ОДРЖУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

1. Осигурајте се дека уредот е исклучен.
2. Очистете го уредот со влажна крпа или алкохол за да отстраните дамки од главата и телото. Избегнувајте користење на растворувачи, разредувачи или други корозивни хемикалии за чистење.
3. По чистењето, складирајте го уредот на суво место. Немојте го држете во бања или влажни простории. Држете го надвор од дофат на деца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ

1. Поврзете го USB кабелот за полнење со USB интерфејсот. Уредот доаѓа со целосно наполнета батерија, но се препорачува да го наполните пред првата употреба.
2. Можете да го наполните уредот приклучувајќи го USB кабелот во компјутер, адаптер (продава се одделно) или телефонски полнач. LED светлото ќе трепка за време на полнењето и ќе остане вклучено кога ќе биде целосно наполнето. Проверете дали батеријата е правилно наполнета пред употреба.
3. При првата употреба, отстранете ја заштитната фолија од светлечката глава на кожата.

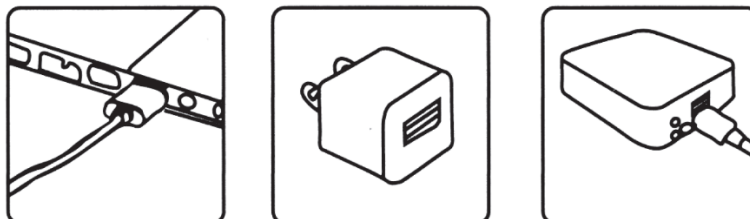

ПРЕПОРУКИ ЗА ПОЛНЕЊЕ

- Ако уредот не започне да работи кога ќе го притиснете копчето за вклучување, напојте го.
- Кога уредот ќе има ниска батерија, ќе се чуе „пи-пи“ сигнал, и уредот ќе се исклучи автоматски. Напојте го веднаш.
- Уредот ќе премине во режим на мирување по 10 минути неактивност и ќе се исклучи по 1 минута без употреба.
- За целосно полнење на уредот потребни се околу 150 минути (повеќе од 5 часа за првото полнење). По целосно полнење, може да се користи континуирано околу 80 минути.
- Препорачува се редовно полнење на уредот.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: GUGUPURE – MANUAL PËR PËRDORUESIN

PARAMETRAT E PRODUKTIT

- Emri i produktit: GUGUPURE
- Lloji i produktit: Lopatë bukurie me ultratinguj
- Modeli: C-1
- Tensioni i vlerësuar: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Tensioni i daljes: 5V/500mA
- Mënyra e karikimit: Karikueshëm (Bateri litiumi)
- Peshë neto: Pothuajse 99g
- Fuqia: 2W
- Përmasat: 55 x 165 x 15,5 mm

CARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

1. Pastron thellë dhe largon qelizat e vdekura të lëkurës.
2. Shkatërron pigmentet, zbardh njollat.
3. Redukton rrudhat dhe përmirëson elastikën e lëkurës.
4. Nxit qarkullimin e gjakut dhe metabolizmin limfatik.
5. Përmirëson rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe depërtueshmërinë.
6. Masazhon lëkurën, përcjell lëndët ushqyese dhe largon papastërtitë.
7. Nuk dëmton lëkurën dhe nuk ka efekte anësore.
8. Dizajn tërheqës, i lehtë për t'u përdorur, operim i thjeshtë dhe i portativ.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Valët ultratinguj janë valë vibrimi mekanike me frekuencë të lartë që përdoren zakonisht në trajtimet mjekësore dhe bukurie. Këto valë mekanike prodhojnë një kombinim të veprimeve mekanike, efekteve termike dhe katalizës. Me energji të ulët dhe vibrime me frekuencë të lartë, valët ultratinguj krijojnë një efekt rezonance të butë në lëkurë, i cili rrit vitalitetin e qelizave dhe përmirëson depërtueshmërinë. Kjo ndihmon në hapjen e gjëndrave të djersës, ngushtimin e poreve dhe përmirësimin e pamjes së përgjithshme të lëkurës.

Pastruesit dhe pajisjet e bukurisë me ultratinguj përdorin ultratinguj dhe nanoteknologji për të përmirësuar pamjen e lëkurës. Me 24,000 vibrime për sekondë, këto vibrime shkaktojnë fërkim të fortë midis molekulave, duke rritur temperaturën në shtresat më të thella të lëkurës. Kjo rrit metabolizmin e qelizave, përshpejton mikroqarkullimin dhe nxit eliminimin e mbetjeve metabolike. Përmes konvertimit të rrjedhës jonike, përmirësohet depërtueshmëria e membranës qelizore, duke nxitur mikrorjedhat intracelulare që kthejnë acidet yndyrore në CO₂ dhe H₂O. Ky proces ndihmon në reduktimin e vëllimit të yndyrnave, duke çuar në një pamje më të tendosur. Kur përdoret me produkte bukurie të synuara, efektet janë edhe më të theksuara.

Vibrimet me frekuencë të lartë mundësojnë masazhë të thellë dhe përmirësojnë djegien e qelizave të yndyrës. Kjo përmirëson mikroqarkullimin, shpërbën qelizat e yndyrës dhe lehtëson largimin e mbetjeve nga trupi. Sonda speciale në formë lopate depërton 4-7 cm nën lëkurë, ku përdor valë akustike për të atomizuar locione bukurie, duke larguar papastërtitë, yndyrën e tepërt dhe mbetje kozmetike. Kjo ndihmon në pastrimin e poreve dhe emulsifikimin e djersës dhe lëvores, duke


rezultuar në një pastrim më të shpejtë dhe më efikas. Ultratëngji punon si një makinë pastrimi precize, duke pastruar lëkurën, duke hequr qelizat e vdekura të lëkurës, yndyrën dhe papastërtitë e tjera dhe duke optimizuar thithjen e lëndëve ushqyese.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT



1. Koka për Ndriçimin e Lëkurës
2. Zona e Shfaqjes së Statusit
3. Butoni i Ndërrimit të Fuqisë / Butoni i Zgjedhjes së Mënyrës

METODA E PËRDORIMIT

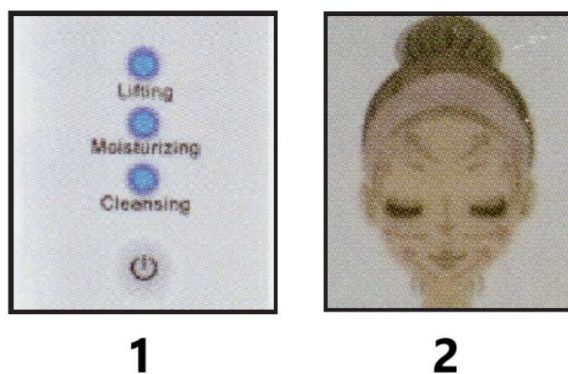

Mënyra e Pastrimit

1. Mbani shtypur butonin e fuqisë për 2 sekonda për ta ndezur pajisjen.
2. Zgjidhni mënyrën e pastrimit. Rekomandohet të përdorni një pastrues të fytyrës fillimisht. Përdorni pas pastrimit të fytyrës.
3. Aplikoni produktin në fytyrë.
4. Përdorni kokën për ndriçimin e lëkurës për pastrim, siç është treguar në Figurën 2.

Mënyra e Hidratimit

1. Mbani shtypur butonin e fuqisë për 2 sekonda për ta ndezur pajisjen.
2. Prekni butonin për Mënyrën e Hidratimit dy herë. Rekomandohet të përdorni një maskë fytyre më parë. Përdorni pas thithjes së ushqyesve.
3. Aplikoni locion në fytyrë.
4. Përdorni kokën për ndriçimin e lëkurës për të aplikuar locionin, siç është treguar në Figurën 2.

Mënyra e Ngritjes dhe Ngushtimit


1. Mbani shtypur butonin e fuqisë për 2 sekonda për ta ndezur pajisjen.
2. Prekni butonin tre herë për të zgjedhur Mënyrën e Ngritjes dhe Ngushtimit. Për rezultate më të mira, përdorni me një serum.
3. Aplikoni serumin në fytyrë.
4. Përdorni kokën për ndriçimin e lëkurës për të masazhuar serumin, siç është treguar në Figurën 2.

MBATJA DHE RUHETI

1. Sigurohuni që pajisja të jetë e fukur.
2. Pastroni pajisjen duke përdorur një pecetë të lagur ose alkool për të hequr njollat nga koka dhe trupi. Evitoni përdorimin e tretësve, holluesve ose kimikateve të tjera korozive për pastrim.
3. Pasi të jetë pastruar, ruajeni pajisjen në një vend të thatë. Mos e mbani në banjë ose në zona të lagështa. Mbajeni jashtë mundësisë së fëmijëve.

UDHËZIME PËR KARIKIM

1. Lidhni kabllon USB për karikim me ndërfaqen USB. Pajisja vjen me një bateri të karikuar plotësisht, por rekomandohet ta karikoni para përdorimit të parë.
2. Mund ta karikoni pajisjen duke e lidhur kabllon USB me një kompjuter, adaptor (shitet veçmas) ose karikues telefoni. Drita LED do të shkëlqejë gjatë karikimit dhe do të qëndrojë e ndezur kur të jetë karikuar plotësisht. Sigurohuni që bateria të jetë e karikuar siç duhet para përdorimit.
3. Para përdorimit të parë, hiqni filmin mbrojtës nga koka për ndriçimin e lëkurës.

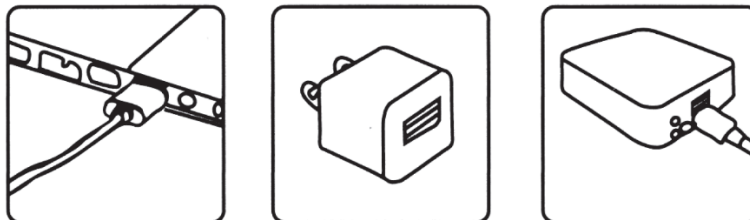

KËSHILLA PËR KARIKIM

- Nëse pajisja nuk fillon kur shtypni butonin e fuqisë, ju lutemi ta karikoni.

- Kur pajisja ka një nivel të ulët të baterisë, do të dëgjoni një tingull "biip-biip", dhe pajisja do të fiket automatikisht. Ju lutemi karikoni pajisjen menjëherë.
- Pajisja do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pas 10 minutash pasiviteti dhe do të fiket pas 1 minuti pa përdorim.
- Karikimi i plotë i pajisjes kërkon rreth 150 minuta (më shumë se 5 orë për karikimin e parë). Pas karikimit të plotë, mund të përdoret vazhdimisht për rreth 80 minuta.
- Rekomandohet që pajisja të karikohet rregullisht.

UDHËZIME PËR RICIKLININ DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.