


CS: HANDROLLER – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

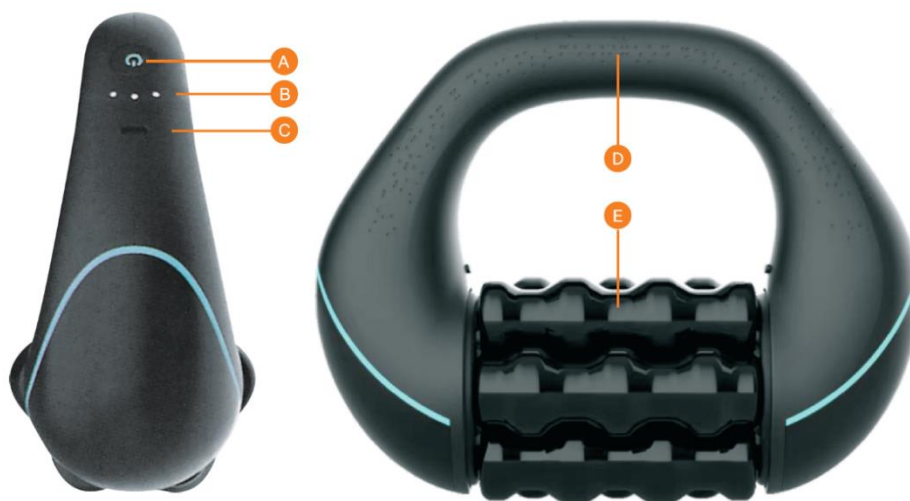

- A. Tlačítko zapnutí / nastavení rychlosti
- B. Kontrolky zapnutí / rychlosti
- C. USB-C nabíjecí port
- D. Rukojeť s více možnostmi úchopu
- E. Válečková klec

JAK POUŽÍVAT

Před použitím zařízení si přečtěte všechna varování a pokyny.

1. Zapnutí:

Pevně stiskněte a podržte tlačítko zapnutí umístěné na horní straně rukojeti přibližně 1 sekundu. Válečková klec se začne automaticky otáčet.

2. Nastavení rychlosti

Každým krátkým stisknutím tlačítka zapnutí přepínáte mezi dostupnými nastaveními rychlosti (1–3), jak ukazují kontrolky nad tlačítkem.

3. Vypnutí

Pevně stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se zařízení nevypne.

Upozornění: Při používání zařízení v blízkosti volného oblečení nebo dlouhých vlasů buďte opatrní, protože se mohou zachytit do pohyblivých částí.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro nabití zařízení připojte přiložený USB-C nabíjecí kabel* k USB-C nabíjecímu portu umístěnému na rukojeti. Kontrolky zobrazí stav nabíjení a úroveň baterie.

** USB nástěnný adaptér není součástí balení.*

Před použitím nebo nabíjením zařízení si přečtěte všechny pokyny, varování a bezpečnostní označení uvedené v této příručce, na nabíječce a na samotném zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí jej používat děti.
- Nepoužívejte zařízení na hlavě, obličeji, krku ani v genitální oblasti. Nepoužívejte zařízení v blízkosti obrátle C4.
- Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.
- Volné vlasy, oblečení, šperky a jiné předměty vždy udržujte mimo dosah pohyblivých částí.
- Nevystavujte zařízení vodě ani jiným kapalinám. Nikdy zařízení nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Neponořujte zařízení do vody.
- Během provozu zařízení nezakrývejte ani neblokuje ventilační otvory motoru.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, upravovat ani opravovat.
- Neskladujte zařízení v prostředích, kde teploty překračují 40 °C (104 °F).
- Zařízení nabíjejte pouze tehdy, když je okolní teplota mezi 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
- Pokud se zařízení během provozu nadměrně zahřeje, okamžitě jej přestaňte používat a před dalším použitím jej nechte vychladnout.
- Při dlouhodobém skladování baterii před uložením zařízení plně nabijte. Nenechávejte zařízení trvale připojené k nabíječce.
- Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu.
- Pokud během používání zařízení pocítíte nepohodlí, bolest, závratě nebo jakoukoli nežádoucí reakci, okamžitě jej přestaňte používat a v případě potřeby se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.
- Ačkoli je zařízení při použití podle pokynů obecně bezpečné, může zhoršit některá již existující zranění nebo zdravotní stavy. Používejte zařízení podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.