


DA: HANDROLLER – BRUGERMANUAL

PRODUKTOVERSIGT

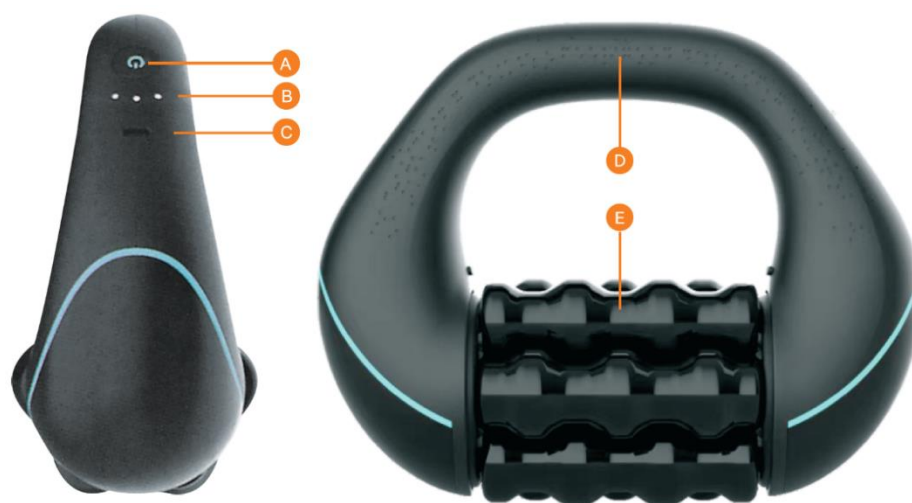

- A. Tænd/sluk-knap / hastighedsjustering
- B. Indikatorlamper for tænd/sluk / hastighed
- C. USB-C-opladningsport
- D. Håndtag med flere grebsmuligheder
- E. Rullebur

SÅDAN BRUGES DEN

Læs venligst alle advarsler og instruktioner, før du bruger enheden.

1. Tænd:

Tryk fast på tænd/sluk-knappen, som er placeret øverst på håndtaget, og hold den nede i cirka 1 sekund. Rulleburet begynder automatisk at rotere.

2. Juster hastigheden:

Hvert korte tryk på tænd/sluk-knappen skifter mellem de tilgængelige hastighedsindstillinger (1–3), som vises af indikatorlamperne over knappen.

3. Sluk:

Tryk fast på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil enheden slukker.

Forsigtig: Vær forsigtig, når du bruger enheden i nærheden af løstsiddende tøj eller langt hår, da det kan blive viklet ind i de bevægelige dele.

OPLADNING AF ENHEDEN

For at oplade enheden skal du tilslutte det medfølgende USB-C-opladningskabel* til USB-C-opladningsporten, som er placeret på håndtaget. Indikatorlamperne viser opladningsstatus og batteriniveau.

** USB-vægadapter medfølger ikke.*

Før du bruger eller oplader enheden, bedes du læse alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsmærkninger i denne manual, på opladeren og på selve enheden.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Denne enhed er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og må ikke betjenes af børn.
- Brug ikke enheden på hovedet, ansigtet, halsen eller kønsområdet. Brug ikke enheden i nærheden af C4-hvirvlen.
- Hvis du er gravid, skal du kontakte din læge, før du bruger denne enhed.
- Hold altid løst hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker. Brug eller oplad aldrig enheden i nærheden af vand.
- Rengør kun enheden med en blød, let fugtig klud. Nedsænk ikke enheden i vand.
- Dæk ikke enheden til under brug, og bloker ikke motorens ventilationsåbninger.
- Forsøg ikke at adskille, ændre eller reparere enheden.
- Opbevar ikke enheden i omgivelser, hvor temperaturen overstiger 40 °C (104 °F).
- Oplad kun enheden, når omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).
- Hvis enheden bliver overdrevent varm under brug, skal du straks stoppe brugen og lade den køle af, før den bruges igen.
- Ved langtidsopbevaring skal batteriet oplades helt, før enheden lægges væk. Lad ikke enheden være konstant tilsluttet opladeren.
- Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller medicinsk tilstand.
- Hvis du oplever ubehag, smerte, svimmelhed eller en uønsket reaktion under brug af enheden, skal du straks stoppe brugen og om nødvendigt kontakte en sundhedsfaglig person.
- Selvom enheden generelt er sikker, når den bruges som anvist, kan den forværre visse eksisterende skader eller medicinske tilstande. Brug enheden efter eget skøn og på egen risiko.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.