


HR: HANDROLLER – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREGLED PROIZVODA

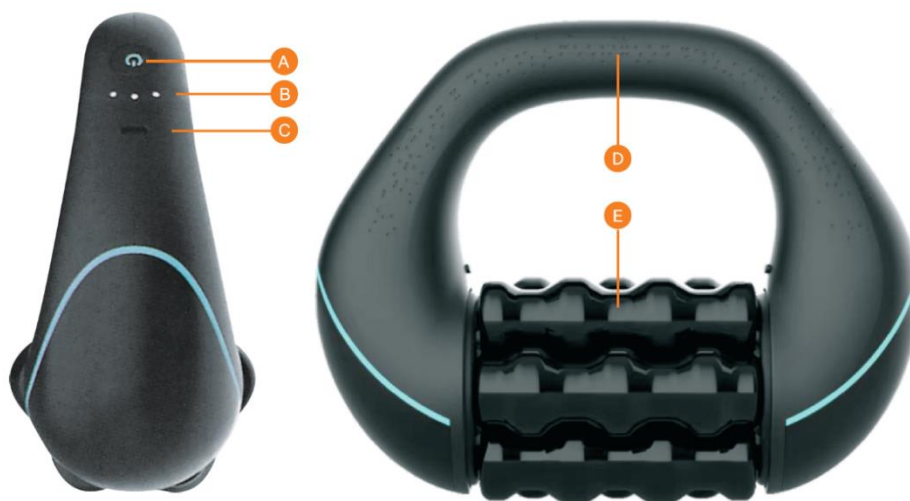

- A. Gumb za uključivanje / podešavanje brzine
- B. Indikatorska svjetla za uključivanje / brzinu
- C. USB-C priključak za punjenje
- D. Ručka s višestrukim mogućnostima držanja
- E. Valjkasti kavez

KAKO KORISTITI

Prije uporabe uređaja pročitajte sva upozorenja i upute.

1. Uključivanje

Čvrsto pritisnite i držite gumb za uključivanje, koji se nalazi na vrhu ručke, približno 1 sekundu. Valjkasti kavez automatski će se početi okretati.

2. Podešavanje brzine

Svakim kratkim pritiskom na gumb za uključivanje mijenjate dostupne postavke brzine (1–3), što prikazuju indikatorska svjetla iznad gumba.

3. Isključivanje

Čvrsto pritisnite i držite gumb za uključivanje dok se uređaj ne isključi.

Oprez: Budite oprezni pri uporabi uređaja u blizini široke odjeće ili duge kose jer se mogu zaplesti u pokretne dijelove.

PUNJENJE UREĐAJA

Za punjenje uređaja spojite priloženi USB-C kabel za punjenje* na USB-C priključak za punjenje koji se nalazi na ručki. Indikatorska svjetla prikazivat će status punjenja i razinu baterije.

* USB zidni adapter nije uključen.

Prije uporabe ili punjenja uređaja pročitajte sve upute, upozorenja i oznake opreza navedene u ovom priručniku, na punjaču i na samom uređaju.

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u kućanstvu i ne smiju ga koristiti djeca.
- Nemojte koristiti uređaj na glavi, licu, grlu ili genitalnom području. Nemojte koristiti uređaj u blizini kralješka C4.
- Ako ste trudni, prije uporabe ovog uređaja posavjetujte se s liječnikom.
- Široku kosu, odjeću, nakit i druge predmete uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
- Nemojte izlagati uređaj vodi ili drugim tekućinama. Nikada nemojte koristiti ili puniti uređaj u blizini vode.
- Uređaj čistite samo mekom, blago vlažnom krpom. Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Nemojte prekrivati uređaj tijekom rada niti blokirati ventilacijske otvore motora.
- Nemojte pokušavati rastaviti, mijenjati ili popravljati uređaj.
- Nemojte čuvati uređaj u okruženjima gdje temperature prelaze 40 °C (104 °F).
- Uređaj puniti samo kada je temperatura okoline između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Ako se uređaj tijekom rada prekomjerno zagrije, odmah ga prestanite koristiti i pustite da se ohladi prije daljnje uporabe.
- Za dugotrajno skladištenje potpuno napunite bateriju prije spremanja uređaja. Nemojte ostavljati uređaj stalno priključen na punjač.
- Ovaj proizvod nije namijenjen dijagnosticanju, liječenju, izlječenju ili sprječavanju bilo koje bolesti ili zdravstvenog stanja.
- Ako tijekom uporabe uređaja osjetite nelagodu, bol, vrtoglavicu ili bilo kakvu neželjenu reakciju, odmah ga prestanite koristiti i po potrebi se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom.
- Iako je uređaj općenito siguran kada se koristi prema uputama, može pogoršati određene postojeće ozljede ili zdravstvena stanja. Uređaj koristite prema vlastitoj procjeni i na vlastiti rizik.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.