


HU: HANDROLLER – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

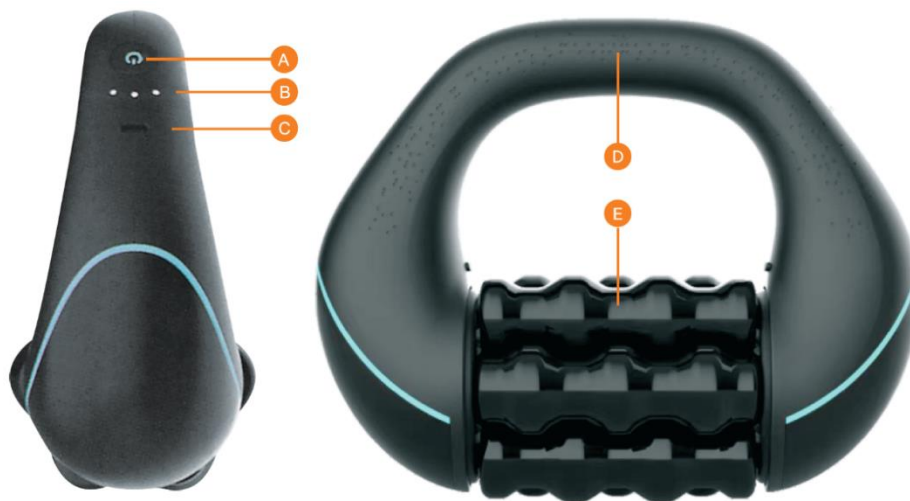

- A. Bekapcsoló / sebességbeállító gomb
- B. Bekapcsolás / sebesség jelzőfények
- C. USB-C töltőport
- D. Többfogású markolat
- E. Görgős ketrec

HASZNÁLAT

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást.

1. Bekapcsolás:

Nyomja meg határozottan, és tartsa lenyomva a markolat tetején található bekapcsoló gombot körülbelül 1 másodpercig. A görgős ketrec automatikusan forogni kezd.

2. Sebesség beállítása:

A bekapcsoló gomb minden rövid megnyomása vált a rendelkezésre álló sebességfokozatok között (1–3), ahogy azt a gomb feletti jelzőfények mutatják.

3. Kikapcsolás:

Nyomja meg határozottan, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Figyelem: Legyen óvatos, amikor a készüléket laza ruházat vagy hosszú haj közelében használja, mivel ezek belegabalyodhatnak a mozgó alkatrészekbe.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

A készülék töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt* a markolaton található USB-C töltőporthoz. A jelzőfények megjelenítik a töltési állapotot és az akkumulátor töltöttségi szintjét.

* USB fali adapter nem tartozék.

A készülék használata vagy töltése előtt kérjük, olvassa el az ebben az útmutatóban, a töltőn és magán a készüléken található összes utasítást, figyelmeztetést és óvatossági jelölést.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és gyermekek nem használhatják.
- Ne használja a készüléket a fejen, arcon, toroknál vagy a nemi szervek területén. Ne használja a készüléket a C4 csigolya közelében.
- Ha terhes, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- A laza haját, ruházatát, ékszereket és egyéb tárgyakat mindig tartsa távol a mozgó alkatrészekről.
- Ne tegye ki a készüléket víznek vagy más folyadékoknak. Soha ne használja és ne töltsse a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse a készüléket vízbe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket, és ne blokkolja a motor szellőzőnyílásait.
- Ne próbálja meg szétszerelni, módosítani vagy javítani a készüléket.
- Ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot (104 °F).
- A készüléket csak akkor töltsse, ha a környezeti hőmérséklet 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között van.
- Ha a készülék működés közben túlzottan felmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát, és további használat előtt hagyja lehűlni.
- Hosszú távú tárolás esetén a készülék elrakása előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. Ne hagyja a készüléket folyamatosan a töltőhöz csatlakoztatva.
- Ez a termék nem alkalmas betegségek vagy egészségügyi állapotok diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
- Ha a készülék használata közben kellemetlen érzést, fájdalmat, szédülést vagy bármilyen nemkívánatos reakciót tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát, és szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Bár a készülék az utasításoknak megfelelő használat esetén általában biztonságos, súlyosbíthat bizonyos már meglévő sérüléseket vagy egészségügyi állapotokat. A készüléket saját belátása szerint és saját felelősségére használja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.