


LV: HANDROLLER – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

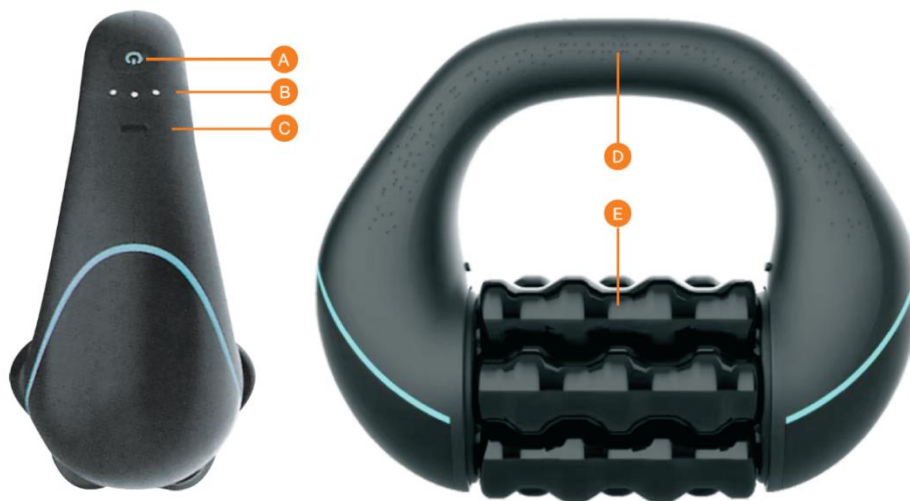

- A. Ieslēgšanas / ātruma regulēšanas poga
- B. Ieslēgšanas / ātruma indikatora lampiņas
- C. USB-C uzlādes ports
- D. Rokturis ar vairākām satvēriena iespējām
- E. Rullīšu karkass

KĀ LIETOT

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet visus brīdinājumus un norādījumus.

1. Ieslēgšana:

Stingri nospiediet un aptuveni 1 sekundi turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, kas atrodas roktura augšdaļā. Rullīšu karkass automātiski sāks griezties.

2. Ātruma regulēšana:

Katrs īss ieslēgšanas pogas nospiediens pārslēdz starp pieejamajiem ātruma iestatījumiem (1–3), kā to norāda indikatora lampiņas virs pogas.

3. Izslēgšana:

Stingri nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, līdz ierīce izslēdzas.

Uzmanību: Esiet piesardzīgi, lietojot ierīci vaļīga apģērba vai garu matu tuvumā, jo tie var ieķerties kustīgajās daļās.

IERĪCES UZLĀDE

Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli* USB-C uzlādes portam, kas atrodas uz roktura. Indikatora lampiņas parādīs uzlādes statusu un akumulatora līmeni.

* USB sienas adapteris nav iekļauts komplektā.

Pirms ierīces lietošanas vai uzlādes, lūdzu, izlasiet visus norādījumus, brīdinājumus un piesardzības marķējumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā, uz lādētāja un uz pašas ierīces.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā, un to nedrīkst lietot bērni.
- Nelietojiet ierīci uz galvas, sejas, rīkles vai dzimumorgānu zonas. Nelietojiet ierīci C4 skriemeļa tuvumā.
- Ja esat grūtniece, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Valīgus matus, apģērbu, rotaslietas un citus priekšmetus vienmēr turiet tālāk no kustīgajām daļām.
- Nepakļaujiet ierīci ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai. Nekad nelietojiet un neuzlādējiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet ierīci tikai ar mīkstu, nedaudz mitru drānu. Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Lietošanas laikā nepārklājiet ierīci un nebloķējiet motora ventilācijas atveres.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt, pārveidot vai remontēt.
- Neuzglabājiet ierīci vidē, kur temperatūra pārsniedz 40 °C (104 °F).
- Uzlādējiet ierīci tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F).
- Ja ierīce lietošanas laikā kļūst pārmērīgi karsta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un ļaujiet tai atdzist pirms turpmākas lietošanas.
- Ilgstošai uzglabāšanai pirms ierīces novietošanas glabāšanā pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Neatstājiet ierīci nepārtraukti pievienotu lādētājam.
- Šis produkts nav paredzēts slimību vai medicīnisku stāvokļu diagnosticēšanai, ārstēšanai, izārstēšanai vai novēršanai.
- Ja ierīces lietošanas laikā jūtat diskomfortu, sāpes, reiboni vai jebkādu nevēlamu reakciju, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un, ja nepieciešams, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Lai gan ierīce parasti ir droša, ja to lieto saskaņā ar norādījumiem, tā var pasliktināt noteiktus jau esošus ievainojumus vai medicīniskus stāvokļus. Lietojiet ierīci pēc saviem ieskatiem un uz savu risku.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.