


RO: HANDROLLER – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

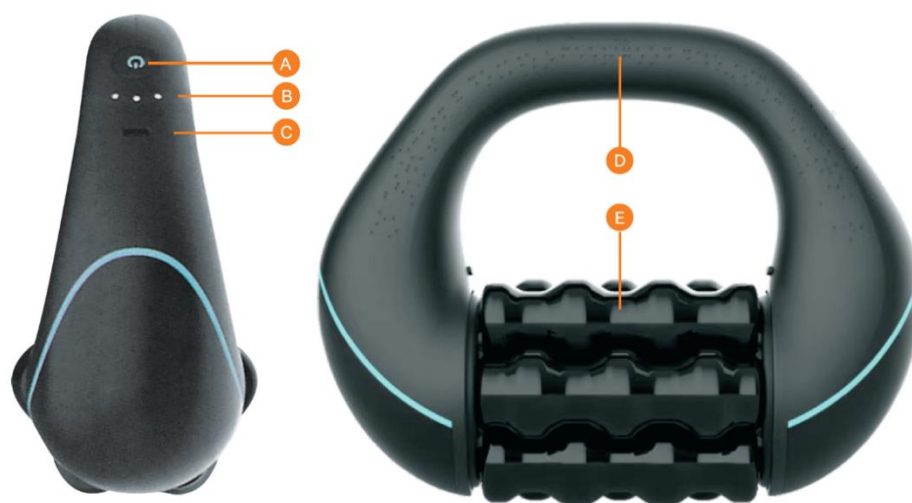

- A. Buton de pornire / reglare a vitezei
- B. Indicatoare luminoase pentru pornire / viteză
- C. Port de încărcare USB-C
- D. Mâner cu multiple opțiuni de prindere
- E. Cușcă rotativă

MOD DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți toate avertismentele și instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.

1. Pornire:

Apăsați ferm și țineți apăsat butonul de pornire situat în partea superioară a mânerului timp de aproximativ 1 secundă. Cușca rotativă va începe să se rotească automat.

2. Reglarea vitezei:

Fiecare apăsare scurtă a butonului de pornire comută între setările de viteză disponibile (1–3), așa cum este indicat de indicatoarele luminoase aflate deasupra butonului.

3. Oprire:

Apăsați ferm și țineți apăsat butonul de pornire până când dispozitivul se oprește.

Atenție: Aveți grijă atunci când utilizați dispozitivul în apropierea hainelor largi sau a părului lung, deoarece acestea se pot prinde în piesele mobile.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul de încărcare USB-C inclus* la portul de încărcare USB-C situat pe mâner. Indicatoarele luminoase vor afișa starea încărcării și nivelul bateriei.

** Adaptorul USB de perete nu este inclus.*

Înainte de a utiliza sau încărca dispozitivul, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile, avertismentele și marcajele de atenționare incluse în acest manual, pe încărcător și pe dispozitivul propriu-zis.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice și nu trebuie folosit de copii.
- Nu utilizați dispozitivul pe cap, față, gât sau în zona genitală. Nu utilizați dispozitivul în apropierea vertebrei C4.
- Dacă sunteți însărcinată, consultați medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv.
- Țineți întotdeauna părul liber, hainele, bijuteriile și alte obiecte departe de piesele mobile.
- Nu expuneți dispozitivul la apă sau alte lichide. Nu utilizați și nu încărcați niciodată dispozitivul în apropierea apei.
- Curățați dispozitivul numai cu o cârpă moale, ușor umedă. Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării și nu blocați orificiile de ventilație ale motorului.
- Nu încercați să dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul.
- Nu depozitați dispozitivul în medii unde temperaturile depășesc 40 °C (104 °F).
- Încărcați dispozitivul numai atunci când temperatura ambientală este între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- Dacă dispozitivul devine excesiv de fierbinte în timpul funcționării, opriți imediat utilizarea și lăsați-l să se răcească înainte de utilizarea ulterioară.
- Pentru depozitare pe termen lung, încărcați complet bateria înainte de a depozita dispozitivul. Nu lăsați dispozitivul conectat continuu la încărcător.
- Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării, vindecării sau prevenirii niciunei boli sau afecțiuni medicale.
- Dacă în timpul utilizării dispozitivului simțiți disconfort, durere, amețală sau orice reacție adversă, opriți imediat utilizarea și consultați un profesionist din domeniul sănătății, dacă este necesar.
- Deși dispozitivul este în general sigur atunci când este utilizat conform instrucțiunilor, poate agrava anumite leziuni sau afecțiuni medicale preexistente. Utilizați dispozitivul la propria discreție și pe propriul risc.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.