

RS: HANDROLLER – KORISNIČKO UPUTSTVO

PREGLED PROIZVODA



- A. Dugme za uključivanje / podešavanje brzine
- B. Indikatorska svetla za uključivanje / brzinu
- C. USB-C priključak za punjenje
- D. Ručka sa višestrukim mogućnostima držanja
- E. Valjkasti kavez

KAKO SE KORISTI

Pre upotrebe uređaja pročitajte sva upozorenja i uputstva.

1. Uključivanje:

Čvrsto pritisnite i držite dugme za uključivanje, koje se nalazi na vrhu ručke, približno 1 sekundu. Valjkasti kavez će automatski početi da se okreće.

2. Podešavanje brzine

Svakim kratkim pritiskom na dugme za uključivanje menja se dostupna postavka brzine (1–3), što prikazuju indikatorska svetla iznad dugmeta.

3. Isključivanje

Čvrsto pritisnite i držite dugme za uključivanje dok se uređaj ne isključi.

Opres: Budite pažljivi prilikom upotrebe uređaja u blizini široke odeće ili duge kose, jer se mogu zaplesti u pokretne delove.

PUNJENJE UREĐAJA

Za punjenje uređaja povežite priloženi USB-C kabl za punjenje* sa USB-C priključkom za punjenje koji se nalazi na ručki. Indikatorska svetla će prikazivati status punjenja i nivo baterije.

** USB zidni adapter nije uključen.*

Pre upotrebe ili punjenja uređaja pročitajte sva uputstva, upozorenja i oznake opreza navedene u ovom uputstvu, na punjaču i na samom uređaju.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i ne smeju ga koristiti deca.
- Nemojte koristiti uređaj na glavi, licu, grlu ili genitalnom području. Nemojte koristiti uređaj u blizini pršljena C4.
- Ako ste trudni, pre upotrebe ovog uređaja posavetujte se sa lekarom.
- Široku kosu, odeću, nakit i druge predmete uvek držite dalje od pokretnih delova.
- Ne izlažite uređaj vodi ili drugim tečnostima. Nikada ne koristite niti punite uređaj u blizini vode.
- Uređaj čistite samo mekom, blago vlažnom krpom. Ne potapajte uređaj u vodu.
- Ne prekrivajte uređaj tokom rada niti blokirajte ventilacione otvore motora.
- Ne pokušavajte da rastavite, izmenite ili popravite uređaj.
- Ne čuvajte uređaj u okruženjima gde temperature prelaze 40 °C (104 °F).
- Uređaj punite samo kada je temperatura okoline između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Ako se uređaj tokom rada prekomerno zagreje, odmah prestanite sa upotrebom i ostavite ga da se ohladi pre dalje upotrebe.
- Za dugoročno skladištenje potpuno napunite bateriju pre odlaganja uređaja. Ne ostavljajte uređaj stalno priključen na punjač.
- Ovaj proizvod nije namenjen za dijagnostikovanje, lečenje, izlečenje ili sprečavanje bilo koje bolesti ili zdravstvenog stanja.
- Ako tokom upotrebe uređaja osetite nelagodnost, bol, vrtoglavicu ili bilo kakvu neželjenu reakciju, odmah prestanite sa upotrebom i po potrebi se posavetujte sa zdravstvenim stručnjakom.
- Iako je uređaj generalno bezbedan kada se koristi prema uputstvima, može pogoršati određene postojeće povrede ili zdravstvena stanja. Uređaj koristite prema sopstvenoj proceni i na sopstveni rizik.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.


Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: HANDROLLER – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

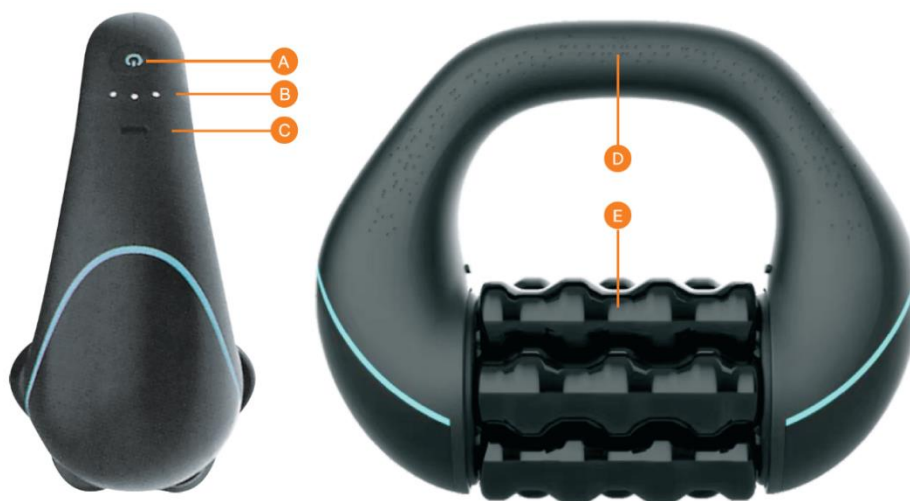

- A. Дугме за укључивање / подешавање брзине
- B. Индикаторска светла за укључивање / брзину
- C. USB-C прикључак за пуњење
- D. Ручка са вишеструким могућностима држања
- E. Ваљкасти кавез

КАКО СЕ КОРИСТИ

Пре употребе уређаја прочитајте сва упозорења и упутства.

1. Укључивање:

Чврсто притисните и држите дугме за укључивање, које се налази на врху ручке, приближно 1 секунду. Ваљкасти кавез ће аутоматски почети да се окреће.

2. Подешавање брзине

Сваким кратким притиском на дугме за укључивање мења се доступна поставка брзине (1–3), што приказују индикаторска светла изнад дугмета.

3. Искључивање

Чврсто притисните и држите дугме за укључивање док се уређај не искључи.

Опрез: Будите пажљиви приликом употребе уређаја у близини широке одеће или дуге косе, јер се могу заплести у покретне делове.

ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА

За пуњење уређаја повежите приложени USB-C кабл за пуњење* са USB-C прикључком за пуњење који се налази на ручки. Индикаторска светла ће приказивати статус пуњења и ниво батерије.

**USB зидни адаптер није укључен.*

Пре употребе или пуњења уређаја прочитајте сва упутства, упозорења и ознаке опреза наведене у овом упутству, на пуњачу и на самом уређају.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Овај уређај је намењен искључиво за употребу у домаћинству и не смеју га користити деца.
- Немојте користити уређај на глави, лицу, грлу или гениталном подручју. Немојте користити уређај у близини пршљена C4.
- Ако сте трудни, пре употребе овог уређаја посаветујте се са лекаром.
- Широку косу, одећу, накит и друге предмете увек држите даље од покретних делова.
- Не излажите уређај води или другим течностима. Никада не користите нити пуните уређај у близини воде.
- Уређај чистите само меком, благо влажном крпом. Не потапајте уређај у воду.
- Не прекривајте уређај током рада нити блокирајте вентилационе отворе мотора.
- Не покушавајте да раставите, измените или поправите уређај.
- Не чувајте уређај у окружењима где температуре прелазе 40 °C (104 °F).
- Уређај пуните само када је температура околине између 0 °C (32 °F) и 40 °C (104 °F).
- Ако се уређај током рада прекомерно загреје, одмах престаните са употребом и оставите га да се охлади пре даље употребе.
- За дугорочно складиштење потпуно напуните батерију пре одлагања уређаја. Не остављајте уређај стално прикључен на пуњач.
- Овај производ није намењен за дијагностиковање, лечење, излечење или спречавање било које болести или здравственог стања.
- Ако током употребе уређаја осетите нелагодност, бол, вртоглавицу или било какву нежељену реакцију, одмах престаните са употребом и по потреби се посаветујте са здравственим стручњаком.
- Иако је уређај генерално безбедан када се користи према упутствима, може погоршати одређене постојеће повреде или здравствена стања. Уређај користите према сопственој процени и на сопствени ризик.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније