

HR: KILPOR 2.0 – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala što ste odabrali ovaj proizvod. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe kako biste razumjeli pravilno korištenje i sigurnosne mjere. Pravilna uporaba pomoći će vam postići optimalne rezultate i izbjeći moguće oštećenje uređaja ili vaše kože. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Vakuumski čistač pora s negativnim tlakom za akne je višenamjenski kozmetički uređaj namijenjen za piling kože, čišćenje pora te uklanjanje mitesera i viška masnoće. Koristi sustav usisavanja u kombinaciji s nastavkom premazanim umjetnim dijamantnim česticama kako bi nježno uklonio površinski sloj kože i istovremeno izvukao nečistoće iz pora.

Ovaj postupak pomaže suziti pore i poboljšati teksturu kože, ostavljajući je glađom, ujednačenijom i blistavijom. Uređaj je neinvazivan i omogućuje kontrolu intenziteta pilinga putem različitih nastavaka i razina usisavanja.

Uređaj dolazi s četiri zamjenjiva nastavka, od kojih je svaki namijenjen određenoj funkciji njege kože, uključujući piling, dubinsko čišćenje i ciljanu njegu.

SADRŽAJ PAKIRANJA

1. Glavna jedinica × 1
 2. Usisni nastavci × 4
 3. Korisnički priručnik × 1
-

PREGLED NASTAVAKA

Četiri vrste zamjenjivih nastavaka za tretman:



1. Mikrokristalni nastavak (piling)

Mikrokristalni nastavak premazan je finim umjetnim kristalima koji omogućuju nježan piling. Pomaže ukloniti mrtve stanice kože, poboljšava teksturu kože i potiče glađi i zdraviji izgled bez oštećenja.

2. Veliki okrugli nastavak (jako usisavanje)

Ovaj nastavak pruža snažno usisavanje i pogodan je za uklanjanje mitesera, viška masnoće, nečistoća i ostataka šminke.

Koristite s oprezom na osjetljivoj ili tankoj koži. Preporučena uporaba je jednom tjedno, približno 5 minuta, ovisno o stanju vaše kože.


3. Mali okrugli nastavak (blago usisavanje)

Ovaj nastavak omogućuje nježnije usisavanje, što ga čini pogodnim za osjetljivu ili nježnu kožu. Učinkovito uklanja lakše nečistoće poput masnoće, prašine i ostataka kozmetike.

4. Ovalni nastavak (ciljana njega)

Ovalni nastavak dizajniran je za područja sklona finim linijama, poput područja oko očiju i usta. Pomaže poboljšati elastičnost kože kroz nježno usisavanje i stimulaciju. Za najbolje rezultate koristite kratke, brze pokrete.

PREGLED GLAVNE JEDINICE

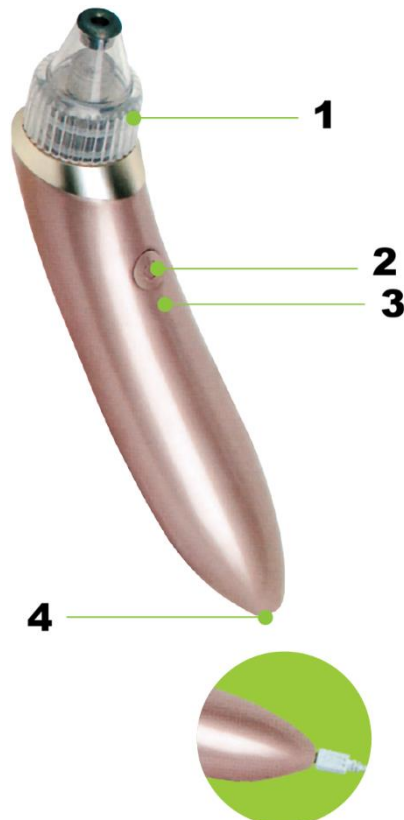


1. Nastavak za tretman (zamjenjiv)
2. Gumb za uključivanje (5 podesivih razina usisavanja)
3. LED indikator punjenja
4. Priključak za punjenje

Upute za punjenje: Povežite uređaj s izvorom napajanja pomoću USB kabela.

1. Crveno svjetlo: punjenje u tijeku
 2. Zeleno svjetlo: potpuno napunjeno
-

POSTAVLJANJE NASTAVKA

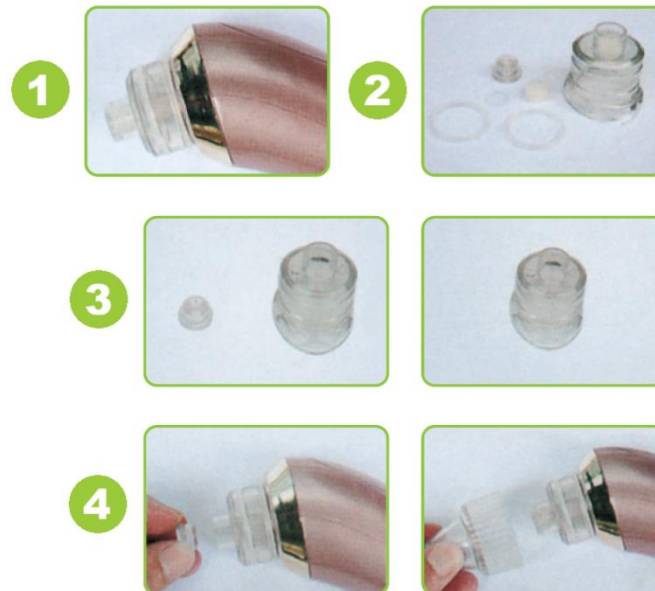

1. Umetnite spužvicu filtera u kućište filtera kako je prikazano na dijagramu.
 2. Postavite poklopac filtera okretanjem u smjeru kazaljke na satu ili suprotno. Provjerite je li pravilno poravnat i čvrsto postavljen.
 3. Pričvrstite kućište filtera na usisni dio okretanjem dok ne bude sigurno postavljeno. Provjerite poravnanje. Zatim pričvrstite željeni nastavak za tretman okretanjem dok ne sjedne na mjesto.
 4. Zamijenite silikonski brtveni prsten ili spužvicu filtera ako su oštećeni ili prljavi, slijedeći iste korake kao gore.
-

NAČIN UPORABE

Piling lica

1. Postavite mikrokristalni nastavak. Provjerite je li lice čisto i suho.
 2. Pomičite uređaj od brade prema gore, prema liniji čeljusti.
 3. Klizite od sredine obraza prema van.
 4. Pomičite se od sredine čela prema stranama.
 5. Na svim područjima koristite pokrete prema gore za učinak podizanja kože.
-

Uklanjanje mitesera i dubinsko čišćenje

1. Postavite veliki ili mali okrugli nastavak (odaberite razinu usisavanja prema osjetljivosti kože).
2. Postavite nastavak na područje tretmana.

3. Pomičite uređaj samo u jednom smjeru, ne naprijed-natrag.
 4. Ne zadržavajte uređaj predugo na jednom mjestu.
-

Njega finih linija

1. Postavite ovalni nastavak.
2. Koristite na područjima poput kutova očiju, stranica nosa i oko usta.
3. Primjenjujte brze i nježne usisne pokrete do 5 minuta.

Napomena: Ne fokusirajte se kontinuirano na isto područje jer to može uzrokovati privremene modrice ili crvenilo. Ako se to dogodi, odmah primijenite hladan oblog, a sljedeći dan topli. Po potrebi se obratite liječniku.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. **Koža mora biti suha:** Prije uporabe provjerite je li vaše lice potpuno suho kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj kroz otvore za zrak, što može uzrokovati oštećenje.
 2. **Provjera filtera:** Uvijek provjerite je li spužvica filtera pravilno postavljena i suha prije uporabe. Vlaga ili nečistoće mogu uzrokovati začepljenje ili kvar.
 3. **Uporaba pod nadzorom:** Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu djece ili osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora. Odgovorna odrasla osoba mora osigurati sigurnu uporabu.
 4. **Zdravstvena stanja:** Ne koristite uređaj na područjima koja su bila podvrgnuta estetskim zahvatima (poput rinoplastike) ili kod osjetljivih medicinskih stanja. Ne preporučuje se trudnicama ili osobama sa srčanim bolestima.
 5. **Upozorenje vezano uz vodu:** Ne uranjajte uređaj u vodu i ne dopustite da tekućina uđe u uređaj. Ne ispirite uređaj pod tekućom vodom.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.