

HU: KILPOR 2.0 – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megismerje a helyes használatot és a biztonsági óvintézkedéseket. A megfelelő használat segít az optimális eredmények elérésében, valamint a készülék vagy a bőr esetleges károsodásának elkerülésében. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

TERMÉKISMERTETŐ

A negatív nyomású vákuumos pórustisztító aknés bőrre egy multifunkcionális szépségápolási készülék, amelyet a bőr hámlasztására, a pórusok tisztítására, valamint a mitesszerek és a felesleges faggyú eltávolítására terveztek. Szívórendszert használ mesterséges gyémántszemcsékkel bevont kezelőfejjel kombinálva, hogy gyengéden hámlassza a bőr külső rétegét, miközben eltávolítja a szennyeződések a pórusokból.

Ez a folyamat segít finomítani a pórusokat és javítja a bőr textúráját, így a bőr simább, egyenletesebb és ragyogóbb lesz. A készülék nem invazív, és lehetővé teszi a hámlasztás intenzitásának szabályozását különböző kezelőfejjel és szívóerőszintekkel.

A készülék négy cserélhető kezelőfejet tartalmaz, amelyek mindegyike meghatározott bőrápolási funkciókra szolgál, beleértve a hámlasztást, a mélytisztítást és a célzott kezelést.

A CSOMAG TARTALMA

1. Főegység × 1
 2. Szívófejek × 4
 3. Használati útmutató × 1
-

A KEZELŐFEJEK ÁTTEKINTÉSE

Négyféle cserélhető kezelőfej:



1. Mikrokrisztályos fej (hámlasztás)

A mikrokrisztályos fej finom mesterséges kristályokkal van bevonva, amelyek gyengéd hámlasztást biztosítanak. Segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, javítja a bőr textúráját, és simább, egészségesebb megjelenést támogat károsodás nélkül.

2. Nagy kerek fej (erős szívóerő)

Ez a fej erős szívóerőt biztosít, és alkalmas mitesszerek, felesleges faggyú, szennyeződések és sminkmaradványok eltávolítására.

Érzékeny vagy vékony bőrön óvatosan használja. Az ajánlott használat hetente egyszer, körülbelül 5 percig, a bőr állapotától függően.


3. Kis kerek fej (enyhe szívóerő)

Ez a fej gyengédebb szívóerőt kínál, ezért érzékeny vagy finom bőrre alkalmas. Hatékonyan eltávolítja az enyhébb szennyeződések, például a faggyút, port és kozmetikai maradványokat.

4. Ovális fej (célzott ápolás)

Az ovális fej a finom vonalakra hajlamos területekre készült, például a szem és a száj környékére. Gyengéd szívással és stimulációval segít javítani a bőr rugalmasságát. A legjobb eredmény érdekében rövid, gyors mozdulatokat használjon.

A FŐEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

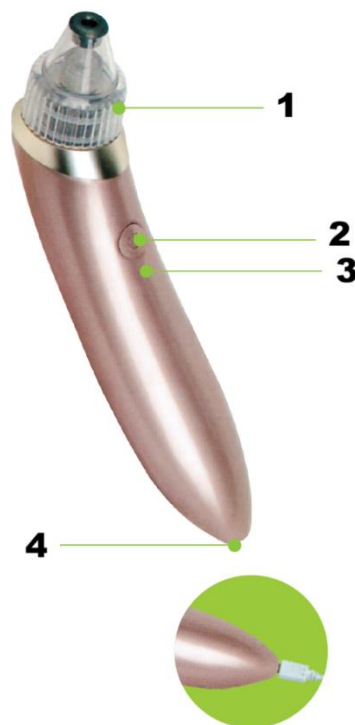

1. Kezelőfej (cserélhető)
2. Bekapcsológomb (5 állítható szívóerőszint)
3. LED töltésjelző
4. Töltőcsatlakozó

Töltési útmutató: Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz USB-kábel segítségével.

- Piros fény: töltés folyamatban

- Zöld fény: teljesen feltöltve
-

A KEZELŐFEJ FELSZERELÉSE



1. Helyezze be a szűrőszivacsot a szűrőpohárba az ábra szerint.
 2. Rögzítse a szűrőfedelelet az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba forgatva. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik és biztonságosan rögzítve van.
 3. Rögzítse a szűrőpoharat a szívótesthez forgatással, amíg biztonságosan a helyére nem kerül. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik. Ezután rögzítse a kívánt kezelőfejet a szívótestre forgatva, amíg stabilan a helyére nem kerül.
 4. Cserélje ki a szilikon tömítőgyűrűt vagy a szűrőszivacsot, ha sérült vagy szennyezett, a fenti lépéseket követve.
-

HASZNÁLATI MÓD

Arccadírozás

1. Rögzítse a mikrokristályos fejet. Győződjön meg róla, hogy az arca tiszta és száraz.
 2. Mozdassa a készüléket az álltól felfelé az állkapocs vonala felé.
 3. Csúsztassa az arc közepétől kifelé.
 4. Mozdassa a homlok közepétől az oldalak felé.
 5. Minden területen felfelé irányuló mozdulatokat használjon a liftinghatás elősegítéséhez.
-

Mitesszerek eltávolítása és mélytisztítás

1. Rögzítse a nagy vagy kis kerek fejet (válassza ki a szívóerőszintet a bőr érzékenységeinek megfelelően).
2. Helyezze a fejet a kezelendő területre.

3. A készüléket csak egy irányba mozgassa, ne előre-hátra.
4. Ne tartsa a készüléket túl sokáig egy helyen.

Finom vonalak ápolása

1. Rögzítse az ovális fejet.
2. Használja olyan területeken, mint a szemzugok, az orr oldala és a száj környéke.
3. Ismételten alkalmazzon gyors, gyengéd szívó mozdulatokat legfeljebb 5 percig.

Megjegyzés: Ne koncentráljon folyamatosan ugyanarra a területre, mert ez átmeneti véraláfutást vagy bőrpírt okozhat. Ha ez előfordul, azonnal alkalmazzon hideg borogatást, másnap pedig meleg borogatást. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. **Tartsa szárazon a bőrt:** Használat előtt győződjön meg róla, hogy az arca teljesen száraz, hogy megakadályozza a folyadék bejutását a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül, ami károsodást okozhat.
2. **Ellenőrizze a szűrőszivacsot:** Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a szűrőszivacs megfelelően van behelyezve és száraz. A készülékbe jutó nedvesség vagy szennyeződés eltömődést vagy meghibásodást okozhat.
3. **Felügyelet melletti használat:** Ez a termék nem gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek általi, felügyelet nélküli használatra készült. Egy felelős felnőttnek biztosítania kell a biztonságos használatot.
4. **Egészségügyi állapotok:** Ne használja a készüléket olyan területeken, amelyeken kozmetikai műtetet végeztek, például orrplasztikát, illetve érzékeny egészségügyi állapotok esetén. Terhes nőknek vagy szívbetegségben szenvedőknek nem ajánlott.
5. **Vízbiztonsági figyelmeztetés:** Ne merítse a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe. Ne öblítse le a készüléket folyó víz alatt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.