

BG: LUMEVAGLOW – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: LUMEVAGLOW

Модел: ES-1081

Напрежение на зареждане: 5V, 1A

Номинална мощност: 2.5W

Модел на батерията: 602535

Параметри на батерията: 3.7V, 500mAh

Време за зареждане: 2 часа

Размер на продукта: 89x47x120 мм

Стандарти за изпълнение: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Време на работа: Устройството преминава в режим на готовност след 4 минути и се изключва автоматично след 1 минута бездействие.

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФУНКЦИИТЕ

Този продукт е предназначен за почистване на кожата, EMS терапия и овлажняване при топла температура. Той комбинира положителни и отрицателни йони, високочестотна вибрация, червена, синя и зелена светлина.

- **Положителни и отрицателни йони:** Използвайки принципа на привличане на противоположните заряди, биоелектрическите токове спомагат за извличане на дълбоки замърсявания от порите, докато козметичните съставки проникват дълбоко в кожата.
- **Вибрация:** Подобрява стегнатостта, еластичността и метаболизма на кожата чрез механична вибрация и електрическа стимулация.
- **Топъл масаж:** Стимулира абсорбцията, подобрява текстурата на кожата и ѝ придава изпълнен и младежки вид.
- **Червена светлина:** Прониква дълбоко за стимулиране на колагена, изсветляване на кожата и намаляване на фините линии и бръчки.
- **Синя светлина:** Стимулира синтеза на колаген, подмладява кожата, стяга отпуснатите зони, свива порите и подобрява състоянието на мазната, чувствителна и склонна към акне кожа.
- **Зелена светлина:** Подобрява използването на кислорода, насърчава микроциркулацията на кожата, ускорява лимфния дренаж, намалява подпухналостта и успокоява кожата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Режим CLEAN (Почистване и извличане): Премахва дълбоките замърсявания, свива порите, изсветлява пигментацията и помага при акне.

Режим EMS (EMS терапия): Подобрява абсорбцията на козметични продукти, активира кожата и подпомага подмладяването, изсветляването и намаляването на бръчките.

Режим HOT (Топъл масаж): Стимулира кръвообращението, подобрява стегнатостта и еластичността на кожата и поддържа хидратацията за младежки блясък.

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА



1. Глава за подмладяване
 2. Червена, синя и зелена светлина
 3. Индикатор за режим
 4. Индикатор за функция
 5. Бутон за включване/изключване и регулиране на функциите
 6. USB порт за зареждане
-

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА УПОТРЕБА

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1,5 секунди, за да включите устройството. Не може да се използва по време на зареждане.
 2. Дръжте индукционните ленти от двете страни по време на употреба, за да завършите електрическата верига с тялото.
 3. Устройството използва йонна технология с микроелектрически ток, така че леко изтръпване е нормално.
 4. При извличане на дълбоки замърсявания използвайте дегримьор или мицеларна вода—не използвайте почистващи гелове или масла.
- Първо използвайте устройството за извличане на дълбоките замърсявания, след което измийте повърхностните нечистотии с почистващ гел.
-

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не се препоръчва за лица, които са преминали пластична хирургия на лицето, имат метални импланти или са бременни.
2. Почиствайте главата на устройството с кърпичка. Не я мийте с вода и не докосвайте металните повърхности.
3. Дръжте устройството далеч от бани и влажни среди, за да предотвратите късо съединение.
4. Използвайте всеки режим само веднъж на ден, като се препоръчва последователност от три режима на употреба.
5. Устройството е предназначено само за употреба върху лицето и шията—избягвайте зони с акне, петна или зачервяване.

о Лицата с чувствителна кожа трябва да го използват само веднъж седмично.

6. Преди да извършите поддръжка, уверете се, че захранването е изключено. Почистването с влажна кърпа, докато устройството е включено, може да предизвика лек електрически удар.
7. Не използвайте корозивни разтвори (напр. алкохол, ацетон, бензин) за почистване на устройството, тъй като това може да доведе до неизправности, пукнатини или обезцветяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Режим CLEAN (Почистване и извличане)

- Ефективно премахва замърсяванията от порите и подобрява прозрачността на кожата. Избягвайте дебели памучни тампони.
- Комбиниран със зелена светлина за подобряване на използването на кислород, микроциркулацията и успокояване на кожата.

Стъпки:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 секунда, за да влезете в режим "CLEAN" (индикатор със зелена светлина).
2. Нанесете дегримьор или почистващ лосион равномерно върху кожата. (Устройството не е водоустойчиво—не пръскайте директно вода върху него.)
3. Дръжте металните индукционни ленти от двете страни, за да завършите йонната верига.
4. Плъзгайте устройството нагоре по лицето и шията.

Режим EMS (Електромускулна стимулация)

- Стимулира и релаксира кожата, като подпомага дълбокото проникване на козметичните продукти.
- Комбиниран с червена светлина за активиране на колагена, изсветляване на кожата и намаляване на бръчките.

Стъпки:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 секунда, за да включите устройството, след това натиснете отново, за да преминете в режим "EMS" (индикатор с червена светлина).
2. Нанесете тоник или лосион равномерно върху кожата.
3. Дръжте металните индукционни ленти, за да завършите йонната верига.
4. Плъзгайте устройството нагоре по лицето и шията.



Режим НОТ (Топъл масаж)

- Нежно събужда и отпуска кожата, възстановявайки нейната сияйност и еластичност.
- Комбиниран със синя светлина за стимулиране на синтеза на колаген, свиване на порите и третиране на мазна, чувствителна или склонна към акне кожа.

Стъпки:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 секунда, за да включите устройството, след това натиснете два пъти, за да преминете в режим "НОТ" (индикатор със синя светлина).
2. Нанесете маска за лице или серум равномерно върху кожата.
3. Дръжте металните индукционни ленти, за да завършите йонната верига.
4. Плъзгайте устройството нагоре по лицето и шията.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ

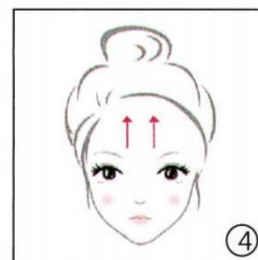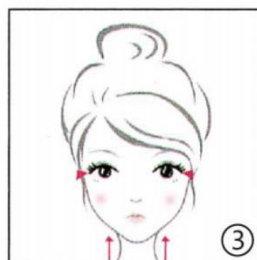

1. Повдигане от брадичката към бузата.
2. Повдигане от бузата към външния ъгъл на окото.
3. Повдигане от шията към брадичката.
4. Повдигане от брадичката към челюстната линия.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.