

AL: MASSORA – MANUAL PËRDORIMI

Masazhator për shpatulla dhe qafë

PREZANTIMI I PRODUKTIT

Emri i produktit: MASSORA

Modeli: FZ-831 / N7

Bateria: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Tensioni nominal i hyrjes: 5V

Fuqia nominale: 10W


Standardet e zbatueshme: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Shënim: Ju lutemi referojuni produktit real. Ilustrimet në këtë manual janë vetëm për referencë. Produkti mund të përditësohet pa njoftim paraprak.


KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Masazh i dyfishtë me pëllëmbë**
Simulon një masazh real me dhjetë gishta për të synuar me saktësi pikat e akupresurës.
- Material i butë dhe miqësor me lëkurën**
I prodhuar nga silikon me cilësi ushqimore për një ndjesi të butë dhe të rehatshme, e ngjashme me dorën e njeriut.
- Dizajn i lehtë dhe i lëvizshëm**
Peshë vetëm 760 g, redukton ngarkesën mbi shpatulla dhe mundëson transport të lehtë.
- Performancë e fuqishme**
I pajisur me motor pa furça dhe me zhurmë të ulët për një masazh të butë dhe të rehatshëm.
- Kontroll i thjeshtë me një buton**
Funksionim me një buton për përdorim të lehtë dhe nisje të shpejtë.
- Funksion ngrohjeje i rregullueshëm**
Përfshin funksionin e kompresës së ngrohtë me nivele të rregullueshme temperature për relaksim më të thellë dhe rehati më të madhe.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

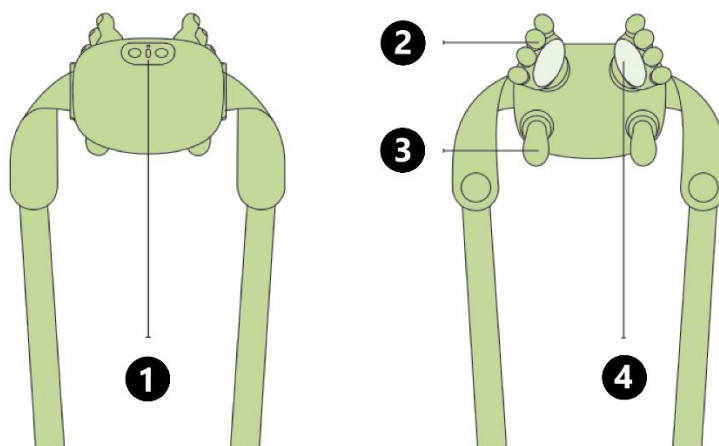

1. Butonat e kontrollit
2. Koka e sipërme e masazhit
3. Koka e poshtme e masazhit
4. Zona e kompresës së ngrohtë

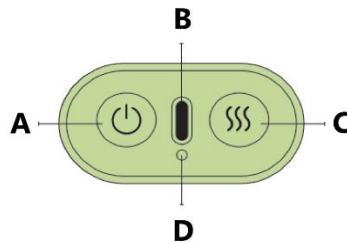

A. **Butoni ON/OFF (Ndezje/Fikje)**


Shtypeni dhe mbajeni për 3 sekonda për të ndezur ose fikur pajisjen. Shtypje e shkurtër për të ndryshuar mënyrën e masazhit.

B. **Porta e karikimit**

C. **Butoni i kompresës së ngrohtë**

D. **Drita treguese**

PËRDORIMI I PRODUKTIT

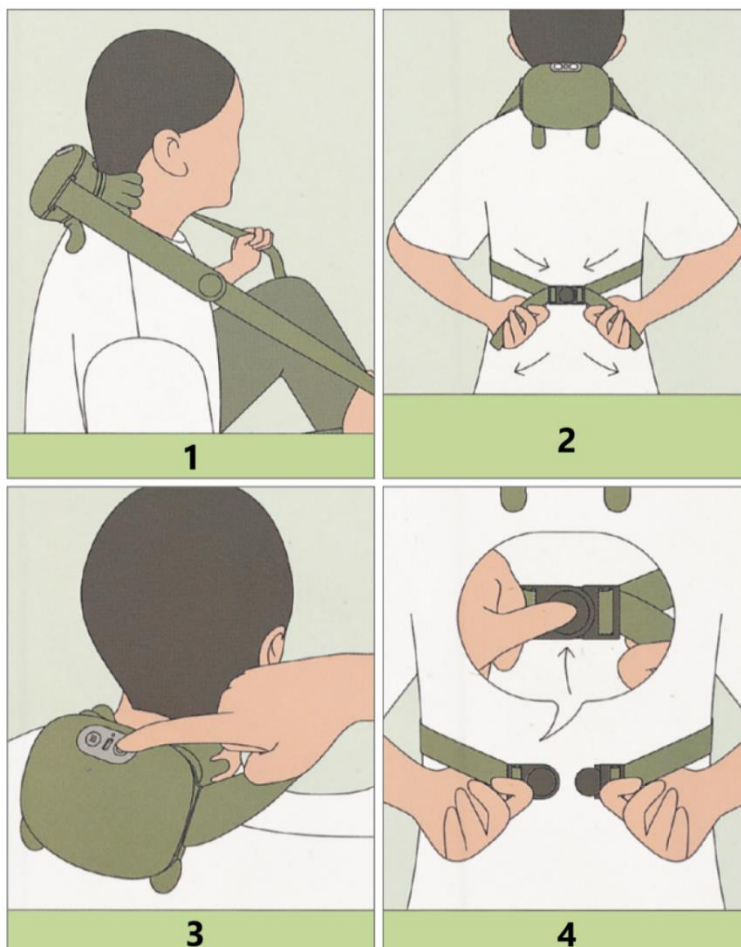

1. Vendoseni masazhatorin në mënyrë të rehatshme mbi shpatulla.
 2. Tërhiqni kapësen pas shpinës dhe fiksojeni fort. Rregulloni të dy rripat në të njëjtën gjatësi për të shmangur parehatinë nga shtrëngimi i pabarabartë.
 3. Shtypeni dhe mbajeni butonin ON/OFF për 3 sekonda për të nisur pajisjen.
 4. Pas përdorimit, shtypni kapësen për të liruar rripin dhe hiqeni pajisjen.
-

FUNKSIONET E BUTONAVE

Ndezje/Fikje

Shtypeni dhe mbajeni butonin ON/OFF për 3 sekonda për të ndezur ose fikur pajisjen.

Kur pajisja është e ndezur:

- Drita e bardhë treguese ndizet.
 - Pajisja ndizet në mënyrë të paracaktuar në Modalitetin e Masazhit 1 dhe Ngrohje të Ulët.
 - Koha e paracaktuar e masazhit është 15 minuta. Pas përfundimit, pajisja fiket automatikisht dhe drita e bardhë fiket.
-

Ndryshimi i mënyrës së masazhit

Kur pajisja është e ndezur, shtypni shkurt butonin ON/OFF për të kaluar ndërmjet mënyrave:

1. Modaliteti i Masazhit 1 – Drita e bardhë pulson një herë
2. Modaliteti i Masazhit 2 – Drita e bardhë pulson dy herë
3. Modaliteti i Masazhit 3 – Drita e bardhë pulson tre herë

Cilësimi i ngrohjes mbetet i pandryshuar gjatë ndryshimit të mënyrës së masazhit.

Ndryshimi i nivelit të ngrohjes

Kur pajisja ndizet, ajo është e vendosur automatikisht në Ngrohje të Ulët.

Shtypni shkurt butonin e kompresës së ngrohtë për të ndryshuar nivelin:

1. Ngrohje e Ulët – Drita e kuqe pulson një herë
2. Ngrohje e Lartë – Drita e kuqe pulson dy herë
3. Ngrohja e fikur – Drita e kuqe fiket

Ndryshimi i nivelit të ngrohjes nuk ndikon në mënyrën e masazhit.

Treguesi i karikimit

- Drita e bardhë ndizet: Pajisja është në funksionim.
 - Drita e kuqe pulson: Bateria është e ulët, ju lutemi karikojeni.
 - Drita e kuqe qëndron e ndezur: Karikimi në proces.
 - Drita e bardhë qëndron e ndezur: Karikimi i plotë.
-

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Ruajtja

1. Ruajeni produktin në paketimin origjinal në një vend të sigurt, të thatë, të freskët dhe të ajrosur mirë kur nuk përdoret.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara ruajtjes.
3. Mos e varni produktin nga kabllot dhe karikimit.
4. Shmangni gërvishtjet nga objekte të mprehta.
5. Mbajeni larg nga rrezet direkte të diellit dhe temperaturat e larta.

Pastrimi

- Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji përpara pastrimit. Mos e prekni prizën me duar të lagura.
- Fshini sipërfaqen me një leckë të pastër dhe të butë.
- Për papastërti të forta, lagni lehtë leckën me ujë, shtrydheni mirë dhe pastroni sipërfaqen.
- Thajeni plotësisht me një leckë të thatë përpara përdorimit të radhës.

Mirëmbajtja

1. Mbajeni larg nga temperaturat e larta dhe lagështia.
2. Nëse nuk përdoret për një kohë të gjatë, mbulojeni me një mbulesë mbrojtëse kundër pluhurit (blihet veçmas) për të parandaluar grumbullimin e pluhurit.

MJEDISI I PUNËS DHE I RUAJTJES

1. Mos e përdorni në ambiente me temperaturë ose lagështi të lartë.
2. Ruajeni në një vend të thatë, larg rrezeve direkte të diellit.
3. Shmangni përdorimin në ambiente me pluhur ose lagështi.
4. Mos e përdorni në vende me dridhje ose materiale të ndezshme.
5. Përdorni vetëm kabllon e karikimit të furnizuar.
6. Fikeni dhe shkëputeni pajisjen nga energjia përpara pastrimit.

PROBLEMET E ZAKONSHME DHE ZGJIDHJET

Nëse pajisja nuk funksionon si duhet, kryeni këto kontrolle. Nëse problemi vazhdon, shkëputeni nga energjia dhe kontaktoni shërbimin teknik të autorizuar. Mos e hapni pajisjen vetë.

Problem	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk ndizet	Bateria e ulët	Karikoni plotësisht para përdorimit
	Pajisja nuk është startuar	Shtypni dhe mbani butonin ON/OFF për 3 sekonda
	Pajisja po karikohet	Pajisja nuk mund të përdoret gjatë karikimit
Pajisja nuk karikohet	Kabllot nuk është lidhur si duhet	Sigurohuni që kabllot dhe porta janë lidhur fort

Problem	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Defekt i brendshëm	Kontaktoni shërbimin pas shitjes
Pajisja ndalet gjatë përdorimit	Bateria e ulët	Karikoni plotësisht
	Koha e caktuar përfundoi	Rinisni pajisjen
Intensiteti i masazhit i dobët	Bateria e ulët	Karikoni menjëherë
Nuk funksionon ngrohja	Ngrohja nuk është aktivizuar	Shtypni butonin e kompresës së ngrohtë

MASAT E SIGURISË

Rreziku

Mos përdorni këtë produkt së bashku me pajisjet elektronike mjekësore të mëposhtme, pasi mund të shkaktojë defekt ose rrezik serioz:

- Pacemakers ose pajisje të tjera elektronike të implantueshme
- Pajisje për mbajtje të jetës, si p.sh. makina për zemër dhe mushkëri artificiale
- Elektrokardiografë dhe pajisje monitorimi të ngjashme

Informacion i rëndësishëm mbi sigurinë

- Lexo këtë manual me kujdes para përdorimit.
- Nëse ndjeni ndonjë shqetësim gjatë përdorimit, ndaloni menjëherë dhe konsultohuni me një mjek.
- Nëse pajisja nuk funksionon si duhet, fiken menjëherë për të parandaluar mbinxehjen ose shkurtimin e rrymës. Kontaktoni shërbimin për ndihmë.
- Mos fusni ose hiqni kabllo me duar të lagura.
- Mos përdorni ndërkohë që keni bizhuteri si varëse ose qafore.
- Mos përdorni ndërkohë që jeni shtrirë horizontalisht.
- Mos përdorni në mjedise të ndezshme ose shpërthyes (p.sh. stacione karburanti, punëtori me pluhur).
- Mos përdorni gjatë ngasjes ose kryerjes së aktiviteteve të rrezikshme.
- Mos përdorni gjatë gjumit ose kur jeni të pavetëdijshëm.
- Mbajeni larg fëmijëve.
- Mos përdorni në zona të dëmtuara, të fryra, të inflamuar, me mavijosje ose pas operacionit të fundit.
- Mos përdorni nëse keni sëmundje të zemrës, sëmundje akute, tumore malinje, çrregullime neurologjike, presion të lartë ose të ulët gjaku, osteoporozë, histori goditjeje në tru ose tendencë për gjakderdhje.
- Përdoruesit mbi 65 vjeç duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit dhe të kufizojnë me kujdes kohën e përdorimit.

Paralajmërim

- Kjo është një pajisje për kujdes personal dhe nuk zëvendëson trajtimin mjekësor.

- Mos e përdorni në zemër, kokë, kraharor, bark, organet gjenitale ose zona të tjera të ndjeshme.
- Mos e përdorni më shumë se 10 minuta në të njëjtin pjesë të trupit për të shmangur djegie ose stimulim të tepërt.
- Përdoruesit me ndjeshmëri të ulët ndaj nxehtësisë duhet të jenë të kujdesshëm për të shmangur djegiet.
- Mos e hapni, modifikoni, zhytni në ujë ose hidhni në zjarr.
- Mos e ekspozoni pajisjen në temperatura të larta.
- Mos përdorni më shumë se një njësi njëkohësisht.
- Mos operoni pajisjen me një kohëmatës ose sistem kontrolli të jashtëm.

Konsultohuni me mjekun para përdorimit nëse:

- Jeni duke marrë trajtim mjekësor
- Keni sëmundje infektive
- Keni presion gjaku të çrregullt
- Keni probleme të qarkullimit të gjakut të lidhura me diabetin
- Keni ethe mbi 38°C
- Jeni shtatzënë ose pas lindjes
- Keni dëmtime kognitive

HEQJA E BATERISË

Rreziku

- Bateria e rikarikueshme është e dedikuar vetëm për këtë produkt.
- Mos e karikoni baterinë pas heqjes.
- Mos e hidhni në zjarr, mos e shpini, mos e shtypni dhe mos e hapni.
- Mos shkaktoni shkurtim qarku në terminalet e baterisë.
- Mos e ekspozoni në temperatura të larta.

Trajtimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë mbinxehje, zjarr ose shpërthim.

Paralajmërim

- Bateria e hequra mbajini larg fëmijëve.
- Nëse gëlltitet, kërkon menjëherë ndihmë mjekësore.
- Nëse lëngu i baterisë del në kontakt me sytë, shpëlajeni menjëherë me ujë të pastër dhe kërkon ndihmë mjekësore.
- Nëse lëngu bie mbi lëkurë, shpëlajeni mirë me ujë dhe konsultohuni me mjekun nëse irritimi vazhdon.

Udhëzime për heqjen e baterisë

1. Fikni pajisjen.
 2. Përdorni një vidëkryq për të hequr vidat e kasës.
 3. Shkëputni ose prenë telat e baterisë.
 4. Hiqni dhe asgjësoni baterinë sipas rregullave vendore.
-

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.