

CZ: MASSORA – NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní přístroj na ramena a krk

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Název produktu: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Baterie: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Jmenovitý vstup: 5V

Jmenovitý výkon: 10W


Použitelné normy: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Poznámka: Prosím, řiďte se skutečným produktem. Ilustrace v tomto manuálu slouží pouze jako reference. Aktualizace produktu mohou nastat bez předchozího upozornění.


VLASTNOSTI PRODUKTU

- Masáž oběma dlaněmi**
Simuluje skutečnou masáž rukou s použitím deseti prstů a přesně cílí na akupresurní body.
- Materiál šetrný k pokožce**
Vyrobeno z potravinářského silikonu, poskytujícího měkký a pohodlný dotek podobný lidské ruce.
- Lehký a přenosný design**
Váží pouze 760 g, snižuje zátěž ramen a usnadňuje přenášení.
- Výkonný provoz**
Vybaven bezkartáčovým tichým motorem pro hladký a pohodlný chod masáže.
- Jednoduché ovládání tlačítkem**
Ovládání jedním tlačítkem pro snadné použití a rychlý start.
- Nastavitelná funkce tepla**
Funkce teplé komprese s možností nastavení teploty pro hlubší relaxaci a větší komfort.

PŘEHLED PRODUKTU

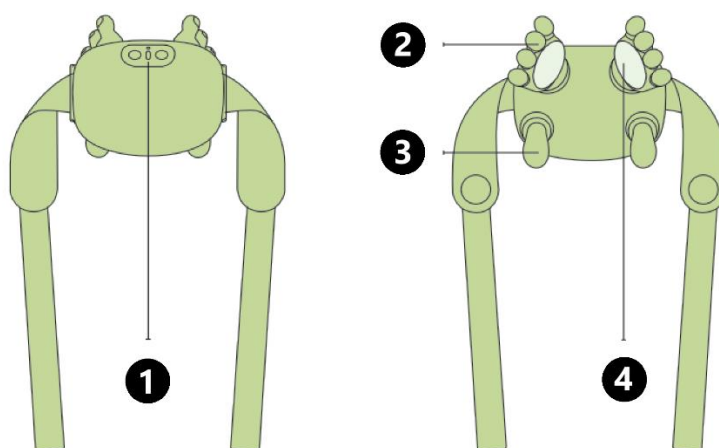


1. Ovládací tlačítka
2. Horní masážní hlava
3. Dolní masážní hlava
4. Oblast pro teplou kompresi

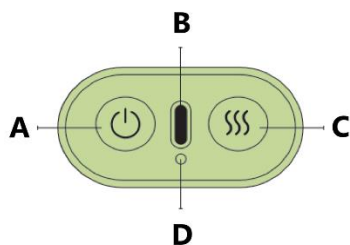

- A. **Tlačítko napájení**
Podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Krátké stisknutí změní masážní režim.
- B. **Port pro nabíjení**
- C. **Tlačítko teplé komprese**
- D. **Indikační světlo**

POUŽITÍ PRODUKTU

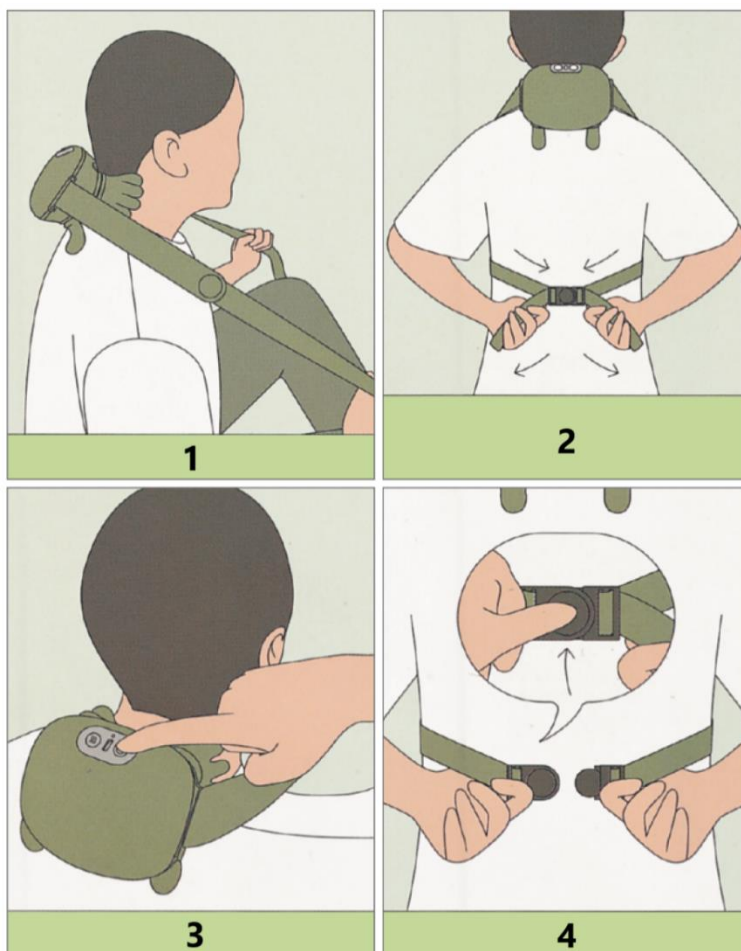

1. Umístěte masážní přístroj pohodlně na ramena.
 2. Natáhněte přezku na zádech a pevně ji upevněte. Upravte obě pásy na stejnou délku, aby nedošlo k nepohodlí způsobenému nerovnoměrným napětím.
 3. Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro spuštění zařízení.
 4. Po použití stiskněte přezku pro uvolnění pásu a zařízení odstraňte.
-

FUNKCE TLAČÍTEK

Zapnutí/Vypnutí

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

Když je zařízení zapnuto:

- Bílé kontrolní světlo se rozsvítí.
 - Zařízení se standardně spustí v Masážním režimu 1 a nízkém nastavení tepla.
 - Standardní doba masáže je 15 minut. Po dokončení se zařízení automaticky vypne a bílé světlo zhasne.
-

Přepínání masážního režimu

Když je zařízení zapnuto, krátce stiskněte tlačítko napájení pro cyklické přepínání masážních režimů:

1. Masážní režim 1 – bílé světlo blikne jednou
2. Masážní režim 2 – bílé světlo blikne dvakrát
3. Masážní režim 3 – bílé světlo blikne třikrát

Nastavení tepla zůstává při přepínání masážních režimů nezměněno.

Přepínání úrovně tepla

Když je zařízení zapnuto, startuje v režimu nízkého tepla.

Krátce stiskněte tlačítko teplé komprese pro změnu úrovně tepla:

1. Nízké – červené světlo blikne jednou
2. Vysoké – červené světlo blikne dvakrát
3. Vypnuto – červené světlo zhasne

Změna úrovně tepla nemá vliv na masážní režim.

Indikátor nabíjení

- Bílé světlo svítí: zařízení v provozu.
 - Červené světlo bliká: nízká baterie, prosím nabijte.
 - Červené světlo svítí nepřerušovaně: probíhá nabíjení.
 - Bílé světlo svítí nepřerušovaně: plně nabito.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Skladování

1. Uložte produkt do originálního obalu na bezpečném, suchém, chladném a dobře větraném místě, když se nepoužívá.
2. Před uložením se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
3. Nepověšujte produkt za nabíjecí kabel.
4. Vyvarujte se poškrábání povrchu ostrými předměty.
5. Chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.

Čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od napájení. Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Otřete povrch měkkou čistou látkou.
- Pro odolnou špínu lehce navlhčete látku vodou, dobře vyždímejte a otřete povrch.
- Před dalším použitím důkladně osušte suchou látkou.

Údržba

1. Držte mimo zdroje vysokého tepla a vlhkosti.
2. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zakryjte jej ochranným obalem proti prachu (k zakoupení samostatně) pro prevenci usazování prachu.

PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

1. Nepoužívejte v prostředích s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
2. Skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
3. Vyhněte se použití v prašných nebo vlhkých prostředích.
4. Nepoužívejte v oblastech vystavených vibracím nebo hořlavinám.
5. Používejte pouze přiložený nabíjecí kabel.
6. Před čištěním vypněte a odpojte.

BĚŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud zařízení nefunguje správně, proveďte níže uvedené kontroly. Pokud problém přetrvává, odpojte zařízení a kontaktujte autorizovaný servis. Nepokoušejte se produkt rozebírat sami.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze zapnout	Nízká baterie	Plně nabít před použitím
	Zařízení nebylo spuštěno	Podržte tlačítko napájení 3 sekundy
	Probíhá nabíjení	Nelze používat během nabíjení
Nelze nabít	Kabel není správně připojen	Zkontrolujte, zda je kabel a port pevně připojen
	Vnitřní porucha	Kontaktujte servis
	Nízká baterie	Plně nabít

Problém	Možná příčina	Řešení
Zastaví se během použití	Časovač dokončen	Restartovat zařízení
Slabá intenzita masáže	Nízká baterie	Nabít ihned
Teplá funkce nefunguje	Teplo není aktivováno	Stiskněte tlačítko teplé komprese

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí

Nepoužívejte tento produkt současně s následujícími lékařskými elektronickými zařízeními, mohlo by dojít k poruše nebo vážnému riziku:

- Implantabilní kardiostimulátory nebo jiné implantovatelné zařízení
- Zdravotnická podpora života, například přístroje srdce-plíce
- EKG a podobná monitorovací zařízení

Důležité bezpečnostní informace

- Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál.
- Při nepohodlí během používání okamžitě přestaňte a konzultujte s lékařem.
- Při poruše okamžitě vypněte zařízení, aby nedošlo k přehřátí nebo zkratu. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepřipojujte ani neodpojujte kabel mokřýma rukama.
- Neužívejte s náhrdelníky nebo šperky na krku.
- Nepoužívejte vleže.
- Nepoužívejte v hořlavém nebo výbušném prostředí (např. čerpací stanice, prašné dílny).
- Nepoužívejte během řízení nebo nebezpečných činností.
- Nepoužívejte během spánku nebo v bezvědomí.
- Mějte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte na poraněné, oteklé, zanícené, pohmožděné nebo nedávno operované oblasti.
- Nepoužívejte, pokud máte srdeční onemocnění, akutní choroby, maligní nádory, neurologické poruchy, abnormální krevní tlak, osteoporózu, historii mrtvice nebo sklon k krvácení.
- Uživatelé starší 65 let by měli konzultovat s lékařem a přísně kontrolovat dobu používání.

Varování

- Toto je osobní péče a nenahrazuje lékařskou léčbu.
- Nepoužívejte na srdci, hlavě, hrudi, břiše, genitáliích nebo jiných citlivých oblastech.
- Nepoužívejte déle než 10 minut na stejné oblasti těla, aby nedošlo k popáleninám z nízké teploty nebo nadměrnému dráždění.
- Uživatelé se sníženou citlivostí na teplo musí být opatrní, aby nedošlo k popálení.
- Nedemontujte, nemodifikujte, nenamáčejte do vody a neházejte do ohně.
- Nepodléhejte vysokým teplotám.
- Nepoužívejte více zařízení současně.
- Nepoužívejte s externí časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Poradte se s lékařem před použitím, pokud:

- Jste v lékařské péči
- Máte infekční onemocnění
- Máte abnormální krevní tlak
- Máte oběhové problémy související s diabetem
- Máte horečku nad 38 °C
- Jste těhotná nebo po porodu
- Máte kognitivní poruchy

LIKVIDACE BATERIE

Nebezpečí

- Nabíjecí baterie je určena výhradně pro tento produkt.
- Nechte baterii po vyjmutí nenabíjet.
- Neházejte do ohně, nepropichujte, nedrťte a nedemontujte.
- Nezkratovat bateriové kontakty.
- Nepodléhejte vysokým teplotám.

Nesprávné zacházení může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.

Varování

- Uchovávejte vyjmuté baterie mimo dosah dětí.
- Při požití okamžitě vyhledejte lékaře.
- Při kontaktu bateriové tekutiny s očima okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Při kontaktu s pokožkou důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékaře, pokud podráždění přetrvává.

Vyjmutí baterie

1. Vypněte zařízení.
2. Použijte křížový šroubovák k odstranění šroubů krytu.
3. Odpojte nebo přerušte vodiče baterie.
4. Odstraňte a správně zlikvidujte baterii podle místních předpisů.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.