

DK: MASSORA – BRUGERVEJLEDNING

Skulder- og nakkemassager

PRODUKTPRÆSENTATION

Produktnavn: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Batteri: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Nominal indgang: 5V

Nominal effekt: 10W


Gældende standarder: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Bemærk: Se venligst det faktiske produkt. Illustrationerne i denne vejledning er kun til reference. Produktopdateringer kan forekomme uden forudgående varsel.


PRODUKTFUNKTIONER

1. **Dobbelt håndflade-nedtrækningsmassage**
Simulerer en ægte håndmassage med ti-fingers nedtrækning for præcist at målrette akupressurpunkter.
 2. **Hudvenligt materiale**
Fremstillet af silikone egnet til fødevarer, giver en blød og behagelig følelse, der minder om en menneskelig hånd.
 3. **Letvægts- og bærbart design**
Vejer kun 760 g, reducerer belastningen på skuldrene og gør den nem at transportere.
 4. **Kraftfuld ydeevne**
Udstyret med en børsteløs, lydløs motor for jævn og behagelig massage.
 5. **Enkel knapkontrol**
Én-knaps betjening for nem brug og hurtig start.
 6. **Justerbar varmfunktion**
Funktion med varmekpakning og justerbare temperaturindstillinger for dybere afslapning og øget komfort.
-

PRODUKTOVERSIGT

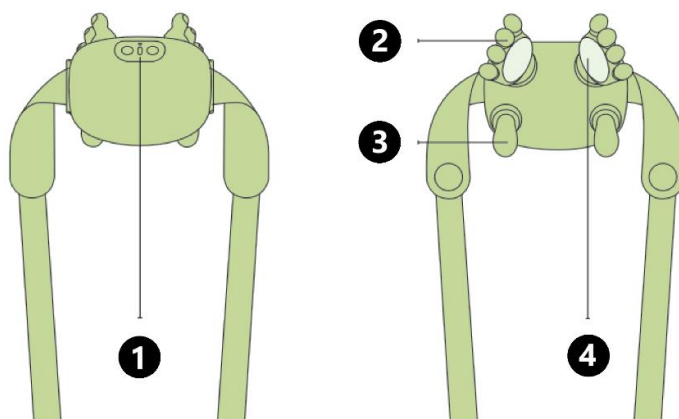

1. Kontrolknapper
2. Øverste massagehoved
3. Nederste massagehoved
4. Område til varmepakning

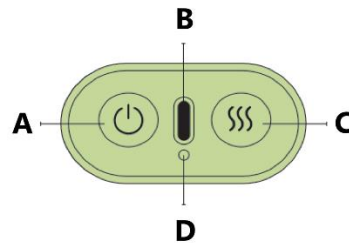

A. Tænd/sluk-knap


Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden. Kort tryk for at skifte massagemodus.

B. Opladningsport

C. Varmepakningsknap

D. Indikatorlys

BRUG AF PRODUKT

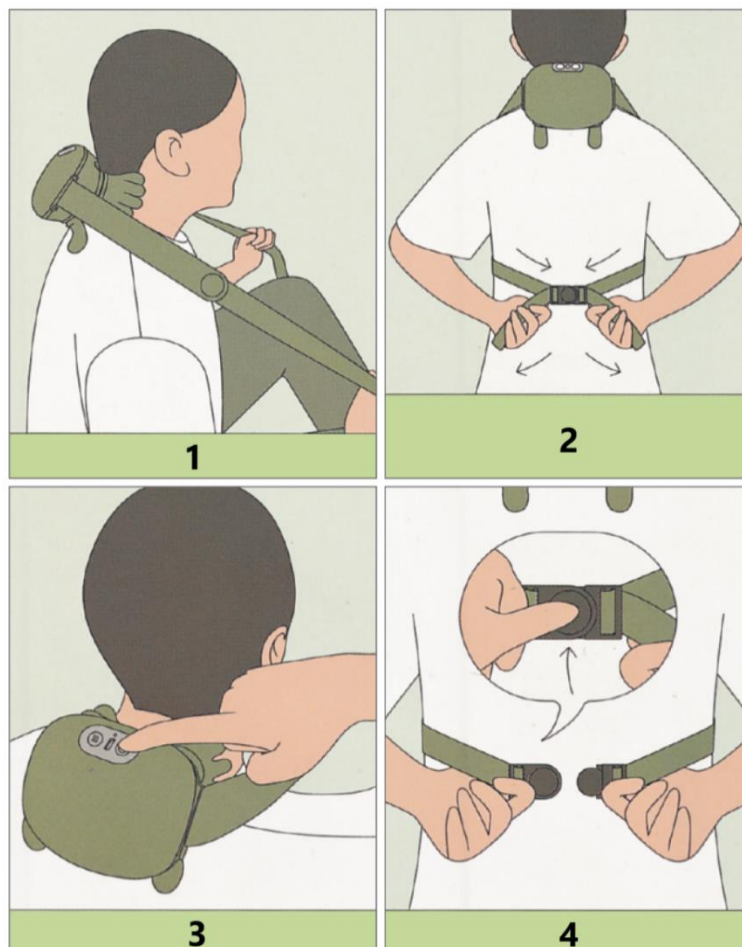

1. Placer massageren komfortabelt på dine skuldre.
 2. Træk spænden bag ryggen og fastgør den sikkert. Juster begge stropper til samme længde for at undgå ubehag fra ujævn spænding.
 3. Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at starte enheden.
 4. Efter brug trykkes spænden for at frigøre skulderstroppen, og enheden fjernes.
-

KNAPFUNKTIONER

Tænd/sluk

Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

Når enheden er tændt:

- Det hvide indikatorlys tændes.
 - Enheden starter som standard i Massage Mode 1 og Lav varme.
 - Standard massagetid er 15 minutter. Efter afslutning slukker enheden automatisk, og det hvide lys slukkes.
-

Skift af massagemodus

Når enheden er tændt, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem massagemoduser:

1. Massage Mode 1 – Hvidt lys blinker én gang
2. Massage Mode 2 – Hvidt lys blinker to gange
3. Massage Mode 3 – Hvidt lys blinker tre gange

Varmeindstillingen forbliver uændret, når massagemodus skiftes.

Skift af varmeindstilling

Når enheden er tændt, starter den som standard i Lav varme.

Kort tryk på varmepakningsknappen for at ændre varmeindstilling:

1. Lav varme – Rødt lys blinker én gang
2. Høj varme – Rødt lys blinker to gange
3. Varme slukket – Rødt lys slukket

Skift af varme påvirker ikke massagemodus.

Opladningsindikator

- Hvidt lys tændt: Enheden er i brug.
 - Rødt lys blinker: Lavt batteri, oplad venligst.
 - Rødt lys tændt konstant: Opladning i gang.
 - Hvidt lys tændt konstant: Fuld opladning.
-

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring

1. Opbevar produktet i originalemballagen et sikkert, tørt, køligt og godt ventileret sted, når det ikke er i brug.
2. Sørg for, at enheden er slukket før opbevaring.
3. Hæng ikke produktet i opladningskablet.
4. Undgå at ridse overfladen med skarpe genstande.
5. Hold væk fra direkte sollys og høje temperaturer.

Rengøring

- Frakobl strømmen før rengøring. Rør ikke stikket med våde hænder.
- Tør overfladen med en blød, ren klud.
- Ved genstridigt snavs, fugt kluden med vand, vrid den godt og tør overfladen.
- Tør helt med en tør klud før næste brug.

Vedligeholdelse

1. Hold væk fra høj varme og fugt.
2. Hvis produktet ikke bruges i længere tid, dæk det til med en støvpose (købes separat) for at undgå støvophobning.

DRIFTS- OG OPBEVARINGSMILJØ

1. Brug ikke i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Opbevar på et tørt sted, væk fra direkte sollys.
3. Undgå brug i støvede eller våde miljøer.
4. Brug ikke i områder med vibrationer eller brandfare.
5. Brug kun det medfølgende opladningskabel.
6. Sluk og frakobl før rengøring.

ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER

Hvis enheden fejler, udfør følgende kontroller. Hvis problemet fortsætter, frakobl strømmen og kontakt professionelt serviceteknikerpersonale. Forsøg ikke selv at skille produktet ad.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Starter ikke	Lavt batteri	Oplad fuldt inden brug
	Enheden er ikke startet	Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder
	Under opladning	Enheden kan ikke bruges under opladning
Oplader ikke	Opladningskablet er ikke korrekt tilsluttet	Sørg for, at kabel og port er sikkert tilsluttet
	Intern fejl	Kontakt kundeservice

Problem	Mulig årsag	Løsning
Enheden stopper under brug	Lavt batteri	Oplad fuldt
	Timer færdig	Genstart enheden
Svag massageintensitet	Lavt batteri	Oplad straks
Ingen varmfunktion	Varme ikke aktiveret	Tryk på varmepakningsknappen

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Fare

Brug IKKE produktet sammen med følgende medicinske elektroniske enheder, da det kan forårsage funktionsfejl og alvorlig risiko:

- Pacemakere eller andre implanterbare medicinske enheder
- Livsunderstøttende udstyr som hjerte-lunge-maskiner
- Elektrokardiografer og lignende overvågningsudstyr

Vigtig sikkerhedsinformation

- Læs denne vejledning omhyggeligt før brug.
- Stop straks brugen og kontakt læge, hvis ubehag opstår under brug.
- Ved funktionsfejl sluk enheden straks for at forhindre overophedning eller kortslutning. Kontakt kundeservice.
- Tilslut eller frakobl ikke opladningskablet med våde hænder.
- Brug ikke mens du bærer halskæder.
- Brug ikke mens du ligger fladt.
- Brug ikke i brand- eller eksplosive miljøer (f.eks. tankstationer, støvede værksteder).
- Brug ikke under kørsel eller farlige aktiviteter.
- Brug ikke mens du sover eller er bevidstløs.
- Hold væk fra børn og spædbørn.
- Brug ikke på beskadigede, hævede, betændte, blå mærker eller nyligt opererede områder.
- Brug ikke hvis du har hjertesygdom, akut sygdom, ondartede tumorer, neurologiske lidelser, blodtryksproblemer, osteoporose, tidligere slagtilfælde eller blødningstendens.
- Brugere over 65 år bør konsultere læge før brug og nøje kontrollere brugstiden.

Advarsel

- Dette er et personlig plejeprodukt og erstatter ikke medicinsk behandling.
- Brug ikke på hjerte, hoved, bryst, mave, kønsorganer eller andre følsomme områder.
- Brug ikke mere end 10 minutter på samme område for at undgå lavtemperaturforbrændinger eller overstimulering.
- Brugere med nedsat varmefølsomhed bør være forsigtige.
- Må ikke skilles ad, modificeres, nedsænkes i vand eller kastes i ild.

- Udsæt ikke produktet for høje temperaturer.
- Brug ikke flere enheder samtidig.
- Brug ikke med ekstern timer eller fjernbetjeningssystem.

Konsulter læge før brug, hvis du:

- Modtager medicinsk behandling
- Har smitsomme sygdomme
- Har unormalt blodtryk
- Har diabetes-relaterede cirkulationsproblemer
- Har feber (over 38°C)
- Er gravid eller postpartum
- Har kognitive problemer

BATTERIAFFALD

Fare

- Genopladeligt batteri er kun til dette produkt.
- Oplad ikke batteriet efter fjernelse.
- Må ikke kastes i ild, gennembøres, knuses eller skilles ad.
- Må ikke kortsluttes.
- Udsæt ikke for høje temperaturer.
- Forkert håndtering kan forårsage overophedning, brand eller eksplosion.

Advarsel

- Hold fjernede batterier væk fra børn.
- Hvis slugt, søg straks lægehjælp.
- Hvis batterivæske kommer i øjnene, skyl straks med rent vand og søg lægehjælp.
- Hvis væsken kommer på huden, skyl grundigt og søg lægehjælp, hvis irritation fortsætter.

Fjernelse af batteri

1. Sluk enheden.
2. Brug en Phillips-skruetrækker til at fjerne kabinettets skruer.
3. Frakobl eller klip batteriledningerne.
4. Fjern batteriet og bortskaff korrekt.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.