

EE: MASSORA – KASUTUSJUHEND

Õla- ja kaelamassager

TOOTE TUTVUSTUS

Toote nimi: MASSORA

Mudel: FZ-831 / N7

Aku: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Nimisisend: 5V

Nominaalne võimsus: 10W


Kohaldatavad standardid: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Märkus: Palun vaadake tegelikku toodet. Käesolevas juhendis olevad illustratsioonid on ainult informatiivsed. Tootetäiendused võivad toimuda eelneva teavituse ilma.


TOOTE OMADUSED

- Kahepoolsed peopesa sõtkimisliigutused**
Simuleerib tõelist käemassaaži kümne sõrme sõtkimisega, et täpselt mõjutada akupressuuri punkte.
 - Nahasõbralik materjal**
Valmistatud toiduklassi silikoonist, tagab pehme ja mugava puudutuse, sarnane inimese käele.
 - Kerge ja kaasaskantav disain**
Kaalub vaid 760 g, vähendab õlakoormust ja on mugav kaasas kanda.
 - Võimas jõudlus**
Varustatud harjadeta vaikse mootoriga, et massaaž toimuks sujuvalt ja mugavalt.
 - Lihtne nupuvajutus**
Ühe nupuga kasutamine lihtsaks tööks ja kiireks käivitamiseks.
 - Reguleeritav soojendufunktsioon**
Sooja kompressi funktsioon reguleeritavate temperatuuritasemetega sügavamaks lõõgastuseks ja mugavuse suurendamiseks.
-

TOOTE ÜLEVAADE

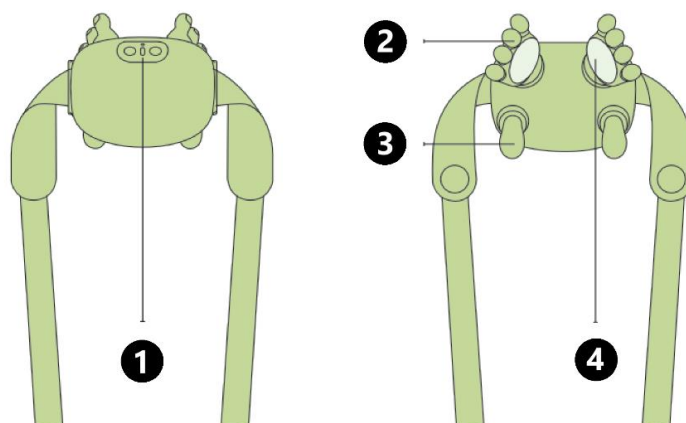

1. Juhtnupud
2. Ülemine massaažipea
3. Alumine massaažipea
4. Soojendusala

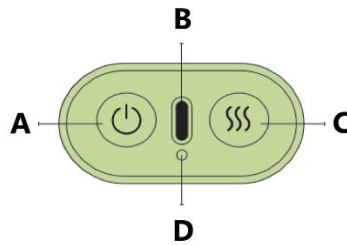

A. Toitenupp


Hoia all 3 sekundit, et seade sisse või välja lülitada. Lühike vajutus vahetab massaažirežiime.

B. Laadimisport

C. Soojenduse nupp

D. Indikaatorlamp

SEADME KASUTAMINE

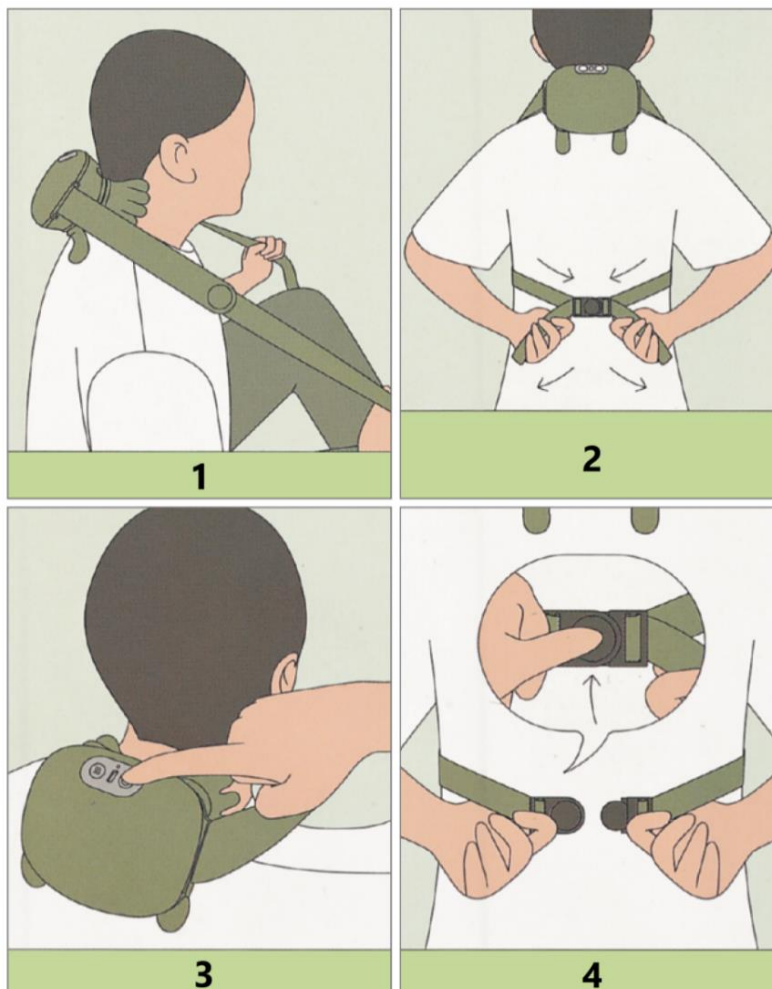

1. Asetage massager mugavalt oma õlgadele.
 2. Tõmmake pandlat selja taha ja kinnitage kindlalt. Reguleerige mõlemad rihmad võrdseks, et vältida ebamugavust ebaühtlase pinge tõttu.
 3. Hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et seade käivituks.
 4. Pärast kasutamist vajutage pandlat, et õlarihma vabastada, ja eemaldage seade.
-

NUPU FUNKTSIOONID

Sisse-/väljalülitus

Hoia toitenuppu 3 sekundit all, et seade sisse või välja lülitada.

Seadme sisselülitamisel:

- Süttib valge indikaatorlamp.
 - Seade lülitub vaikimisi Massaažirežiimile 1 ja Madalale kuumusele.
 - Vaikimisi massaaži kestus on 15 minutit. Pärast lõpetamist seade lülitub automaatselt välja ja valge lamp kustub.
-

Massaažirežiimide vahetamine

Seadme sisselülitamisel vajutage lühidalt toitenuppu massaažirežiimide vahetamiseks:

1. Massaažirežiim 1 – valge lamp vilgub üks kord
2. Massaažirežiim 2 – valge lamp vilgub kaks korda
3. Massaažirežiim 3 – valge lamp vilgub kolm korda

Kuumutuseade jääb vahetades massaažirežiimi muutumatuks.

Kuumuse taseme vahetamine

Seade on sisselülitatult vaikimisi Madala kuumuse režiimil.

Lühike vajutus soojenduse nupule vahetab kuumuse taset:

1. Madal kuumus – punane lamp vilgub üks kord
2. Kõrge kuumus – punane lamp vilgub kaks korda
3. Soojus välja – punane lamp kustub

Kuumuse taseme muutmise ei mõjuta massaažirežiimi.

Laadimisindikaator

- Valge lamp põleb: seade töötab.
 - Punane lamp vilgub: aku tase madal, palun laadige.
 - Punane lamp põleb pidevalt: laadimine käib.
 - Valge lamp põleb pidevalt: täielikult laetud.
-

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Hoiustamine

1. Hoidke toodet originaalpakkimises turvalises, kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas, kui seda ei kasutata.
2. Veenduge, et seade on välja lülitatud enne hoiustamist.
3. Ärge riputage toodet laadimiskaabli külge.
4. Vältige teravate esemete põhjustatud kriimustusi.
5. Hoidke otsese päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest.

Puhastamine

- Enne puhastamist eemaldage seade toiteallikast. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Pühkige pind pehme ja puhta lapiga.
- Raskele mustusele niisutage lappi veega, väänake korralikult ja pühkige pind.
- Kuivatage põhjalikult kuivaga, enne kui seadet uuesti kasutada.

Hooldus

1. Hoidke seadet eemal kõrgetest temperatuuridest ja niiskusest.
2. Kui seadet ei kasutata pikka aega, katke tolmu kattega (müüakse eraldi), et vältida tolmu kogunemist.

KASUTAMIS- JA HOIUSTAMISKESKKOND

1. Ärge kasutage kõrgel temperatuuril või kõrge niiskuse korral.
2. Hoidke kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
3. Vältige tolmu keskkonnas kasutamist.
4. Ärge kasutage kohtades, kus esineb vibratsiooni või tuleohtlikke aineid.
5. Kasutage ainult komplektis olevat laadimiskaablit.
6. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik enne puhastamist.

TAVALISED PROBLEEMID JA LAHENDUSED

Kui seade ei tööta korralikult, tehke järgmised kontrollid. Kui probleem püsib, eemaldage toide ja pöörduge kvalifitseeritud hooldustehniku poole. Ärge seadme osi ise avage.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ei lülitu sisse	Aku tühi	Laadige täielikult enne kasutamist
	Seade pole käivitatud	Hoidke toitenuppu 3 sekundit all
	Laadimine käib	Seadet ei saa kasutada laadimise ajal
Ei lae	Laadimiskaabel pole õigesti ühendatud	Veenduge, et kaabel ja port on kindlalt ühendatud
	Sisemine rike	Pöörduge järeleteeninduse poole
	Aku tühi	Laadige täielikult

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade peatub kasutamise ajal	Taimer lõppenud	Käivitage seade uuesti
Massaaži intensiivsus nõrk	Aku tühi	Laadige kohe
Pole kuumuse funktsiooni	Kuumus pole aktiveeritud	Vajutage soojenduse nuppu

OHUTUS

Oht

ÄRGE kasutage seda toodet koos järgmiste meditsiiniliste elektroonikaseadmetega, kuna see võib põhjustada rikkeid ja tõsist ohtu:

- Südame stimulaatorid või muud implanteeritavad meditsiinilised elektroonikaseadmed
- Elupääste seadmed nagu kunstliku südame-kopsumasinad
- Elektrokardiograafid ja sarnased jälgimisseadmed

Oluline ohutusteave

- Lugege juhend hoolikalt läbi enne kasutamist.
- Kui kasutamisel tekib ebamugavustunne, lõpetage kohe ja konsulteerige arstiga.
- Kui seade rikneb, lülitage see kohe välja, et vältida ülekuumenemist või lühist. Pöörduge klienditeeninduse poole.
- Ärge ühendage ega eemaldage laadimiskaablit märgade kätega.
- Ärge kandke kaelakeesid ega kettide ajal kasutades.
- Ärge kasutage lamades.
- Ärge kasutage tuleohtlikes või plahvatusohtlikes keskkondades (nt bensiinijaamad, tolmu- ja tööstuskojad).
- Ärge kasutage sõites või ohtlikke tegevusi tehes.
- Ärge kasutage magades või teadvuseta olles.
- Hoidke lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage vigastatud, paistes, põletikulistel, sinikatega või hiljuti opereeritud piirkondadel.
- Ärge kasutage, kui teil on südamehaigusi, ägedaid haigusi, pahaloomulisi kasvajaid, neuroloogilisi häireid, vererõhu kõrvalekaldeid, osteoporoosi, insuldi ajalugu või verejooksu kalduvust.
- Kasutajad, kes on üle 65-aastased, peaksid enne kasutamist arstiga nõu pidama ja rangelt jälgima kasutusaega.

Hoiatus

- See on isikliku hoolduse toode ja ei asenda meditsiinilist ravi.

- Ärge kasutage südame, pea, rinna, kõhu, suguelundite või muudel tundlikel aladel.
- Ärge kasutage samal alal kauem kui 10 minutit, et vältida madala temperatuuri põletusi või liigset stimulatsiooni.
- Kasutajad, kellel on vähenenud soojatundlikkus, peaksid olema ettevaatlikud, et vältida põletusi.
- Ärge lagundage, muutke, kastke vette ega visake tulle.
- Ärge jätke toodet kõrgetele temperatuuridele.
- Ärge kasutage korraga mitu seadet.
- Ärge kasutage välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.

Konsulteerige arstiga enne kasutamist, kui:

- Saate meditsiinilist ravi
- Teil on nakkushaigusi
- Teil on vererõhu kõrvalekaldeid
- Teil on diabeediga seotud vereringehäireid
- Teil on palavik (üle 38°C)
- Olete rase või sünnitusjärgses perioodis
- Teil on kognitiivseid häireid

AKU KÄITUS

Oht

- Laetav aku on ette nähtud ainult sellele seadmele.
- Ärge laadige akut pärast eemaldamist.
- Ärge visake tulle, torkige, pigistage ega võtke lahti.
- Ärge lühistage aku klemmid.
- Ärge jätke kõrgetele temperatuuridele.

Vale käitlemine võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või plahvatust.

Hoiatus

- Hoidke eemaldatud akud lastele kättesaamatus kohas.
- Kui aku on alla neelatud, pöörduge kohe arsti poole.
- Kui aku vedelik satub silma, loputage kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- Kui vedelik satub nahale, loputage hoolikalt veega ja pöörduge arsti poole, kui ärritus püsib.

Aku eemaldamine

1. Lülitage seade välja.
 2. Kasutage Phillipsi kruvikeerajat, et eemaldada korpuse kruvid.
 3. Ühendage või lõigake aku juhtmed lahti.
 4. Eemaldage ja utiliseerige aku nõuetekohaselt.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.