

FR: MASSORA – MANUEL D'UTILISATION

Masseur pour épaules et cou

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit : MASSORA

Modèle : FZ-831 / N7

Batterie : 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Entrée nominale : 5V

Puissance nominale : 10W


Normes applicables : GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Remarque : Veuillez vous référer au produit réel. Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Des mises à jour du produit peuvent survenir sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. **Massage à double paume**
Simule un massage réel avec les dix doigts, ciblant précisément les points d'acupression.
 2. **Matériau respectueux de la peau**
Fabriqué en silicone de qualité alimentaire, offrant un toucher doux et confortable, semblable à celui d'une main humaine.
 3. **Design léger et portable**
Ne pèse que 760 g, réduit la tension sur les épaules et facilite le transport.
 4. **Performance puissante**
Équipé d'un moteur sans balais silencieux pour un massage doux et confortable.
 5. **Contrôle simple par bouton unique**
Fonctionnement à un seul bouton pour une utilisation facile et un démarrage rapide.
 6. **Fonction de chaleur réglable**
Intègre une fonction de compresses chaudes avec niveaux de température ajustables pour une relaxation plus profonde et un confort amélioré.
-

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

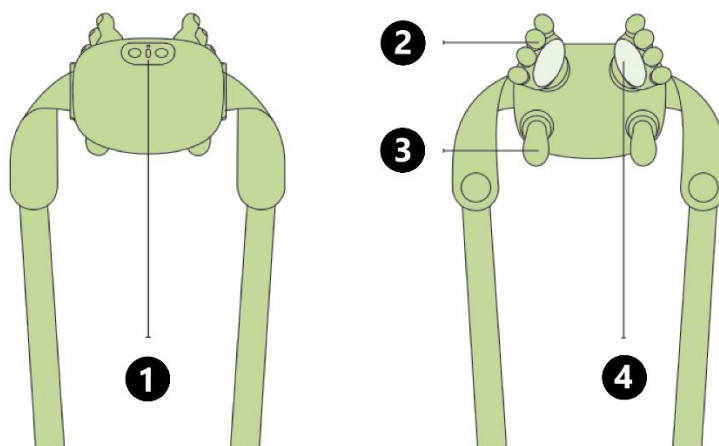

1. Boutons de contrôle
2. Tête de massage supérieure
3. Tête de massage inférieure
4. Zone de compresses chaudes

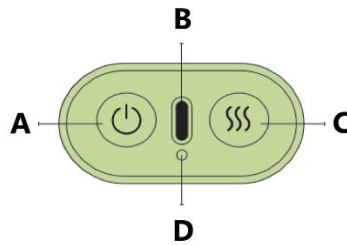

A. Bouton d'alimentation


Maintenir enfoncé 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyer brièvement pour changer le mode de massage.

B. Port de chargement

C. Bouton de compresses chaudes

D. Voyant lumineux

UTILISATION DU PRODUIT

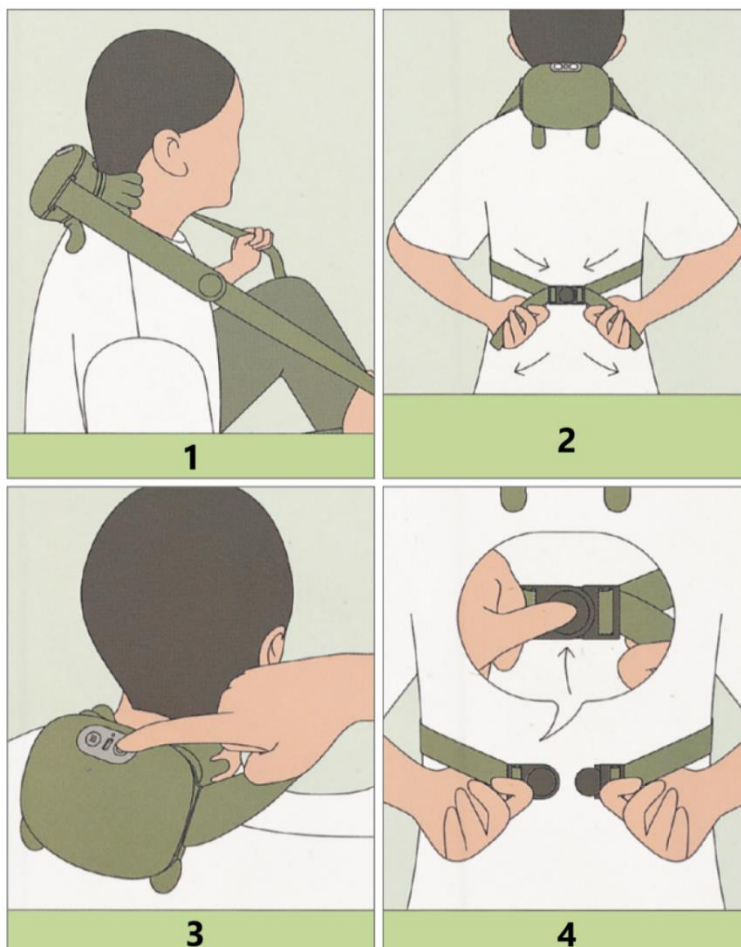

1. Placez le masseur confortablement sur vos épaules.
 2. Tirez la boucle dans le dos et fixez-la solidement. Ajustez les deux sangles à la même longueur pour éviter l'inconfort dû à une tension inégale.
 3. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil.
 4. Après utilisation, appuyez sur la boucle pour libérer la sangle et retirez l'appareil.
-

FONCTIONS DES BOUTONS

Allumer/Éteindre

Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Lorsque l'appareil est allumé :

- Le voyant blanc s'allume.
 - L'appareil démarre par défaut en Mode de massage 1 et Chaleur faible.
 - La durée de massage par défaut est de 15 minutes. À la fin, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant blanc s'éteint.
-

Changement de mode de massage

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode à l'autre :

1. Mode de massage 1 – voyant blanc clignote une fois
2. Mode de massage 2 – voyant blanc clignote deux fois
3. Mode de massage 3 – voyant blanc clignote trois fois

Le réglage de la chaleur reste inchangé lors du changement de mode de massage.

Changement du niveau de chaleur

Lorsque l'appareil est allumé, il démarre en mode Chaleur faible.

Appuyez brièvement sur le bouton de compresses chaudes pour changer le niveau de chaleur :

1. Faible – voyant rouge clignote une fois
2. Élevé – voyant rouge clignote deux fois
3. Éteint – voyant rouge éteint

Le changement du niveau de chaleur n'affecte pas le mode de massage.

Indicateur de charge

- Voyant blanc allumé : appareil en fonctionnement.
- Voyant rouge clignotant : batterie faible, veuillez charger.
- Voyant rouge fixe : en cours de charge.

- Voyant blanc fixe : batterie complètement chargée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Stockage

1. Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sûr, sec, frais et bien ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le stockage.
3. Ne suspendez pas le produit par le câble de charge.
4. Évitez de rayer la surface avec des objets tranchants.
5. Éloignez-le de la lumière directe du soleil et des températures élevées.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Essuyez la surface avec un chiffon doux et propre.
- Pour les saletés tenaces, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, essorez-le bien et essuyez la surface.
- Séchez complètement avec un chiffon sec avant de réutiliser l'appareil.

Entretien

1. Éloignez de la chaleur et de l'humidité.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, recouvrez-le d'une housse anti-poussière (vendue séparément) pour éviter l'accumulation de poussière.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

1. Ne pas utiliser dans des environnements à haute température ou forte humidité.
2. Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Éviter une utilisation dans des environnements poussiéreux ou humides.
4. Ne pas utiliser dans des zones sujettes aux vibrations ou inflammables.
5. Utiliser uniquement le câble de charge fourni.
6. Éteindre et débrancher avant de nettoyer.

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, effectuez les vérifications ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez-le et contactez le service technique autorisé. Ne démontez pas le produit vous-même.

Problème	Cause possible	Solution
Ne s'allume pas	Batterie faible	Charger complètement avant utilisation
	Appareil non démarré	Maintenir le bouton d'alimentation 3 secondes

Problème	Cause possible	Solution
	En charge	Ne peut pas être utilisé pendant la charge
Ne charge pas	Câble mal connecté	Vérifier que le câble et le port sont bien connectés
	Défaillance interne	Contactez le service après-vente
S'arrête pendant l'utilisation	Batterie faible	Charger complètement
	Minuterie terminée	Redémarrer l'appareil
Intensité du massage faible	Batterie faible	Charger immédiatement
Fonction chaleur ne fonctionne pas	Chaleur non activée	Appuyer sur le bouton de compresses chaudes

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Danger

Ne pas utiliser ce produit avec les dispositifs médicaux électroniques suivants, car cela peut provoquer des dysfonctionnements ou des risques graves :

- Pacemaker ou autres dispositifs médicaux implantables
- Appareils de maintien en vie, tels que machines cœur-poumons artificielles
- Électrocardiographes et dispositifs de surveillance similaires

Informations importantes de sécurité

- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
- En cas d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement pour éviter la surchauffe ou le court-circuit. Contactez le service client.
- Ne branchez ni ne débranchez le câble avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser avec des colliers ou bijoux autour du cou.
- Ne pas utiliser en position allongée.
- Ne pas utiliser dans des environnements inflammables ou explosifs (ex. : stations-service, ateliers poussiéreux).
- Ne pas utiliser en conduisant ou lors d'activités dangereuses.
- Ne pas utiliser en dormant ou inconscient.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des zones blessées, enflées, inflammées, bleues ou récemment opérées.
- Ne pas utiliser si vous avez des maladies cardiaques, maladies aiguës, tumeurs malignes, troubles neurologiques, tension artérielle anormale, ostéoporose, antécédents d'AVC ou tendance aux saignements.
- Les utilisateurs de plus de 65 ans doivent consulter un médecin avant utilisation et contrôler strictement le temps d'utilisation.

Avertissement

- Ceci est un produit de soins personnels et ne remplace pas un traitement médical.

- Ne pas utiliser sur le cœur, la tête, la poitrine, l'abdomen, les parties génitales ou autres zones sensibles.
- Ne pas utiliser plus de 10 minutes sur la même zone corporelle pour éviter les brûlures par basse température ou surstimulation.
- Les utilisateurs avec une sensibilité thermique réduite doivent faire attention pour éviter les brûlures.
- Ne pas démonter, modifier, immerger dans l'eau ou jeter au feu.
- Ne pas exposer à des températures élevées.
- Ne pas utiliser plusieurs appareils simultanément.
- Ne pas utiliser avec minuterie externe ou système de contrôle à distance.

Consultez un médecin avant utilisation si :

- Vous suivez un traitement médical
- Vous avez des maladies infectieuses
- Vous avez une tension artérielle anormale
- Problèmes circulatoires liés au diabète
- Fièvre supérieure à 38 °C
- Vous êtes enceinte ou en post-partum
- Vous avez des troubles cognitifs

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Danger

- La batterie rechargeable est dédiée exclusivement à ce produit.
- Ne pas recharger la batterie après l'avoir retirée.
- Ne pas jeter au feu, percer, écraser ou démonter.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne pas exposer à des températures élevées.

Une manipulation incorrecte peut provoquer surchauffe, incendie ou explosion.

Avertissement

- Garder les batteries retirées hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, rincer à l'eau propre et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Retrait de la batterie

1. Éteindre l'appareil.
 2. Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les vis du boîtier.
 3. Déconnecter ou couper les fils de la batterie.
 4. Retirer et éliminer la batterie correctement selon la réglementation locale.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.