

GR: MASSORA – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μασέρ ώμων και αυχένα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: MASSORA

Μοντέλο: FZ-831 / N7

Μπαταρία: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Ονομαστική είσοδος: 5V

Ονομαστική ισχύς: 10W


Εφαρμοσμένα πρότυπα: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Σημείωση: Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Οι ενημερώσεις του προϊόντος μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1. Διπλό ζύμωμα παλάμης**
Μιμείται πραγματικό μασάζ με δέκα δάχτυλα για να στοχεύει με ακρίβεια τα σημεία ακουσπρέσιον.
- 2. Φιλικό προς το δέρμα υλικό**
Κατασκευασμένο από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, προσφέρει απαλό και άνετο άγγιγμα, παρόμοιο με το ανθρώπινο χέρι.
- 3. Ελαφρύ και φορητό σχέδιο**
Ζυγίζει μόνο 760 g, μειώνει την καταπόνηση των ώμων και είναι εύκολο στη μεταφορά.
- 4. Ισχυρή απόδοση**
Εξοπλισμένο με αθόρυβο κινητήρα χωρίς ψήκτρες για ομαλή και άνετη λειτουργία μασάζ.
- 5. Απλός έλεγχος με κουμπί**
Λειτουργία με ένα κουμπί για εύκολη χρήση και γρήγορη εκκίνηση.
- 6. Ρυθμιζόμενη λειτουργία θερμότητας**
Διαθέτει λειτουργία θερμού κομπρέσου με ρυθμιζόμενα επίπεδα θερμοκρασίας για βαθύτερη χαλάρωση και μεγαλύτερη άνεση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

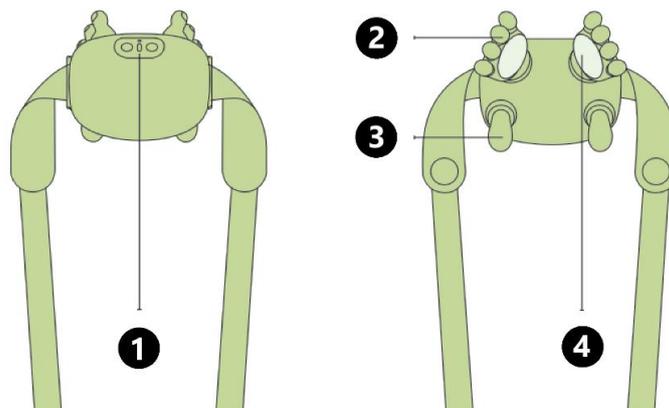

1. Κουμπιά ελέγχου
2. Άνω κεφαλή μασάζ
3. Κάτω κεφαλή μασάζ
4. Περιοχή θερμού κομπρέσου

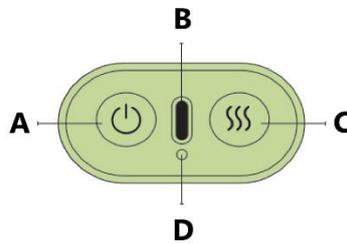

A. Κουμπί λειτουργίας


Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σύντομο πάτημα για εναλλαγή λειτουργιών μασάζ.

B. Θύρα φόρτισης

C. Κουμπί θερμού κομπρέσου

D. Λυχνία ένδειξης

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

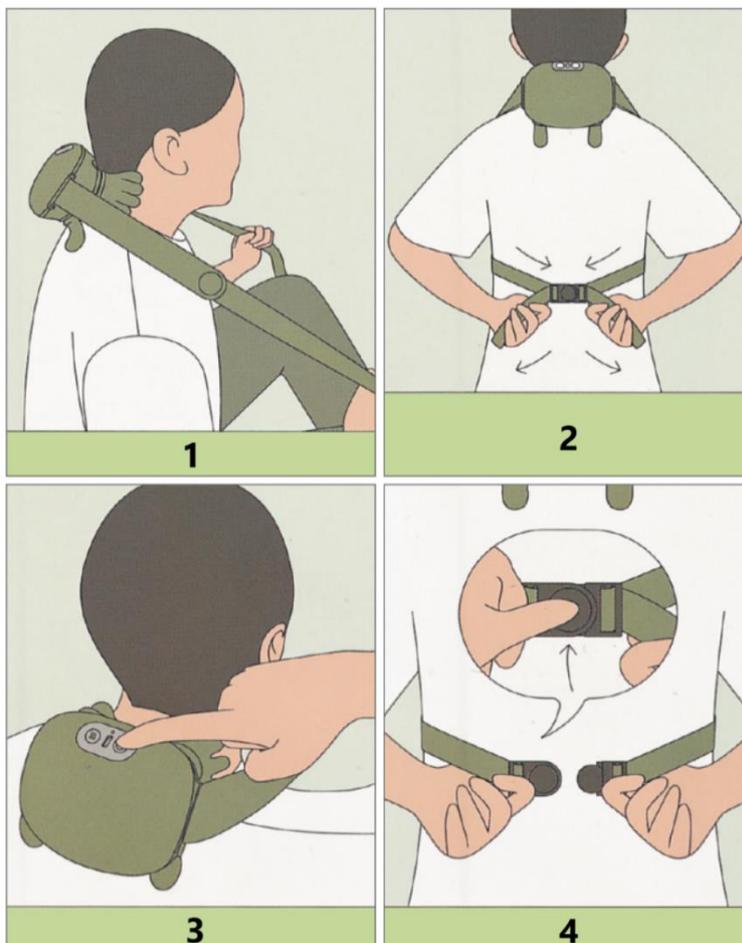

1. Τοποθετήστε το μασέρ άνετα στους ώμους σας.
 2. Τραβήξτε την αγκράφα πίσω από την πλάτη και ασφαλίστε καλά. Ρυθμίστε και τα δύο λουριά στο ίδιο μήκος για να αποφύγετε δυσφορία από άνιση τάση.
 3. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 4. Μετά τη χρήση, πατήστε την αγκράφα για να απελευθερώσετε το λουρί ώμου και αφαιρέστε τη συσκευή.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

Κατά την ενεργοποίηση:

- Η λευκή λυχνία ένδειξης ανάβει.
 - Η συσκευή ξεκινά προεπιλεγμένα σε Λειτουργία Μασάζ 1 και Χαμηλή Θερμοκρασία.
 - Η προεπιλεγμένη διάρκεια μασάζ είναι 15 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και η λευκή λυχνία σβήνει.
-

Εναλλαγή λειτουργιών μασάζ

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να κυκλώσετε τις λειτουργίες μασάζ:

1. Λειτουργία Μασάζ 1 – Η λευκή λυχνία αναβοσβήνει μία φορά
2. Λειτουργία Μασάζ 2 – Η λευκή λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές
3. Λειτουργία Μασάζ 3 – Η λευκή λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές

Η ρύθμιση θερμότητας παραμένει αμετάβλητη κατά την εναλλαγή λειτουργιών μασάζ.

Εναλλαγή επιπέδου θερμότητας

Κατά την ενεργοποίηση, η συσκευή ξεκινά σε Λειτουργία Χαμηλής Θερμοκρασίας.

Σύντομο πάτημα του κουμπιού θερμού κομπρέσου για αλλαγή επιπέδου θερμότητας:

1. Χαμηλή θερμοκρασία – Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει μία φορά
2. Υψηλή θερμοκρασία – Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές
3. Θερμότητα απενεργοποιημένη – Η κόκκινη λυχνία σβήνει

Η αλλαγή του επιπέδου θερμότητας δεν επηρεάζει τη λειτουργία μασάζ.

Ένδειξη φόρτισης

- Λευκή λυχνία αναμμένη: Η συσκευή λειτουργεί.

- Κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει: Χαμηλή μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε.
- Κόκκινη λυχνία σταθερή: Φόρτιση σε εξέλιξη.
- Λευκή λυχνία σταθερή: Πλήρως φορτισμένη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποθήκευση

1. Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε ασφαλές, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποθήκευση.
3. Μην κρεμάτε το προϊόν από το καλώδιο φόρτισης.
4. Αποφύγετε το γρατζούνισμα της επιφάνειας με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Διατηρήστε το μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Σκουπίστε την επιφάνεια με μαλακό, καθαρό πανί.
- Για επίμονο βρωμιά, βρέξτε το πανί με νερό, στύψτε καλά και σκουπίστε την επιφάνεια.
- Στεγνώστε πλήρως με στεγνό πανί πριν την επαναχρησιμοποίηση.

Συντήρηση

1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμότητα και υγρασία.
2. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, καλύψτε το με προστατευτικό κάλυμμα σκόνης (αγοράζεται ξεχωριστά) για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή υγρασία.
2. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
3. Αποφύγετε τη χρήση σε σκονισμένο ή υγρό περιβάλλον.
4. Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές με κραδασμούς ή εύφλεκτα υλικά.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται.
6. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε πριν τον καθαρισμό.

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, πραγματοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνοι σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν ανάβει	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε πλήρως πριν τη χρήση

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί	Πατήστε και κρατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτ.
	Φόρτιση σε εξέλιξη	Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση
Δεν φορτίζει	Καλώδιο φόρτισης μη σωστά συνδεδεμένο	Ελέγξτε ότι το καλώδιο και η θύρα είναι σφικτά συνδεδεμένα
	Εσωτερικό σφάλμα	Επικοινωνήστε με το τμήμα after-sales
Συσκευή σταματά κατά τη χρήση	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε πλήρως
	Ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώθηκε	Επανεκκινήστε τη συσκευή
Αδύναμη ένταση μασάζ	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε άμεσα
Δεν λειτουργεί θερμότητα	Η θερμότητα δεν ενεργοποιήθηκε	Πατήστε το κουμπί θερμού κομπρέσου

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κίνδυνος

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μαζί με τα ακόλουθα ιατρικά ηλεκτρονικά:

- Βηματοδότες ή άλλες εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές
- Συσκευές υποστήριξης ζωής όπως τεχνητή καρδιά-πνεύμονα
- Ηλεκτροκαρδιογράφους και παρόμοιες συσκευές παρακολούθησης

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, απενεργοποιήστε άμεσα για να αποφύγετε υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε φορώντας κολιέ.
- Μην χρησιμοποιείτε ξαπλωμένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές περιοχές (π.χ. βενζινάδικα, σκονισμένα εργαστήρια).
- Μην χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση ή επικίνδυνες δραστηριότητες.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τον ύπνο ή όταν είστε αναίσθητοι.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά και βρέφη.
- Μην χρησιμοποιείτε σε τραυματισμένες, πρησμένες, φλεγμονώδεις, με μώλωπες ή πρόσφατα χειρουργημένες περιοχές.

- Μην χρησιμοποιείτε αν έχετε καρδιακές παθήσεις, οξείες ασθένειες, κακοήθεις όγκους, νευρολογικές διαταραχές, ανωμαλίες αρτηριακής πίεσης, οστεοπόρωση, ιστορικό εγκεφαλικού ή τάση για αιμορραγία.
 - Χρήστες άνω των 65 ετών πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν από τη χρήση και να ελέγχουν αυστηρά τον χρόνο χρήσης.
-

Προειδοποίηση

- Πρόκειται για προϊόν προσωπικής φροντίδας και δεν αντικαθιστά ιατρική θεραπεία.
- Μην χρησιμοποιείτε στην καρδιά, κεφάλι, θώρακα, κοιλιά, γεννητικά όργανα ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
- Μην χρησιμοποιείτε στην ίδια περιοχή πάνω από 10 λεπτά για να αποφύγετε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας ή υπερδιέγερση.
- Οι χρήστες με μειωμένη θερμική αίσθηση να είναι προσεκτικοί για αποφυγή εγκαυμάτων.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, βυθίζετε στο νερό ή πετάτε στη φωτιά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.
- Μην χρησιμοποιείτε με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.

Συμβουλευτείτε γιατρό πριν τη χρήση εάν:

- Υποβάλλεστε σε ιατρική θεραπεία
 - Έχετε λοιμώδεις ασθένειες
 - Έχετε ανώμαλη αρτηριακή πίεση
 - Έχετε προβλήματα κυκλοφορίας σχετιζόμενα με διαβήτη
 - Έχετε πυρετό (πάνω από 38°C)
 - Είστε έγκυος ή σε μεταγεννητική περίοδο
 - Έχετε γνωστικές διαταραχές
-

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κίνδυνος

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία προορίζεται μόνο για αυτό το προϊόν.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία μετά την αφαίρεσή της.
- Μην πετάτε στη φωτιά, μην τρυπάτε, μην συνθλίβετε ή αποσυναρμολογείτε.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Προειδοποίηση

- Κρατήστε τις αφαιρεθείσες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Εάν καταποθεί η μπαταρία, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.
- Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

- Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά και αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η ερεθισμός συνεχίζεται.

Αφαίρεση μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε κατασαβίδι Phillips για να αφαιρέσετε τις βίδες του περιβλήματος.
3. Αποσυνδέστε ή κόψτε τα καλώδια της μπαταρίας.
4. Αφαιρέστε και απορρίψτε την μπαταρία σωστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.