

HR: MASSORA – PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Masažer za ramena i vrat

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Baterija: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Nazivni ulaz: 5V

Nazivna snaga: 10W


Primjenjivi standardi: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Napomena: Molimo da se oslonite na stvarni proizvod. Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Proizvod se može ažurirati bez prethodne najave.


ZNAČAJKE PROIZVODA

- Dvojnim pritiskanjem dlana**
Simulira stvarnu masažu deset prstiju za precizno ciljanje akupresurnih točaka.
 - Materijal prijateljski prema koži**
Izrađen od silikona za hranu za mekan i ugodan dodir, sličan ljudskoj ruci.
 - Lagani i prijenosni dizajn**
Težina samo 760 g, smanjuje napor ramena i omogućuje jednostavno nošenje.
 - Snažne performanse**
Opremljen bežumnim bezčetkasti motorom za glatko i udobno izvođenje masaže.
 - Jednostavno upravljanje gumbom**
Jedan gumb za jednostavno korištenje i brzo pokretanje.
 - Podesiva funkcija topline**
Sadrži funkciju toplog obloga s podesivim razinama temperature za dublje opuštanje i veći komfor.
-

PREGLED PROIZVODA

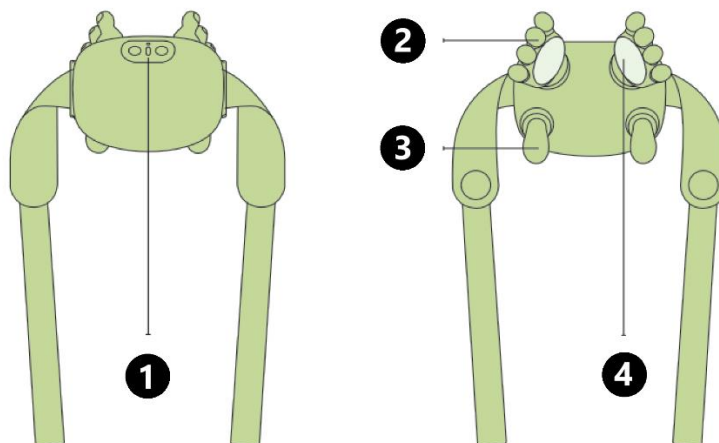

1. Kontrolni gumbi
2. Gornja masažna glava
3. Donja masažna glava
4. Područje toplog obloga

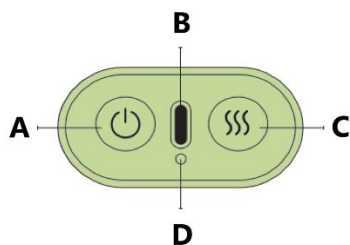

A. Gumb za uključivanje/isključivanje


Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja. Kratki pritisak za promjenu masažnih načina.

B. Priključak za punjenje

C. Gumb za topli oblog

D. Indikatorska lampica

UPOTREBA PROIZVODA

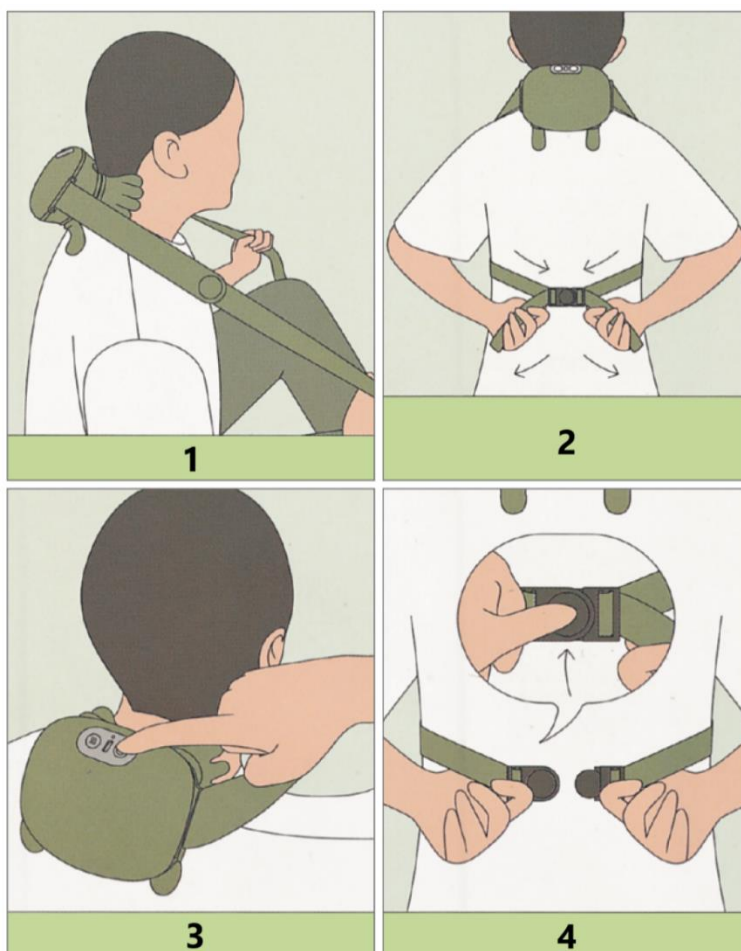

1. Masažer udobno postavite na ramena.
 2. Povucite kopču iza leđa i čvrsto je pričvrstite. Prilagodite oba remena na istu duljinu kako biste izbjegli neugodu zbog nejednake napetosti.
 3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde kako biste pokrenuli uređaj.
 4. Nakon upotrebe pritisnite kopču kako biste oslobodili remen i uklonili uređaj.
-

FUNKCIJE GUMBOVA

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde da uključite ili isključite uređaj.

Kada je uređaj uključen:

- Bijela indikatorska lampica svijetli.
 - Uređaj se automatski postavlja na Masažni način 1 i Nisku toplinu.
 - Privremena duljina masaže je 15 minuta. Nakon završetka uređaj se automatski isključuje i bijela lampica gasi.
-

Promjena masažnih načina

Kada je uređaj uključen, kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste prešli kroz masažne načine:

1. Masažni način 1 – Bijela lampica trepće jednom
2. Masažni način 2 – Bijela lampica trepće dvaput
3. Masažni način 3 – Bijela lampica trepće triput

Postavka topline ostaje nepromijenjena pri promjeni masažnog načina.

Promjena razine topline

Kada je uređaj uključen, automatski se postavlja na Nisku toplinu.

Kratko pritisnite gumb za topli oblog za promjenu razine topline:

1. Niska toplina – Crvena lampica trepće jednom
2. Visoka toplina – Crvena lampica trepće dvaput
3. Toplina isključena – Crvena lampica se gasi

Promjena razine topline ne utječe na masažni način.

Indikator punjenja

- Bijela lampica svijetli: Uređaj radi.
 - Crvena lampica trepće: Niska baterija, molimo napunite.
 - Crvena lampica stalno svijetli: Punjenje u tijeku.
 - Bijela lampica stalno svijetli: Potpuno napunjeno.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Skladištenje

1. Proizvod pohranite u originalnoj ambalaži na sigurnom, suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu kada se ne koristi.
2. Prije pohrane osigurajte da je uređaj isključen.
3. Ne vješajte proizvod na kabel za punjenje.
4. Izbjegavajte ogrebotine oštrim predmetima.
5. Držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura.

Čišćenje

- Prije čišćenja isključite napajanje. Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Površinu obrišite čistom, mekanom krpom.
- Za tvrdokornu prljavštinu navlažite krpu vodom, dobro je ocijedite i obrišite površinu.
- Potpuno osušite suhom krpom prije ponovne upotrebe.

Održavanje

1. Držite dalje od visokih temperatura i vlage.
2. Ako se uređaj dugo ne koristi, pokrijte ga zaštitnim pokrovom protiv prašine (kupuje se zasebno) kako biste spriječili nakupljanje prašine.

OKOLIŠ ZA RAD I SKLADIŠTENJE

1. Ne koristite u okruženju s visokim temperaturama ili vlagom.
2. Pohranite na suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
3. Izbjegavajte upotrebu u prašnjavim ili vlažnim okruženjima.
4. Ne koristite na mjestima sklonim vibracijama ili zapaljivim materijalima.
5. Koristite samo priloženi kabel za punjenje.
6. Prije čišćenja isključite i odspojite uređaj.

ČESTI PROBLEMI I RJEŠENJA

Ako uređaj ne radi ispravno, izvršite sljedeće provjere. Ako problem ostane, isključite napajanje i kontaktirajte stručno osoblje. Ne rastavljajte uređaj sami.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje	Niska baterija	Potpuno napunite prije upotrebe
	Uređaj nije pokrenut	Pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde
	Punjenje	Uređaj se ne može koristiti tijekom punjenja
Uređaj se ne puni	Kabel za punjenje nije pravilno priključen	Provjerite kabel i priključak
	Unutarnja pogreška	Kontaktirajte servis
	Niska baterija	Potpuno napunite

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se zaustavi tijekom korištenja	Timer je završen	Ponovno pokrenite uređaj
Slaba intenzivnost masaže	Niska baterija	Odmah napunite
Nema funkcije topline	Toplina nije aktivirana	Pritisnite gumb za topli oblog

SIGURNOSNE MJERE

Opasnost

Ne koristite ovaj proizvod zajedno sa sljedećim medicinskim elektroničkim uređajima jer može doći do kvara i ozbiljne opasnosti:

- Pacemakere ili druge implantabilne medicinske elektroničke uređaje
- Uređaje za održavanje života, npr. umjetno srce-pluća
- EKG i slične uređaje za nadzor

Važne sigurnosne informacije

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe.
- Ako osjetite nelagodu tijekom upotrebe, odmah prestanite i posavjetujte se s liječnikom.
- Ako uređaj ne radi ispravno, odmah isključite napajanje kako biste spriječili pregrijavanje ili kratki spoj. Kontaktirajte službu za korisnike za pomoć.
- Ne priključujte ili odspajajte kabel za punjenje mokrim rukama.
- Ne koristite dok nosite ogrlice.
- Ne koristite dok ležite ravno.
- Ne koristite u zapaljivim ili eksplozivnim okruženjima (npr. benzinske crpke, prašnjave radionice).
- Ne koristite tijekom vožnje ili opasnih aktivnosti.
- Ne koristite dok spavate ili ste bez svijesti.
- Držite izvan dohvata dojenčadi i djece.
- Ne koristite na ozlijeđenim, otečenim, upaljenim, modricama ili nedavno operiranim dijelovima tijela.
- Ne koristite ako imate bolesti srca, akutne bolesti, zloćudne tumore, neurološke poremećaje, abnormalni krvni tlak, osteoporozu, povijest moždanog udara ili sklonost krvarenju.
- Stariji korisnici preko 65 godina trebaju se posavjetovati s liječnikom prije upotrebe i strogo kontrolirati vrijeme korištenja.

Upozorenje

- Ovo je proizvod za osobnu njegu i ne zamjenjuje medicinski tretman.
- Ne koristite na srcu, glavi, prsima, trbuhu, genitalijama ili drugim osjetljivim područjima.
- Ne koristite više od 10 minuta na istom dijelu tijela kako biste izbjegli opekline od niske temperature ili pretjeranu stimulaciju.
- Korisnici s smanjenom osjetljivošću na toplinu trebaju biti oprezni kako bi spriječili opekline.
- Ne rastavljajte, ne modificirajte, ne uranjajte u vodu i ne bacajte u vatru.
- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama.

- Ne koristite više uređaja istovremeno.
- Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog tajmera ili daljinskog upravljanja.

Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ako:

- Pimate medicinski tretman
- Imate zarazne bolesti
- Imate abnormalni krvni tlak
- Imate problema s cirkulacijom zbog dijabetesa
- Imate povišenu temperaturu (iznad 38°C)
- Ste trudni ili u postporođajnom periodu
- Imate kognitivne smetnje

ODLAGANJE BATERIJE

Opasnost

- Punjenje baterije je namijenjeno isključivo ovom proizvodu.
- Ne punitite bateriju nakon uklanjanja.
- Ne bacajte u vatru, ne probijajte, ne zdrobite niti rastavljajte.
- Ne kratkostičite baterijske priključke.
- Ne izlažite visokim temperaturama.

Nepravilno rukovanje može uzrokovati pregrijavanje, požar ili eksploziju.

Upozorenje

- Uklonjene baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se proguta, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Ako tekućina iz baterije dođe u oči, odmah isperite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Ako tekućina dođe na kožu, temeljito isperite vodom i potražite liječnički savjet ako iritacija ostane.

Uklanjanje baterije

1. Isključite uređaj.
2. Koristite križni odvijač za uklanjanje vijaka kućišta.
3. Odspojite ili prerežite baterijske žice.
4. Uklonite bateriju i pravilno je odložite.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.