

HU: MASSORA – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Váll- és nyakmasszírozó

TERMÉKISMERTETÉS

Termék neve: MASSORA

Modell: FZ-831 / N7

Akkumulátor: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Névleges bemenet: 5 V

Névleges teljesítmény: 10 W


Alkalmazott szabványok: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Megjegyzés: Kérjük, a tényleges terméket vegye alapul. A kézikönyvben található ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. A termék előzetes értesítés nélkül módosulhat.


TERMÉKJELLEMZŐK

- 1. Kettős tenyergyűrő masszázs**
Valós kézi masszázst szimulál tízujjas gyűrő mozdulatokkal, amelyek pontosan célozzák az akupresszúra pontokat.
- 2. Bőrbarát anyag**
Élelmiszeripari minőségű szilikonból készült, amely puha és kényelmes tapintású, az emberi kéz érzetéhez hasonló.
- 3. Könnyű és hordozható kialakítás**
Mindössze 760 g tömegű, csökkenti a váll terhelését, és könnyen szállítható.
- 4. Nagy teljesítmény**
Szénkefe nélküli, csendes motorral felszerelt a sima és kényelmes masszázsszelmény érdekében.
- 5. Egyszerű gombvezérlés**
Egygombos működtetés az egyszerű használat és a gyors indítás érdekében.
- 6. Állítható melegítő funkció**
Melegítő (meleg borogatás) funkcióval rendelkezik, állítható hőmérsékleti szintekkel a mélyebb relaxáció és fokozott kényelem érdekében.

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

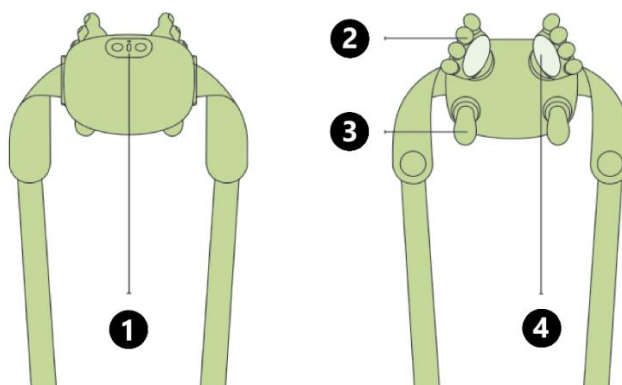

1. Vezérlőgombok
2. Felső masszázsfaj
3. Alsó masszázsfaj
4. Melegítő felület

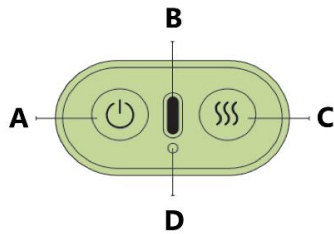

A. Bekapcsoló gomb


Tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Rövid megnyomással válthat a masszázsprogramok között.

B. Töltőcsatlakozó

C. Melegítő gomb

D. Jelzőfény

A TERMÉK HASZNÁLATA

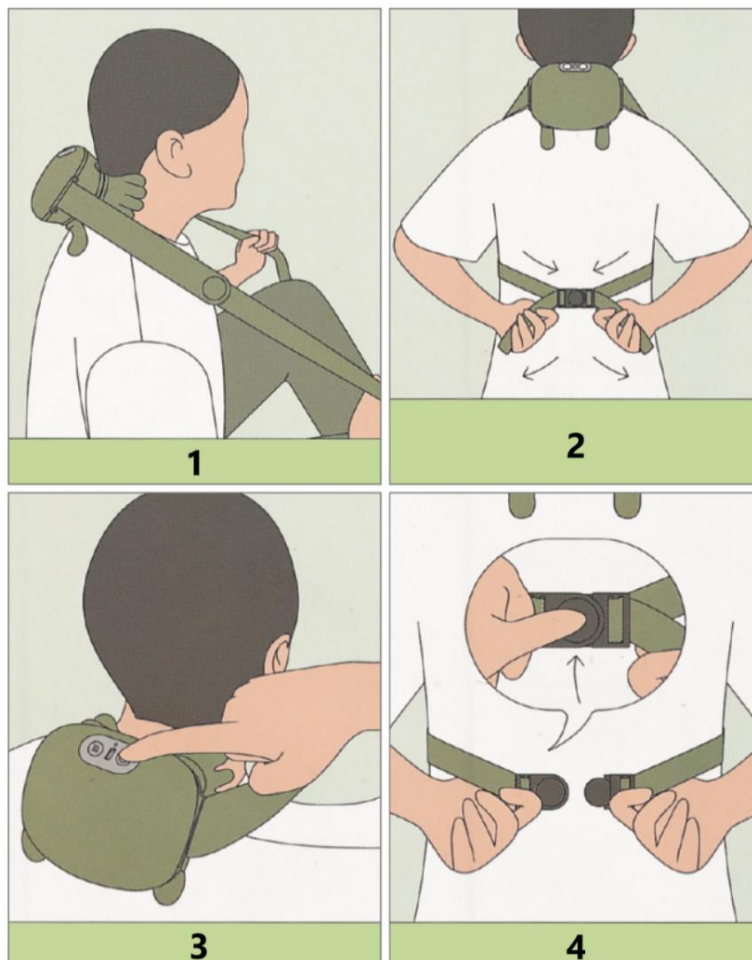

1. Helyezze a masszírozót kényelmesen a vállára.
 2. Húzza a csatot a háta mögött, majd rögzítse biztonságosan. Állítsa be a két pánt hosszát egyformára, hogy elkerülje az egyenetlen feszítés okozta kellemetlenséget.
 3. A készülék indításához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.
 4. Használat után oldja ki a csatot, majd vegye le a készüléket.
-

GOMBOK FUNKCIÓI

Be- és kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Bekapcsolt állapotban:

- A fehér jelzőfény világít.
 - A készülék alapértelmezés szerint az 1. masszázsprogrammal és alacsony hőfokkal indul.
 - Az alapértelmezett masszázsidő 15 perc. A program befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol, és a fehér jelzőfény kialszik.
-

Masszázsprogram váltása

Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a masszázsprogramok közötti váltáshoz:

1. masszázsprogram – A fehér fény egyszer villan
2. masszázsprogram – A fehér fény kétszer villan
3. masszázsprogram – A fehér fény háromszor villan

A hőfok beállítása programváltáskor nem változik.

Hőfokszint váltása

Bekapcsoláskor a készülék alapértelmezés szerint alacsony hőfokkal indul.

Röviden nyomja meg a melegítő gombot a hőfokszintek közötti váltáshoz:

1. Alacsony hőfok – A piros fény egyszer villan
2. Magas hőfok – A piros fény kétszer villan
3. Fűtés kikapcsolva – A piros fény kialszik

A hőfok váltása nem befolyásolja a masszázsprogramot.

Töltésjelző

- Fehér fény világít: A készülék működik.
 - Piros fény villog: Alacsony akkumulátorszint, kérjük, töltsse fel.
 - Piros fény folyamatosan világít: Töltés folyamatban.
 - Fehér fény folyamatosan világít: Teljesen feltöltve.
-

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolás

1. Használaton kívül tárolja a terméket eredeti csomagolásában, biztonságos, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.
2. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
3. Ne akassza fel a terméket a töltőkábelnél fogva.
4. Kerülje a felület éles tárgyakkal történő megkarcolását.
5. Tartsa távol közvetlen napfénytől és magas hőmérséklettől.

Tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a töltőkábelt. Ne érintse a csatlakozót nedves kézzel.
- Törölje le a felületet puha, tiszta ruhával.
- Erős szennyeződés esetén nedvesítse be a ruhát vízzel, alaposan csavarja ki, majd törölje át a felületet.
- Újbóli használat előtt teljesen szárítsa meg száraz ruhával.

Karbantartás

1. Tartsa távol magas hőtől és páratartalomtól.
2. Hosszabb ideig tartó használaton kívül takarja le porvédő huzattal (külön megvásárolható) a por lerakódásának megelőzése érdekében.

MŰKÖDÉSI ÉS TÁROLÁSI KÖRNYEZET

1. Ne használja magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
2. Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.
3. Kerülje a poros vagy nedves környezetben történő használatot.
4. Ne használja rezgésnek kitett vagy gyúlékony területen.
5. Csak a mellékelt töltőkábelt használja.
6. Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a töltőkábelt.

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Meghibásodás esetén végezze el az alábbi ellenőrzéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a készüléket, és forduljon szakszervizhez. Ne szerelje szét a készüléket saját kezűleg.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Alacsony akkumulátor	Töltse fel teljesen a használat előtt
	Készülék nincs indítva	Nyomja meg és tartsa lenyomva a táp/gombot 3 másodpercig
	Töltés alatt	A készülék nem használható töltés közben

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tölt	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Győződjön meg róla, hogy a kábel és a port biztosan csatlakozik
	Belső hiba	Forduljon a szervizhez
A készülék használat közben leáll	Alacsony akkumulátor	Töltse fel teljesen
	Időzítő lejárt	Indítsa újra a készüléket
Gyenge masszázs intenzitás	Alacsony akkumulátor	Töltse fel azonnal
Nincs hőfunkció	A hő nincs aktiválva	Nyomja meg a melegítő gombot

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Veszély

NE használja a terméket az alábbi orvosi elektronikai eszközökkel együtt, mivel azok meghibásodását és súlyos kockázatot okozhat:

- Szívritmus-szabályozó vagy más beültetett orvosi elektronikai eszköz
- Életfenntartó berendezések, például mesterséges szív-tüdő gép
- Elektrokardiográf és hasonló megfigyelő eszközök

Fontos biztonsági tudnivalók

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
- Ha használat közben kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba, és forduljon orvoshoz.
- Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket a túlmelegedés vagy rövidzárlat megelőzése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőkábelt nedves kézzel.
- Ne használja nyaklánc viselése közben.
- Ne használja fekvő helyzetben.
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben (pl. benzinkúton, poros műhelyben).
- Ne használja járművezetés vagy veszélyes tevékenység közben.
- Ne használja alvás vagy eszméletlen állapot közben.
- Tartsa csecsemők és gyermekek elől elzárva.
- Ne használja sérült, duzzadt, gyulladt, zúzódott vagy frissen műtött területen.
- Ne használja szívbetegség, akut betegség, rosszindulatú daganat, neurológiai rendellenesség, vérnyomásprobléma, csonttritkulás, korábbi stroke vagy vérzékenység esetén.

- A 65 év feletti felhasználók használat előtt konzultáljanak orvossal, és szigorúan tartsák be a használati időt.
-

Figyelmeztetés

- Ez egy személyes ápolási termék, nem helyettesíti az orvosi kezelést.
- Ne használja a szív, a fej, a mellkas, a has, a nemi szervek vagy más érzékeny területeken.
- Ugyanazon testrészen ne használja 10 percnél tovább az alacsony hőmérsékletű égési sérülések vagy túlzott ingerlés elkerülése érdekében.
- A csökkent hőérzékeléssel rendelkező felhasználók fokozott óvatossággal használják az égési sérülések megelőzése érdekében.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne merítse vízbe, és ne dobja tűzbe.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne használjon egyszerre több készüléket.
- Ne működtesse külső időzítővel vagy távvezérlő rendszerrel.

Használat előtt konzultáljon orvossal, ha:

- orvosi kezelés alatt áll
 - fertőző betegségben szenved
 - rendellenes vérnyomása van
 - cukorbetegség okozta keringési problémái vannak
 - lázas (38 °C felett)
 - terhes vagy szülés utáni időszakban van
 - kognitív károsodásban szenved
-

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

Veszély

- A tölthető akkumulátor kizárólag ehhez a termékhez készült.
- Az eltávolítás után ne töltsé újra az akkumulátort.
- Ne dobja tűzbe, ne szúrja át, ne zúzza össze, és ne szerelje szét.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

A nem megfelelő kezelés túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Figyelmeztetés

- Az eltávolított akkumulátort tartsa gyermekektől távol.
- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorfolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha a folyadék bőrrel érintkezik, alaposan öblítse le vízzel, és irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Csillagfejű csavarhúzóval távolítsa el a burkolat csavarjait.
3. Válassza le vagy vágja el az akkumulátor vezetékeit.
4. Távolítsa el, majd a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az akkumulátort.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.