

LT: MASSORA – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pečių ir kaklo masažuoklis

PRODUKTO PRISTATYMAS

Produkto pavadinimas: MASSORA

Modelis: FZ-831 / N7

Baterija: 2 × IMR18650 Li-ion, 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh

Nominali įėjimo įtampa: 5V

Nominali galia: 10W


Taikomi standartai: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Pastaba: Prašome remtis tikruoju produktu. Šiame vadove pateikti iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Produkto atnaujinimai gali būti atliekami be išankstinio įspėjimo.


PRODUKTO SAVYBĖS

- Dvigubas delnų minkymo masažas**
Simuliuoja tikrą rankos masažą su dešimties pirštų minkymu, tiksliai veikdamas akupresūros taškus.
- Odai draugiška medžiaga**
Pagaminta iš maistinės klasės silikono, suteikia minkštą ir malonų prisilietimą, panašų į žmogaus ranką.
- Lengvas ir nešiojamas dizainas**
Sveria tik 760 g, sumažina pečių apkrovą ir patogiu nešiotis.
- Galingas veikimas**
Įrengtas bevieliu tyliai veikiančiu varikliu, kad masažas būtų sklandus ir komfortiškas.
- Paprastas valdymas mygtuku**
Vieno mygtuko valdymas leidžia lengvai naudotis ir greitai paleisti.
- Reguliuojama šildymo funkcija**
Turi šilto kompreso funkciją su reguliuojamais temperatūros lygiais, kad būtų gilesnis atsipalaidavimas ir didesnis komfortas.

PRODUKTO APŽVALGA

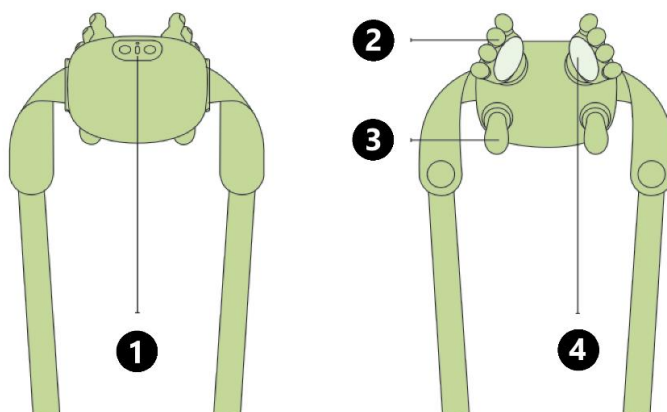

1. Valdymo mygtukai
2. Viršutinė masažo galvutė
3. Apatinė masažo galvutė
4. Šilto kompreso zona

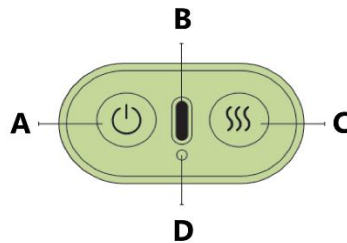

A. Maitinimo mygtukas


Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. Trumpas paspaudimas perjungia masažo režimus.

B. Įkrovimo lizdas

C. Šilto kompreso mygtukas

D. Indikatoriaus lemputė

NAUDOJIMAS

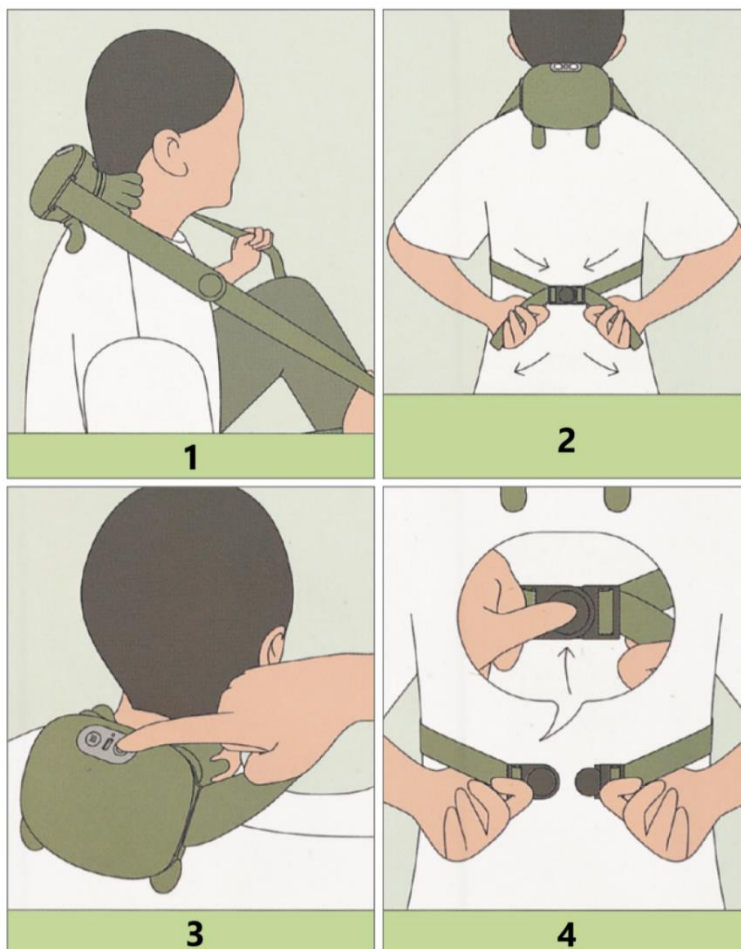

1. Patogiai uždėkite masažuoklį ant pečių.
 2. Užfiksukite sagtį už nugaros ir tvirtai uždėkite. Reguluokite dirželius iki vienodo ilgio, kad išvengtumėte diskomforto dėl netolygaus įtempimo.
 3. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
 4. Po naudojimo paspauskite sagtį, kad atlaisvintumėte pečių diržą, ir nuimkite įrenginį.
-

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Įjungimas/Išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

Įjungus:

- Užsidega balta indikatoriaus lemputė.
 - Įrenginys pagal numatytuosius nustatymus įsijungia Masažo režimu 1 ir Žemos temperatūros režimu.
 - Numatyta masažo trukmė – 15 minučių. Baigus darbą įrenginys automatiškai išsijungia, o balta lemputė užges.
-

Masažo režimų perjungimas

Įjungus įrenginį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad pereitumėte per masažo režimus:

1. Masažo režimas 1 – balta lemputė mirksi vieną kartą
2. Masažo režimas 2 – balta lemputė mirksi du kartus
3. Masažo režimas 3 – balta lemputė mirksi tris kartus

Šildymo nustatymai lieka nepakeisti perjungiant masažo režimus.

Šildymo lygio perjungimas

Įjungus įrenginį, jis pagal numatytuosius nustatymus veikia Žemos temperatūros režimu.

Trumpai paspauskite šilto kompreso mygtuką, kad pakeistumėte šildymo lygį:

1. Žemas šildymas – raudona lemputė mirksi vieną kartą
2. Aukštas šildymas – raudona lemputė mirksi du kartus
3. Šildymas išjungtas – raudona lemputė išjungta

Šildymo lygio pakeitimas neturi įtakos masažo režimui.

Įkrovimo indikatorius

- Balta lemputė dega: įrenginys veikia.
- Raudona lemputė mirksi: žemas akumuliatoriaus lygis, prašome įkrauti.
- Raudona lemputė dega nuolat: vyksta įkrovimas.
- Balta lemputė dega nuolat: pilnai įkrauta.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Laikymas

1. Laikykite produktą originalioje pakuotėje saugioje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, kai nenaudojamas.
2. Prieš laikymą įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.
3. Nekabinkite produkto už įkrovimo kabelio.
4. Venkite paviršiaus subraižymo aštriais daiktais.
5. Laikykite nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros.

Valymas

- Prieš valymą atjunkite įrenginį nuo maitinimo. Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Nuvalykite paviršių minkšta, švaria šluoste.
- Stipriai užsilikusiems nešvarumams sudrėkinkite šluostę vandeniu, gerai išgręžkite ir nuvalykite paviršių.
- Visiškai nusauskite sausa šluoste prieš vėl naudojant.

Priežiūra

1. Laikykite atokiau nuo aukštos temperatūros ir drėgmės.
2. Jei ilgą laiką nenaudojamas, uždenkite dulkių dangteliu (perkamas atskirai), kad išvengtumėte dulkių kaupimosi.

DARBO IR LAIKYMO APLINKA

1. Nenaudokite aukštoje temperatūroje ar didelėje drėgmėje.
2. Laikykite sausoje vietoje, toli nuo tiesioginių saulės spindulių.
3. Venkite naudojimo dulkių ar drėgnoje aplinkoje.
4. Nenaudokite vietose, kur yra vibracija ar degios medžiagos.
5. Naudokite tik komplekte esantį įkrovimo kabelį.
6. Išjunkite ir atjunkite prieš valymą.

DAŽNOS PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

Jei įrenginys neveikia tinkamai, atlikite šiuos patikrinimus. Jei problema išlieka, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į kvalifikuotą serviso personalą. Neatidarinėkite produkto patys.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Neįsijungia	Žemas baterijos lygis	Pilnai įkrauti prieš naudojimą
	Įrenginys neįjungtas	Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 3 sek.
	Vyksta įkrovimas	Įrenginio negalima naudoti įkrovimo metu

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Neįkraunasi	Įkrovimo kabelis netinkamai prijungtas	Įsitikinkite, kad kabelis ir lizdas tinkamai prijungti
	Vidinė klaida	Kreipkitės į aptarnavimo centrą
Įrenginys sustoja naudojimo metu	Žemas baterijos lygis	Pilnai įkrauti
	Laikmatis baigė darbą	Paleiskite įrenginį iš naujo
Silpna masažo intensyvumas	Žemas baterijos lygis	Įkrauti nedelsiant
Nėra šildymo funkcijos	Šildymas neaktyvuotas	Paspauskite šilto kompreso mygtuką

SAUGOS PRIEMONĖS

Pavojus

NENAUDOKITE šio produkto kartu su šiais mediciniais elektroniniais prietaisais, nes tai gali sukelti gedimus ir rimtą pavojų:

- Širdies stimulatoriai ar kiti implantuojami medicininiai prietaisai
- Gyvybę palaikanti įranga, pvz., dirbtinės širdies–plaučių sistemos
- Elektrokardiografai ir panašūs stebėjimo prietaisai

Svarbi saugos informacija

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Jei naudojimo metu jaučiate diskomfortą, nedelsdami nutraukite ir kreipkitės į gydytoją.
- Įrenginio gedimo atveju nedelsdami išjunkite, kad išvengtumėte perkaitimo ar trumpojo jungimo. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Nepalikite ir neatjunkite įkrovimo kabelio su šlapiais rankomis.
- Nenaudokite dėvint karolius ar grandinėles.
- Nenaudokite gulint.
- Nenaudokite degioje ar sprogstamoje aplinkoje (pvz., degalinėse, dulkėtose dirbtuvėse).
- Nenaudokite vairuojant ar atliekant pavojingus darbus.
- Nenaudokite miegant ar būnant be sąmonės.
- Laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite ant sužeistų, patinusių, uždegiminių, sumuštų ar neseniai operuotų vietų.
- Nenaudokite, jei turite širdies ligų, ūmių susirgimų, piktybinių navikų, neurologinių sutrikimų, kraujospūdžio problemų, osteoporozės, insulto istoriją ar polinkį į kraujavimą. Vyresni nei 65 metų naudotojai turi pasitarti su gydytoju prieš naudojimą ir griežtai kontroliuoti naudojimo laiką.

Įspėjimas

- Tai asmens priežiūros produktas ir nepakeičia medicininio gydymo.

- Nenaudokite ant širdies, galvos, krūtinės, pilvo, lytinių organų ar kitų jautrių sričių.
- Nenaudokite vienoje vietoje ilgiau nei 10 minučių, kad išvengtumėte žemos temperatūros nudegimų arba pernelyg didelio stimuliavimo.
- Naudotojai su sumažėjusiu jautrumu šilumai turi būti atsargūs, kad išvengtų nudegimų.
- Nedarinkite, nemodifikuokite, neskandinkite vandenyje ir nemetykite į ugnį.
- Neveikite aukštoje temperatūroje.
- Nenaudokite kelių įrenginių vienu metu.
- Nenaudokite su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.

Pasitarkite su gydytoju prieš naudojimą, jei:

- Gaunate medicininį gydymą
- Turite infekcinių ligų
- Turite kraujospūdžio problemų
- Turite su diabetu susijusių kraujotakos sutrikimų
- Turite temperatūros (virš 38°C)
- Esate nėščia arba pogimdyminiu laikotarpiu
- Turite kognityvinių sutrikimų

BATERIJOS ŠALINIMAS

Pavojus

- Įkraunama baterija skirta tik šiam produktui.
- Neįkraukite baterijos po jos pašalinimo.
- Nemeskite į ugnį, neperforuokite, nespauskite ar neišardykite.
- Nesukurkite trumpųjų jungčių ant baterijos gnybtų.
- Nepalikite aukštoje temperatūroje.

Neteisingas naudojimas gali sukelti perkaitimą, gaisrą ar sprogimą.

Įspėjimas

- Laikykite pašalintas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterija prarijama, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Jei baterijos skystis pateko į akis, nedelsdami praplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- Jei skystis pateko ant odos, kruopščiai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, jei dirginimas nepraeina.

Baterijos pašalinimas

1. Išjunkite įrenginį.
 2. Naudokite kryžminį atsuktuvą, kad nuimtumėte korpuso varžtus.
 3. Atjunkite arba perkirpkite baterijos laidus.
 4. Pašalinkite ir tinkamai utilizuokite bateriją.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.