

LV: MASSORA – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Plecu un kakla masieris

PRODUKTA IEVADS

Produkta nosaukums: MASSORA

Modelis: FZ-831 / N7

Akumulators: 2 × IMR18650 Li-ion, 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh

Nominālais ieejas spriegums: 5V

Nominālā jauda: 10W


Piemērojamie standarti: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Piezīme: Lūdzu, vadieties pēc faktiskā produkta. Šajā rokasgrāmatā attēli ir tikai informatīvi. Produktu atjauninājumi var notikt bez iepriekšēja brīdinājuma.


PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- 1. Divpusējs plaukstu masāžas mehānisms**
Simulē īstu rokas masāžu ar desmit pirkstu mīcīšanu, lai precīzi ietekmētu akupunktūras punktus.
- 2. Ādai draudzīgs materiāls**
Izgatavots no pārtikas klases silikona, lai nodrošinātu mīkstu un komfortablu sajūtu, līdzīgu cilvēka rokai.
- 3. Viegls un pārnēsājams dizains**
Sver tikai 760 g, samazina plecu slodzi un padara to viegli pārnēsājamu.
- 4. Jaudīga darbība**
Aprīkots ar bezsuku klusējošu motoru, lai masāža darbotos gludi un komfortabli.
- 5. Vienkārša pogu vadība**
Vienas pogas darbība nodrošina vieglu lietošanu un ātru palaišanu.
- 6. Regulējama siltuma funkcija**
Ir silta kompreses funkcija ar regulējamiem temperatūras līmeņiem dziļākai relaksācijai un uzlabotam komfortam.

PRODUKTA APSKATS

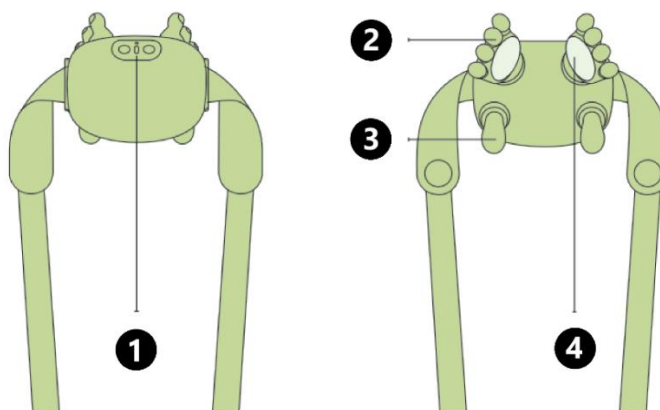

1. Vadības pogas
2. Augšējā masāžas galviņa
3. Apakšējā masāžas galviņa
4. Silto kompresu zona

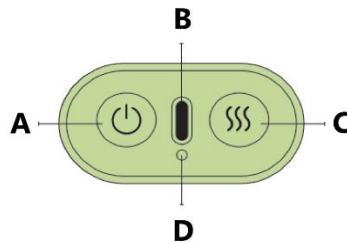

A. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga


Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Īss nospiešanas pieskāriens pārslēdz masāžas režīmus.

B. Uzlādes ports

C. Silto kompresu poga

D. Indikatora gaismā

IERĪCES LIETOŠANA

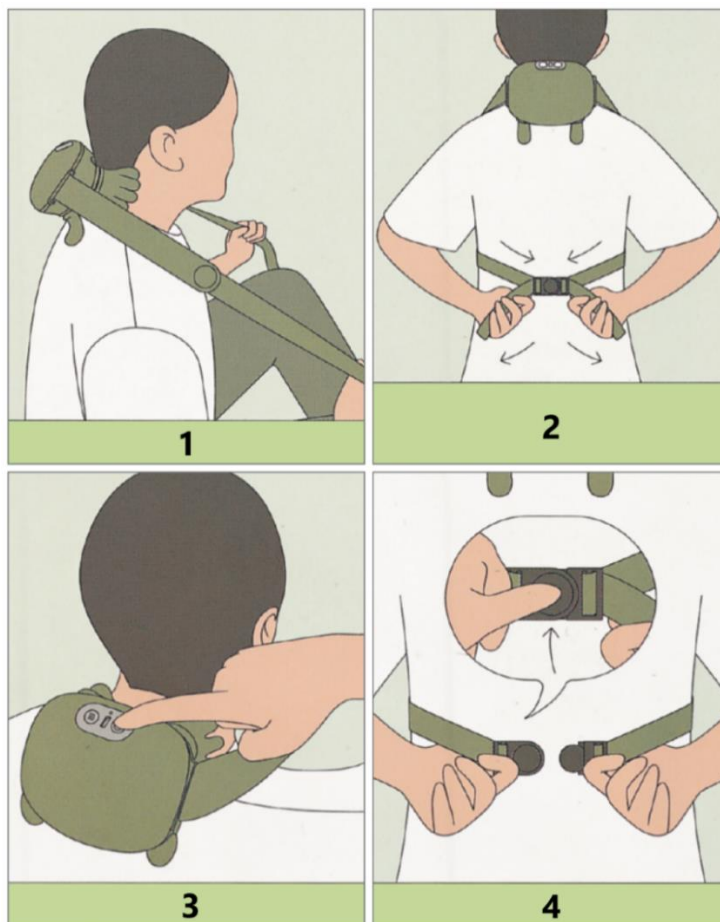

1. Novietojiet masieri ērti uz pleciem.
 2. Velciet sprādzi aiz muguras un cieši aizveriet. Regulējiet abas siksnas vienāda garuma, lai izvairītos no diskomforta, ko rada nevienmērīga sprieguma sadale.
 3. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, lai aktivizētu ierīci.
 4. Pēc lietošanas nospiediet sprādzi, lai atbrīvotu plecu siksnu, un noņemiet ierīci.
-

POGU FUNKCIJAS

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Kad ierīce ir ieslēgta:

- Balta indikatora gaisma iedegas.
 - Ierīce pēc noklusējuma iestata Masāžas režīmu 1 un Zemas siltuma režīmu.
 - Noklusējuma masāžas ilgums ir 15 minūtes. Pēc pabeigšanas ierīce automātiski izslēdzas, un baltais indicators izdziest.
-

Masāžas režīmu pārslēgšana

Kad ierīce ir ieslēgta, īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai cikliski pārslēgtu masāžas režīmus:

1. Masāžas režīms 1 – Balta gaisma mirgo vienreiz
2. Masāžas režīms 2 – Balta gaisma mirgo divreiz
3. Masāžas režīms 3 – Balta gaisma mirgo trīs reizes

Siltuma iestatījums nemainās, pārslēdzot masāžas režīmus.

Siltuma līmeņa pārslēgšana

Kad ierīce ir ieslēgta, tā pēc noklusējuma darbojas Zema siltuma režīmā.

Īsi nospiediet silto kompresu pogu, lai pārslēgtu siltuma līmeni:

1. Zems siltums – Sarkana gaisma mirgo vienreiz
2. Augsts siltums – Sarkana gaisma mirgo divreiz
3. Siltums izslēgts – Sarkana gaisma izdziest

Siltuma līmeņa maiņa neietekmē masāžas režīmu.

Uzlādes indikators

- Balta gaisma ieslēgta: Ierīce darbojas.
 - Sarkana gaisma mirgo: Zems akumulatora līmenis, lūdzu, uzlādējiet.
 - Sarkana gaisma pastāvīgi: Notiek uzlāde.
 - Balta gaisma pastāvīgi: Pilnībā uzlādēts.
-

TĪRĪŠANA UN APKOPES DARBI

Uzglabāšana

1. Glabājiēt produktu oriģinālajā iepakojumā drošā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, kad netiek lietots.
2. Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta pirms glabāšanas.
3. Nepakariniet produktu pie uzlādes kabeļa.
4. Izvairieties no virsmas skrāpējumiem ar asiem priekšmetiem.
5. Turiet prom no tiešiem saules stariem un augstām temperatūrām.

Tīrīšana

- Atvienojiet ierīci no strāvas avota pirms tīrīšanas. Nepieskarieties spraudnim ar mitrām rokām.
- Notīriet virsmu ar mīkstu tīru drānu.
- Pie stingriem netīrumiem drānu nedaudz samitriniet ar ūdeni, labi izspiediet un notīriet virsmu.
- Pilnībā nosusiniet ar sausu drānu pirms atkārtotas lietošanas.

Apkope

1. Turiet ierīci prom no augstas temperatūras un mitruma.
2. Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, uzklājiet putekļu pārsegu (pērkams atsevišķi), lai novērstu putekļu uzkrāšanos.

DARBA UN UZGLABĀŠANAS VIDE

1. Nelietojiet augstās temperatūrās vai augstā mitrumā.
2. Glabājiēt sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
3. Izvairieties no lietošanas putekļainā vai mitrā vidē.
4. Nelietojiet vibrācijas vai ugunsbīstamās zonās.
5. Lietojiet tikai komplektēto uzlādes kabeli.
6. Izslēdziet un atvienojiet pirms tīrīšanas.

BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Ja ierīce nedarbojas pareizi, veiciet šādas pārbaudes. Ja problēma saglabājas, atvienojiet strāvu un sazinieties ar kvalificētu servisa personālu. Neizjauciet produktu paši.

Problēma	Iespējamā cēlonis	Risinājums
Neieslēdzas	Zems akumulatora līmenis	Pilnībā uzlādējiēt pirms lietošanas
	Ierīce nav startēta	Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes
	Uzlāde notiek	Ierīci nevar lietot uzlādes laikā
Neuzlādējas	Uzlādes kabelis pievienots nepareizi	Pārlicinieties, ka kabelis un ports ir droši pievienoti

Problēma	Iespējamā cēlonis	Risinājums
	Iekšēja kļūme	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu
Ierīce apstājas lietošanas laikā	Zems akumulatora līmenis	Pilnībā uzlādējiet
	Taimeris beidzis darbību	Restartējiet ierīci
Masāžas intensitāte vāja	Zems akumulatora līmenis	Uzlādējiet nekavējoties
Nav siltuma funkcijas	Siltums nav aktivizēts	Nospiediet silto kompresu pogu

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Bīstamība

NELIETOJIET šo produktu kopā ar šādiem medicīnas elektroniskajiem ierīcēm, jo tas var izraisīt darbības traucējumus un nopietnu risku:

- Sirds stimulatori vai citas implantējamas medicīnas elektroniskās ierīces
- Dzīvības uzturēšanas aprīkojums, piemēram, mākslīgās sirds-plaušu iekārtas
- Elektrokardiogrāfi un līdzīgas uzraudzības ierīces

Svarīga drošības informācija

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Ja lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar ārstu.
- Ierīces darbības traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci, lai novērstu pārkaršanu vai īssavienojumu. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
- Nepievienojiet un neatvienojiet uzlādes kabeli ar mitrām rokām.
- Nelietojiet, valkājot kaklarotas vai ķēdītes.
- Nelietojiet guļus stāvoklī.
- Nelietojiet viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē (piemēram, degvielas uzpildes stacijās, putekļainās darbnīcās).
- Nelietojiet, vadot transportlīdzekli vai veicot bīstamas darbības.
- Nelietojiet miegā vai bezsamaņā.
- Turiet bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.
- Nelietojiet traumētās, pietūkušās, iekaisušās, sasistas vai nesen operētās vietās.
- Nelietojiet, ja Jums ir sirds slimības, akūtas sasilšanas, ļaundabīgi audzēji, neiroloģiski traucējumi, asinsspiediena novirzes, osteoporoze, insults vai asiņošanas nosliece.
- Lietotājiem, kas vecāki par 65 gadiem, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu un stingri jāierobežo lietošanas laiks.

Brīdinājums

- Šis ir personīgās aprūpes produkts un neaizvieto medicīnisko ārstēšanu.
- Nelietojiet uz sirds, galvas, krūtīm, vēdera, dzimumorgānu zonu vai citām jutīgām vietām.

- Nelietojiet vienā vietā ilgāk par 10 minūtēm, lai izvairītos no zema temperatūras apdegumiem vai pārmērīgas stimulācijas.
- Lietotājiem ar samazinātu siltuma jutību jābūt uzmanīgiem, lai izvairītos no apdegumiem.
- Nelauziet, nemodificējiet, neiemērciet ūdenī un nemetiet ugunī.
- Nepakļaujiet produktu augstai temperatūrai.
- Nelietojiet vairākas ierīces vienlaikus.
- Nelietojiet ar ārēju taimeri vai tālvadības sistēmu.

Konsultējieties ar ārstu pirms lietošanas, ja:

- Saņemat medicīnisko ārstēšanu
- Ir infekcijas slimības
- Ir asinsspiediena novirzes
- Ir diabēta saistītas asinsrites problēmas
- Ir drudzis (virs 38°C)
- Esat stāvoklī vai pēcdzemdību periodā
- Ir kognitīvi traucējumi

AKUMULATORA UTILIZĀCIJA

Bīstamība

- Uzlādējamais akumulators ir paredzēts tikai šim produktam.
- Neuzlādējiet akumulatoru pēc noņemšanas.
- Nemest ugunī, nesaduriet, nesaspiest un neraiziet.
- Nenodrošiniet īssavienojumu akumulatora poliem.
- Nepakļaujiet augstai temperatūrai.

Nepareiza lietošana var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju.

Brīdinājums

- Turiet izņemtos akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Ja akumulators tiek norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Ja akumulatora šķidrums nonāk acīs, nekavējoties skalojiet ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Ja šķidrums nonāk uz ādas, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja kairinājums turpinās.

Akumulatora noņemšana

1. Izslēdziet ierīci.
 2. Izmantojiet krusta skrūvgriezi, lai atskrūvētu korpusa skrūves.
 3. Atvienojiet vai pārgrieziet akumulatora vadus.
 4. Noņemiet un pareizi utilizējiet akumulatoru.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.