

NL: MASSORA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Schouder- en nekmassager

PRODUCTINTRODUCTIE

Productnaam: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Batterij: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Nominale invoer: 5V

Nominaal vermogen: 10W


Toepasselijke normen: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Opmerking: Raadpleeg het werkelijke product. Illustraties in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Productupdates kunnen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving.


PRODUCTKENMERKEN

1. **Dubbele handmassage**
Simuleert een echte handmassage met tien vingers en richt zich nauwkeurig op acupunctuurpunten.
 2. **Huidvriendelijk materiaal**
Gemaakt van voedselveilig siliconenmateriaal voor een zachte en comfortabele aanraking, vergelijkbaar met een menselijke hand.
 3. **Licht en draagbaar ontwerp**
Weegt slechts 760 g, vermindert schouderbelasting en maakt transport eenvoudig.
 4. **Krachtige prestaties**
Uitgerust met een borstelloze stille motor voor een soepele en comfortabele massage.
 5. **Eenvoudige bedieningsknop**
Eénknopsbediening voor eenvoudig gebruik en snelle start.
 6. **Instelbare warmtefunctie**
Beschikt over een warmtekussenfunctie met instelbare temperatuurniveaus voor diepere ontspanning en verhoogd comfort.
-

PRODUCTOVERZICHT

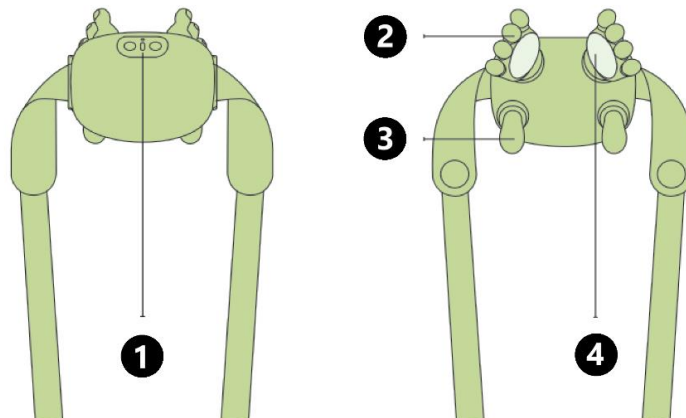


1. Bedieningsknoppen
2. Bovenste massaghoofd
3. Onderste massaghoofd
4. Warmtecompressiegebied

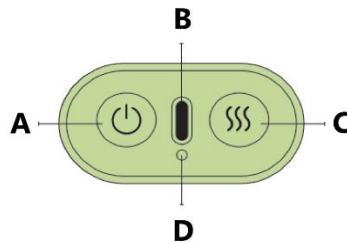

- A. **Aan/uit-knop**
3 seconden ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te zetten. Kort indrukken schakelt de massagemodus.
- B. **Oplaadpoort**
- C. **Warmtecompressieknop**
- D. **Indicatorlampje**

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

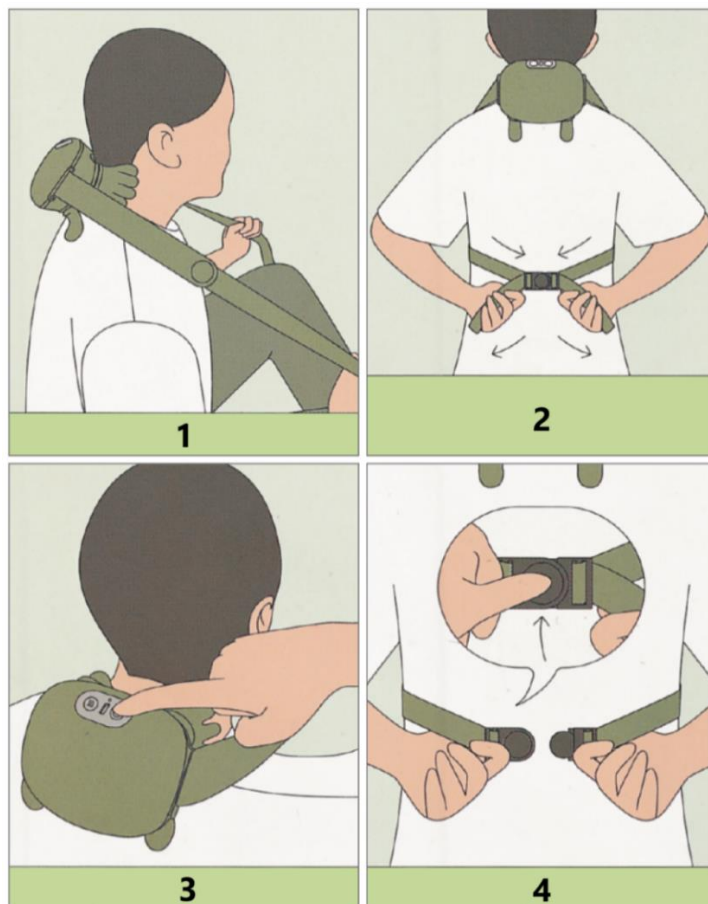

1. Plaats de massager comfortabel op uw schouders.
 2. Trek de gesp achter uw rug en bevestig deze stevig. Pas beide riemen aan op gelijke lengte om ongemak door ongelijke spanning te voorkomen.
 3. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat te starten.
 4. Na gebruik, druk op de gesp om de schouderriem los te maken en verwijder het apparaat.
-

KNOPFUNCTIES

Aan/Uit

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld:

- Het witte indicatorlampje gaat branden.
 - Het apparaat start standaard in Massagemodus 1 en Lage warmte.
 - De standaard massagetijd is 15 minuten. Na voltooiing schakelt het apparaat automatisch uit en gaat het witte lampje uit.
-

Massagemodus wisselen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kort op de aan/uit-knop drukken om de massagemodus te wijzigen:

1. Massagemodus 1 – wit lampje knippert één keer
2. Massagemodus 2 – wit lampje knippert twee keer
3. Massagemodus 3 – wit lampje knippert drie keer

De warmte-instelling blijft ongewijzigd bij het wisselen van de massagemodus.

Warmteniveau wisselen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, start het in Lage warmte.

Kort op de warmtecompressieknop drukken om het warmteniveau te wijzigen:

1. Laag – rood lampje knippert één keer
2. Hoog – rood lampje knippert twee keer
3. Uit – rood lampje uit

Het wijzigen van het warmteniveau heeft geen invloed op de massagemodus.

Oplaadindicator

- Wit lampje aan: apparaat in werking.
- Rood lampje knippert: batterij bijna leeg, opladen.
- Rood lampje brandt constant: opladen.
- Wit lampje brandt constant: volledig opgeladen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Opslag

1. Bewaar het product in de originele verpakking op een veilige, droge, koele en goed geventileerde plaats wanneer het niet in gebruik is.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het opbergt.
3. Hang het product niet op aan de oplaadkabel.
4. Vermijd krassen op het oppervlak door scherpe voorwerpen.
5. Bescherm het tegen direct zonlicht en hoge temperaturen.

Reiniging

- Maak het apparaat los van de stroom voordat u reinigt. Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Veeg het oppervlak af met een zachte, schone doek.
- Voor hardnekkig vuil, maak de doek licht vochtig met water, wring goed uit en veeg het oppervlak schoon.
- Droog volledig met een droge doek voordat u het product opnieuw gebruikt.

Onderhoud

1. Houd het apparaat uit de buurt van hoge warmte en vochtigheid.
2. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, bedek het met een stofhoes (apart verkrijgbaar) om stofophoping te voorkomen.

GEBRUIKS- EN OPSLAGOMGEVING

1. Niet gebruiken in omgevingen met hoge temperatuur of vochtigheid.
2. Opslaan op een droge plaats, uit direct zonlicht.
3. Gebruik vermijden in stoffige of natte omgevingen.
4. Niet gebruiken in trillingsgevoelige of brandbare gebieden.
5. Alleen de bijgeleverde oplaadkabel gebruiken.
6. Uitschakelen en loskoppelen voordat u schoonmaakt.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Als het apparaat niet correct werkt, voer de volgende controles uit. Als het probleem aanhoudt, ontkoppel en neem contact op met professionele service. Demonteren van het product is niet toegestaan.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Schakelt niet in	Lage batterij	Volledig opladen voor gebruik
	Apparaat niet gestart	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt
	Tijdens opladen	Kan niet gebruikt worden tijdens het opladen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Laadt niet	Kabel niet correct aangesloten	Controleer of kabel en poort goed verbonden zijn
	Interne storing	Neem contact op met de service
Stopt tijdens gebruik	Lage batterij	Volledig opladen
	Timer voltooid	Apparaat opnieuw starten
Massage-intensiteit zwak	Lage batterij	Snel opladen
Geen warmtefunctie	Warmte niet geactiveerd	Druk op de warmtecompressieknop

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaar

Gebruik dit product niet samen met de volgende medische elektronische apparaten, dit kan storingen of ernstige risico's veroorzaken:

- Pacemakers of andere implanteerbare medische apparaten
- Levensondersteunende apparatuur zoals hart-longmachines
- Elektrocardiografen en vergelijkbare monitorapparatuur

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.
- Stop onmiddellijk bij ongemak tijdens gebruik en raadpleeg een arts.
- Schakel het apparaat direct uit bij storing om oververhitting of kortsluiting te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice.
- Stekker niet in- of uitpluggen met natte handen.
- Geen halskettingen dragen tijdens gebruik.
- Niet liggend gebruiken.
- Niet gebruiken in brandbare of explosieve omgevingen (bijv. tankstations, stoffige werkplaatsen).
- Niet gebruiken tijdens autorijden of gevaarlijke activiteiten.
- Niet gebruiken tijdens slaap of bewusteloosheid.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken op gewonde, gezwollen, ontstoken, blauwe of recent geopereerde gebieden.
- Niet gebruiken bij hartaandoeningen, acute ziekten, kwaadaardige tumoren, neurologische stoornissen, bloeddrukafwijkingen, osteoporose, beroertegeschiedenis of neiging tot bloeden.
- Gebruikers ouder dan 65 jaar moeten medisch advies inwinnen en gebruikstijd strikt controleren.

Waarschuwing

- Dit is een persoonlijk verzorgingsproduct en vervangt geen medische behandeling.
- Niet gebruiken op het hart, hoofd, borst, buik, genitaliën of andere gevoelige gebieden.

- Maximaal 10 minuten op hetzelfde lichaamsgebied om onderkoeling of overprikkeling te voorkomen.
- Gebruikers met verminderde warmtegevoeligheid dienen voorzichtig te zijn om verbranding te voorkomen.
- Niet demonteren, modificeren, onderdompelen in water of in vuur gooien.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen.
- Gebruik niet meerdere apparaten tegelijkertijd.
- Gebruik geen externe timer of afstandsbedieningssysteem.

Raadpleeg een arts vóór gebruik indien:

- U medische behandeling ondergaat
- U infectieziekten heeft
- U een afwijkende bloeddruk heeft
- U circulatieproblemen door diabetes heeft
- U koorts boven 38 °C heeft
- U zwanger bent of postpartum
- U cognitieve beperkingen heeft

ACCU-VERWIJDERING

Gevaar

- De oplaadbare batterij is exclusief voor dit product.
- Laad de batterij niet op na verwijdering.
- Gooi niet in vuur, doorboor, verpletter of demonstreer.
- Maak de batterijterminals niet kort.
- Blootstelling aan hoge temperaturen vermijden.

Onjuist gebruik kan oververhitting, brand of explosie veroorzaken.

Waarschuwing

- Houd verwijderde batterijen buiten bereik van kinderen.
- Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Als batterijvloeistof in contact komt met de ogen, spoel met schoon water en zoek medische hulp.
- Als batterijvloeistof in contact komt met de huid, grondig spoelen en medisch advies inwinnen als irritatie aanhoudt.

Batterij verwijderen

1. Zet het apparaat uit.
 2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de behuizingsschroeven te verwijderen.
 3. Koppel de batterijdraden los of knip ze door.
 4. Verwijder en gooi de batterij correct weg volgens lokale regelgeving.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.