

PL: MASSORA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer barków i szyi

WPROWADZENIE PRODUKTU

Nazwa produktu: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Bateria: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Napięcie wejściowe: 5V

Moc znamionowa: 10W


Obowiązujące normy: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Uwaga: Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Aktualizacje produktu mogą wystąpić bez wcześniejszego powiadomienia.


CECHY PRODUKTU

- Masaż obiema dłońmi**
Symuluje prawdziwy masaż rękami z użyciem dziesięciu palców, dokładnie działając na punkty akupresury.
 - Materiał przyjazny dla skóry**
Wykonany z silikonu klasy spożywczej, zapewniającego miękki i komfortowy dotyk podobny do ludzkiej ręki.
 - Lekka i przenośna konstrukcja**
Waży zaledwie 760 g, zmniejsza obciążenie ramion i ułatwia przenoszenie.
 - Wydajna praca**
Wyposażony w bezszczotkowy, cichy silnik zapewniający płynną i komfortową pracę masażu.
 - Proste sterowanie jednym przyciskiem**
Obsługa jednym przyciskiem umożliwia łatwe użycie i szybkie uruchomienie.
 - Regulowana funkcja podgrzewania**
Wyposażony w funkcję ciepłego kompresu z regulacją temperatury dla głębszego relaksu i większego komfortu.
-

PRZEGLĄD PRODUKTU

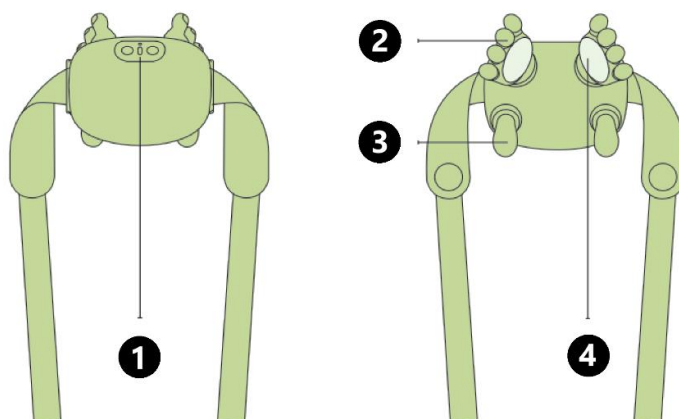

1. Przyciski sterujące
2. Górna głowica masująca
3. Dolna głowica masująca
4. Obszar ciepłego kompresu

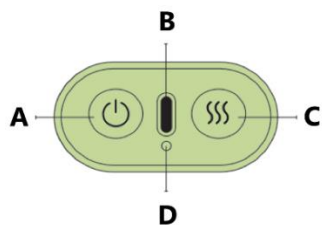

A. Przycisk włączania/wyłączania


Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb masażu.

B. Port ładowania

C. Przycisk ciepłego kompresu

D. Lampka kontrolna

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

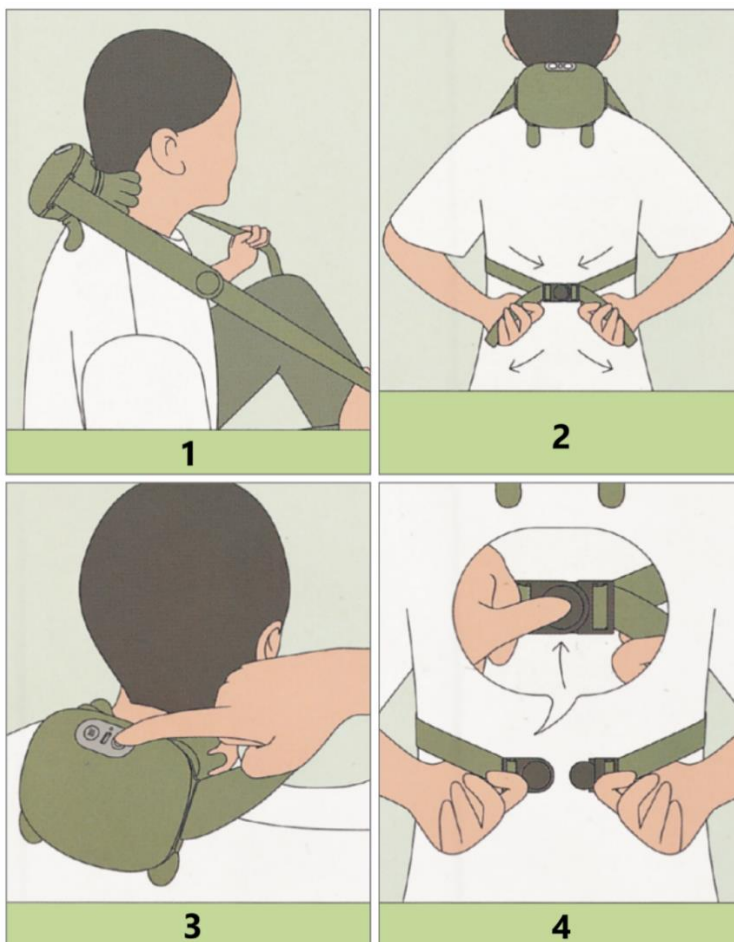

1. Umieść masażer wygodnie na ramionach.
2. Przeciągnij klamrę za plecami i pewnie ją zapiąć. Dostosuj oba paski do tej samej długości, aby uniknąć dyskomfortu spowodowanego nierównym napięciem.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
4. Po użyciu naciśnij klamrę, aby zwolnić pasek i zdjąć urządzenie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Włączanie/Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenia:

- Zapala się biała lampka kontrolna.
- Urządzenie domyślnie uruchamia Tryb Masażu 1 i Niskie ciepło.
- Domniemana długość masażu to 15 minut. Po zakończeniu urządzenie wyłącza się automatycznie, a biała lampka gaśnie.

Zmiana trybu masażu

Po włączeniu urządzenia krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pozwala cyklicznie zmieniać tryby masażu:

1. Tryb masażu 1 – biała lampka miga raz
2. Tryb masażu 2 – biała lampka miga dwa razy
3. Tryb masażu 3 – biała lampka miga trzy razy

Ustawienie temperatury pozostaje bez zmian podczas zmiany trybu masażu.

Zmiana poziomu ciepła

Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawione jest Niskie ciepło.

Krótko naciśnij przycisk ciepłego kompresu, aby zmienić poziom ciepła:

1. Niskie – czerwona lampka miga raz
2. Wysokie – czerwona lampka miga dwa razy
3. Wyłączone – czerwona lampka gaśnie

Zmiana poziomu ciepła nie wpływa na tryb masażu.

Wskaźnik ładowania

- Biała lampka włączona: urządzenie działa.
- Czerwona lampka migająca: niski poziom baterii, proszę naładować.
- Czerwona lampka świeci ciągłym światłem: trwa ładowanie.

- Biała lampka świeci ciągłym światłem: pełne naładowanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przechowywanie

1. Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, gdy nie jest używany.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed przechowywaniem.
3. Nie zawieszaj produktu na przewodzie do ładowania.
4. Unikaj zarysowań powierzchni ostrymi przedmiotami.
5. Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.

Czyszczenie

- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Przetrzyj powierzchnię miękką, czystą szmatką.
- W przypadku trudnych zabrudzeń zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i przetrzyj powierzchnię.
- Przed ponownym użyciem dokładnie osusz suchą szmatką.

Konserwacja

1. Trzymaj z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przykryj je pokrowcem przeciwkurzowym (sprzedawanym osobno), aby zapobiec osadzaniu się kurzu.

WARUNKI EKSPLOATACJI I PRZECZYSZCZANIA

1. Nie używaj w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
2. Przechowuj w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
3. Unikaj używania w zapyłonym lub wilgotnym środowisku.
4. Nie używaj w miejscach narażonych na wibracje lub materiały łatwopalne.
5. Używaj tylko dołączonego kabla do ładowania.
6. Wyłącz i odłącz przed czyszczeniem.

CZĘSTE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywał, odłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie demontuj produktu samodzielnie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie włącza się	Niska bateria	Naładuj w pełni przed użyciem
	Urządzenie nie uruchomione	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy
	W trakcie ładowania	Nie można używać podczas ładowania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie ładuje	Kabel nieprawidłowo podłączony	Sprawdź, czy kabel i port są pewnie połączone
	Usterka wewnętrzna	Skontaktuj się z serwisem
Zatrzymuje się w trakcie użycia	Niska bateria	Naładuj w pełni
	Timer zakończony	Uruchom ponownie urządzenie
Słaba intensywność masażu	Niska bateria	Natychmiast naładuj
Brak funkcji ciepła	Ciepło nieaktywne	Naciśnij przycisk ciepłego kompresu

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo

Nie używaj tego produktu razem z następującymi medycznymi urządzeniami elektronicznymi, może to spowodować awarię lub poważne zagrożenie:

- Wszczepialne stymulatory serca lub inne urządzenia implantowalne
- Sprzęt podtrzymujący życie, np. aparaty serce-płuca
- EKG i podobne urządzenia monitorujące

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- W przypadku dyskomfortu podczas użycia natychmiast przerwij i skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku awarii natychmiast wyłącz urządzenie, aby zapobiec przegrzaniu lub zwarciu. Skontaktuj się z obsługą klienta.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj z naszyjnikami lub biżuterią na szyi.
- Nie używaj w pozycji leżącej.
- Nie używaj w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym (np. stacje benzynowe, zakurzone warsztaty).
- Nie używaj podczas jazdy lub niebezpiecznych czynności.
- Nie używaj podczas snu lub utraty przytomności.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie stosuj na zranione, spuchnięte, zapalne, stłuczone lub niedawno operowane miejsca.
- Nie używaj, jeśli masz choroby serca, choroby ostre, nowotwory złośliwe, zaburzenia neurologiczne, nieprawidłowe ciśnienie krwi, osteoporozę, historię udaru lub skłonność do krwawień.
- Użytkownicy powyżej 65 roku życia powinni skonsultować się z lekarzem i ściśle kontrolować czas użycia.

Ostrzeżenie

- Jest to produkt do pielęgnacji osobistej i nie zastępuje leczenia medycznego.
- Nie stosować na sercu, głowie, klatce piersiowej, brzuchu, genitaliach ani innych wrażliwych obszarach.

- Nie używać dłużej niż 10 minut na tym samym obszarze ciała, aby uniknąć poparzeń niską temperaturą lub nadmiernego pobudzenia.
- Użytkownicy o zmniejszonej wrażliwości na ciepło powinni zachować ostrożność, aby nie doznać poparzeń.
- Nie demontować, nie modyfikować, nie zanurzać w wodzie ani nie wrzucać do ognia.
- Nie narażać na wysokie temperatury.
- Nie używać kilku urządzeń jednocześnie.
- Nie używać z zewnętrznym timerem lub systemem zdalnego sterowania.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- Jesteś w trakcie leczenia medycznego
- Masz choroby zakaźne
- Masz nieprawidłowe ciśnienie krwi
- Masz problemy z krążeniem związane z cukrzycą
- Masz gorączkę powyżej 38 °C
- Jesteś w ciąży lub w okresie połogu
- Masz zaburzenia poznawcze

UTYLIZACJA BATERII

Niebezpieczeństwo

- Bateria akumulatorowa jest przeznaczona wyłącznie do tego produktu.
- Nie ładuj baterii po jej wyjęciu.
- Nie wrzucaj do ognia, nie przekłuwaj, nie miażdż ani nie demontuj.
- Nie zwieraj styków baterii.
- Nie narażaj na wysokie temperatury.

Nieprawidłowe użycie może spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch.

Ostrzeżenie

- Trzymaj wyjęte baterie z dala od dzieci.
- W przypadku połknięcia natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz czystą wodą i zgłoś się do lekarza.
- Jeśli płyn dostanie się na skórę, dokładnie spłucz wodą i zgłoś się do lekarza, jeśli podrażnienie się utrzymuje.

Wyjmowanie baterii

1. Wyłącz urządzenie.
 2. Użyj śrubokręta krzyżowego, aby zdjąć śruby obudowy.
 3. Odłącz lub przerwij przewody baterii.
 4. Usuń baterię i zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.