

RO: MASSORA – MANUAL DE UTILIZARE

Aparat de masaj pentru umeri și gât

INTRODUCERE PRODUS

Denumire produs: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Baterie: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Intrare nominală: 5V

Putere nominală: 10W


Standarde aplicabile: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Notă: Vă rugăm să consultați produsul real. Ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Actualizările produsului pot avea loc fără notificare prealabilă.


CARACTERISTICI PRODUS

1. **Masaj prin frământare cu palme duble**
Simulează un masaj real al mâinilor cu frământare în zece puncte pentru a viza cu precizie punctele de acupresiune.
2. **Material prietenos cu pielea**
Fabricat din silicon alimentar pentru o atingere moale și confortabilă, similară mâinii umane.
3. **Design ușor și portabil**
Cântărește doar 760 g, reducând presiunea asupra umerilor și fiind ușor de transportat.
4. **Performanță puternică**
Echipat cu un motor silențios fără perii pentru o funcționare lină și confortabilă a masajului.
5. **Control simplu prin buton**
Operare cu un singur buton pentru utilizare ușoară și pornire rapidă.
6. **Funcție de încălzire reglabilă**
Dispune de funcție de compresă caldă cu niveluri de temperatură reglabile pentru relaxare mai profundă și confort îmbunătățit.

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS

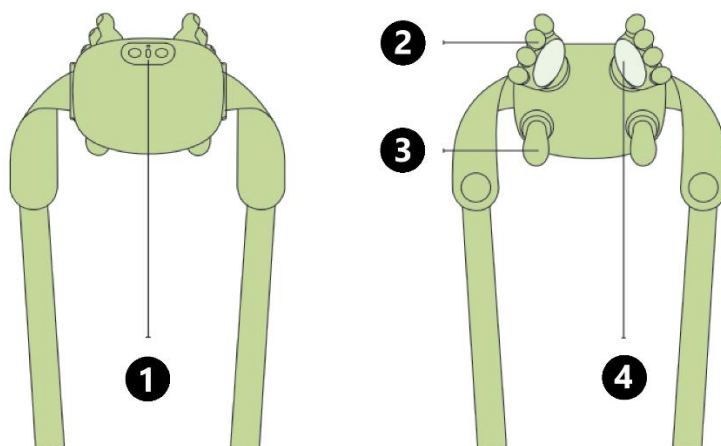

1. Butoane de control
2. Cap de masaj superior
3. Cap de masaj inferior
4. Zonă de compresă caldă

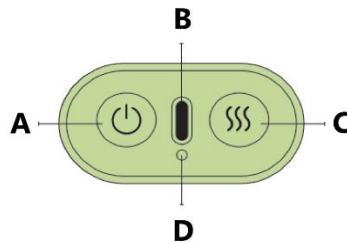

A. Buton de pornire


Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. Apăsare scurtă pentru schimbarea modului de masaj.

B. Port de încărcare

C. Buton compresă caldă

D. Indicator luminos

UTILIZAREA PRODUSULUI

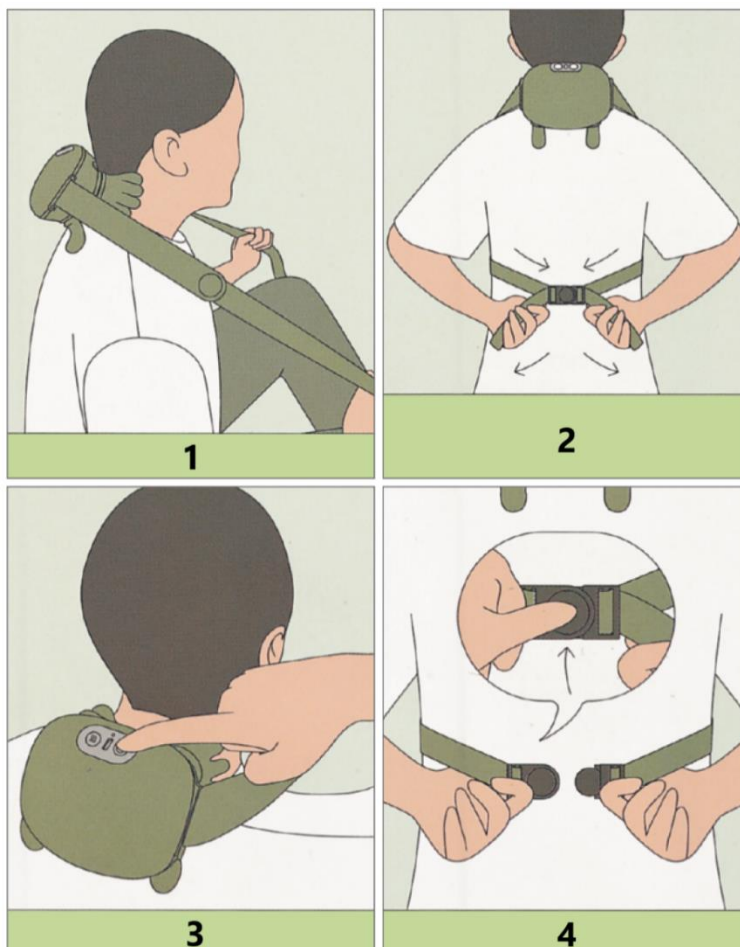

1. Așezați aparatul de masaj confortabil pe umeri.
 2. Trageți catarama în spatele spatelui și fixați-o ferm. Reglați ambele curele la aceeași lungime pentru a evita disconfortul cauzat de tensiunea inegală.
 3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul.
 4. După utilizare, apăsați catarama pentru a elibera cureaua de umăr și îndepărtați dispozitivul.
-

FUNCȚIILE BUTOANELOR

Pornire/Oprire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.

La pornire:

- Indicatorul luminos alb se aprinde.
 - Dispozitivul pornește implicit în Modul de masaj 1 și modul Încălzire redusă.
 - Durata implicită a masajului este de 15 minute. După finalizare, dispozitivul se oprește automat și lumina albă se stinge.
-

Schimbarea modului de masaj

Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul de pornire pentru a comuta între modurile de masaj:

1. Mod masaj 1 – Lumina albă clipește o dată
2. Mod masaj 2 – Lumina albă clipește de două ori
3. Mod masaj 3 – Lumina albă clipește de trei ori

Setarea de încălzire rămâne neschimbată la schimbarea modului de masaj.

Schimbarea nivelului de încălzire

La pornire, dispozitivul este setat implicit pe Încălzire redusă.

Apăsați scurt butonul pentru compresă caldă pentru a schimba nivelul de încălzire:

1. Încălzire redusă – Lumina roșie clipește o dată
2. Încălzire ridicată – Lumina roșie clipește de două ori
3. Încălzire oprită – Lumina roșie se stinge

Schimbarea nivelului de încălzire nu afectează modul de masaj.

Indicator de încărcare

- Lumină albă aprinsă: Dispozitivul funcționează.
- Lumină roșie intermitentă: Baterie descărcată, vă rugăm să încărcați.
- Lumină roșie aprinsă constant: Încărcare în curs.
- Lumină albă aprinsă constant: Încărcare completă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Depozitare

1. Depozitați produsul în ambalajul original într-un loc sigur, uscat, răcoros și bine ventilat atunci când nu este utilizat.
2. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de depozitare.
3. Nu agățați produsul de cablul de încărcare.
4. Evitați zgărierea suprafeței cu obiecte ascuțite.
5. Feriți de lumina directă a soarelui și temperaturi ridicate.

Curățare

- Deconectați alimentarea înainte de curățare. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Ștergeți suprafața cu o cârpă moale și curată.
- Pentru murdăria persistentă, umeziți cârpa cu apă, stoarceți-o bine și ștergeți suprafața.
- Uscați complet cu o cârpă uscată înainte de a utiliza din nou produsul.

Întreținere

1. Feriți de temperaturi ridicate și umiditate.
2. Dacă nu este utilizat o perioadă lungă, acoperiți cu o husă de protecție împotriva prafului (achiziționată separat) pentru a preveni acumularea prafului.

MEDIU DE OPERARE ȘI DEPOZITARE

1. Nu utilizați în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.
2. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
3. Evitați utilizarea în medii prăfuite sau umede.
4. Nu utilizați în zone cu vibrații sau în medii inflamabile.
5. Utilizați doar cablul de încărcare furnizat.
6. Opriți și deconectați înainte de curățare.

PROBLEME FRECVENTE ȘI SOLUȚII

Dacă dispozitivul funcționează defectuos, efectuați următoarele verificări. Dacă problema persistă, deconectați alimentarea și contactați personal de service autorizat. Nu demontați produsul pe cont propriu.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu pornește	Baterie descărcată	Încărcați complet înainte de utilizare
	Dispozitiv nepornit	Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde
	Se încarcă	Dispozitivul nu poate fi utilizat în timpul încărcării

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu se încarcă	Cablu de încărcare conectat incorect	Asigurați-vă că cablul și portul sunt conectate ferm
	Defecțiune internă	Contactați serviciul post-vânzare
Dispozitivul se oprește în timpul utilizării	Baterie descărcată	Încărcați complet
	Temporizator finalizat	Reporniți dispozitivul
Intensitate slabă a masajului	Baterie descărcată	Încărcați imediat
Fără funcție de încălzire	Încălzire neactivată	Apăsați butonul pentru compresă caldă

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Pericol

NU utilizați acest produs împreună cu următoarele dispozitive medicale electronice, deoarece poate provoca defecțiuni și riscuri grave:

- Stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale electronice implantabile
- Echipamente de susținere a vieții, cum ar fi aparate inimă-plămân artificiale
- Electrocardiografe și dispozitive similare de monitorizare

Informații importante privind siguranța

- Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
 - Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării, opriți imediat și consultați un medic.
 - Dacă dispozitivul funcționează defectuos, opriți imediat alimentarea pentru a preveni supraîncălzirea sau scurtcircuitul. Contactați serviciul clienți pentru asistență.
 - Nu conectați și nu deconectați cablul de încărcare cu mâinile ude.
 - Nu utilizați în timp ce purtați coliere.
 - Nu utilizați în poziție întinsă.
 - Nu utilizați în medii inflamabile sau explozive (de exemplu, benzinării, ateliere prăfuite).
 - Nu utilizați în timp ce conduceți sau desfășurați activități periculoase.
 - Nu utilizați în timpul somnului sau în stare de inconștiență.
 - A nu se lăsa la îndemâna sugarilor și copiilor.
 - Nu utilizați pe zone rănite, umflate, inflamate, învinețite sau recent operate.
 - Nu utilizați dacă suferiți de boli cardiace, afecțiuni acute, tumori maligne, tulburări neurologice, anomalii ale tensiunii arteriale, osteoporoză, antecedente de accident vascular cerebral sau tendințe de sângerare.
 - Utilizatorii vârstnici peste 65 de ani trebuie să consulte un medic înainte de utilizare și să controleze strict durata utilizării.
-

Avertisment

- Acesta este un produs de îngrijire personală și nu înlocuiește tratamentul medical.
- Nu utilizați pe inimă, cap, piept, abdomen, zona genitală sau alte zone sensibile.
- Nu utilizați mai mult de 10 minute pe aceeași zonă a corpului pentru a evita arsurile la temperatură scăzută sau stimularea excesivă.
- Utilizatorii cu sensibilitate redusă la căldură trebuie să utilizeze cu prudență pentru a preveni arsurile.
- Nu demontați, modificați, scufundați în apă și nu aruncați în foc.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate.
- Nu utilizați mai multe unități simultan.
- Nu utilizați cu temporizator extern sau sistem de telecomandă.

Consultați un medic înainte de utilizare dacă:

- Urmați un tratament medical
- Aveți boli infecțioase
- Aveți tensiune arterială anormală
- Aveți probleme circulatorii asociate diabetului
- Aveți febră (peste 38°C)
- Sunteți însărcinată sau în perioada postnatală
- Aveți tulburări cognitive

ELIMINAREA BATERIEI

Pericol

- Bateria reîncărcabilă este destinată exclusiv acestui produs.
- Nu încărcați bateria după demontare.
- Nu aruncați în foc, nu perforați, nu zdrobiți și nu demontați.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Nu expuneți la temperaturi ridicate.

Manipularea necorespunzătoare poate provoca supraîncălzire, incendiu sau explozie.

Avertisment

- Păstrați bateriile demontate departe de copii.
- Dacă este înghițită, solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă lichidul bateriei intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și solicitați asistență medicală.
- Dacă lichidul intră în contact cu pielea, clătiți bine cu apă și solicitați sfatul medicului dacă iritația persistă.

Demontarea bateriei

1. Opriți dispozitivul.
2. Utilizați o șurubelniță tip Phillips pentru a îndepărta șuruburile carcasei.
3. Deconectați sau tăiați firele bateriei.
4. Îndepărtați și eliminați bateria în mod corespunzător.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.