

SI: MASSORA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Masažer za ramena in vrat

PREDSTAVITEV IZDELKA

Ime izdelka: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Baterija: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Nazivni vhod: 5V

Nazivna moč: 10W


Veljavne norme: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Opomba: Prosimo, upoštevajte dejanski izdelek. Ilustracije v tem priročniku so samo za referenco. Izdelek se lahko posodablja brez predhodnega obvestila.


LASTNOSTI IZDELKA

1. **Dvojna masaža z gnetenjem dlani**
Simulira resnično masažo s tenimi prsti za natančno ciljanje akupresurnih točk.
 2. **Koži prijazen material**
Izdelan iz silikona za živila za mehek, udoben dotik, podoben človeški roki.
 3. **Lahka in prenosna oblika**
Tehta le 760 g, zmanjšuje obremenitev ramen in omogoča enostavno prenašanje.
 4. **Močna zmogljivost**
Opremljen z brezkrtačnim tihim motorjem za gladko in udobno delovanje masaže.
 5. **Enostavno upravljanje z gumbi**
Delovanje z enim gumbom za enostavno uporabo in hiter začetek.
 6. **Nastavljiva funkcija toplote**
Vsebuje funkcijo toplega obloga z nastavljivimi stopnjami temperature za globlje sproščanje in večje udobje.
-

PREGLED IZDELKA

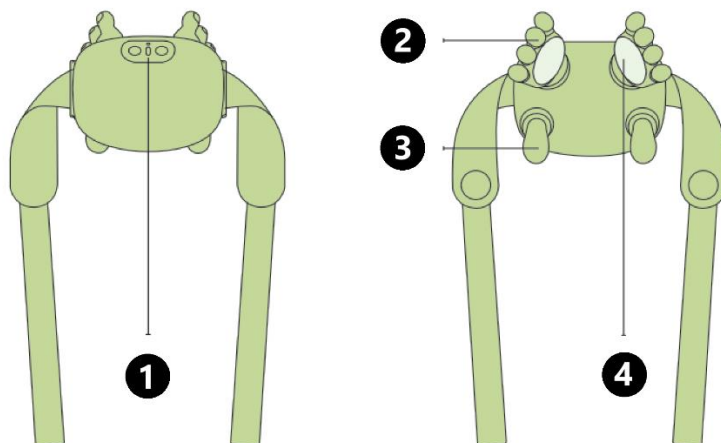

1. Gumbi za upravljanje
2. Zgornja masažna glava
3. Spodnja masažna glava
4. Območje toplega obloga

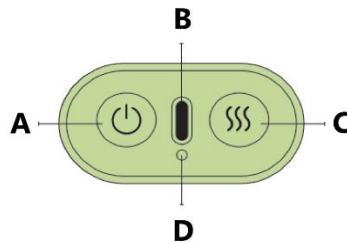

A. Gumb za vklop/izklop


Pritisnite in držite 3 sekunde za vklop ali izklop naprave. Kratki pritisk za preklop masažnih načinov.

B. Polnilni priključek

C. Gumb za tople oblog

D. Indikatorska lučka

UPORABA IZDELKA

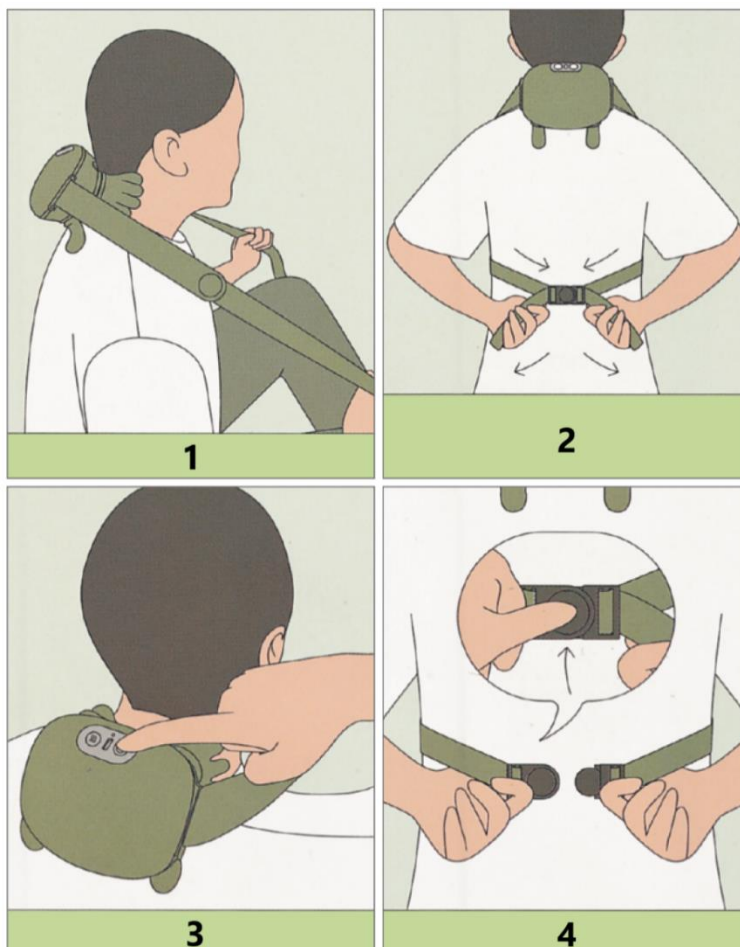

1. Masažer udobno namestite na ramena.
 2. Potegnite zaponko za hrbtom in jo trdno pritrdite. Prilagodite oba traka na enako dolžino, da se izognete neudobju zaradi neenakomernega napetja.
 3. Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, da zaženete napravo.
 4. Po uporabi pritisnite zaponko za sprostitev ramenskega traku in odstranite napravo.
-

FUNKCIJE GUMBOV

Vklop/Izklop

Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite ali izklopite napravo.

Ko je naprava vklopljena:

- Bela indikatorska lučka sveti.
 - Naprava se privzeto vklopi v Masažni način 1 in Nizko toploto.
 - Privzeta dolžina masaže je 15 minut. Po zaključku se naprava samodejno izklopi in bela lučka ugasne.
-

Preklapljanje masažnih načinov

Ko je naprava vklopljena, kratko pritisnite gumb za vklop, da preklapljate med masažnimi načini:

1. Masažni način 1 – Bela lučka utripa enkrat
2. Masažni način 2 – Bela lučka utripa dvakrat
3. Masažni način 3 – Bela lučka utripa trikrat

Nastavitev toplote ostane nespremenjena pri preklopu med masažnimi načini.

Preklapljanje stopnje toplote

Ko je naprava vklopljena, se privzeto vklopi Nizka toplota.

Kratko pritisnite gumb za topel oblog, da preklopite med stopnjami:

1. Nizka toplota – Rdeča lučka utripa enkrat
2. Visoka toplota – Rdeča lučka utripa dvakrat
3. Toplota izklopljena – Rdeča lučka ugasne

Preklop stopnje toplote ne vpliva na masažni način.

Indikator polnjenja

- Bela lučka sveti: Naprava deluje.
 - Rdeča lučka utripa: Nizka baterija, prosimo napolnite.
 - Rdeča lučka stalno sveti: Polnjenje poteka.
 - Bela lučka stalno sveti: Polno napolnjena.
-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Skladiščenje

1. Izdelek shranjujte v originalni embalaži na varnem, suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu, ko ga ne uporabljate.
2. Pred shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena.
3. Izdelka ne obesite na polnilni kabel.
4. Izogibajte se praskanju površine z ostrimi predmeti.
5. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe in visokih temperatur.

Čiščenje

- Pred čiščenjem izklopite napajanje. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Površino obrišite s čistim, mehkim krpo.
- Za trdovratno umazanijo navlažite krpo z vodo, jo dobro ožemite in obrišite površino.
- Popolnoma osušite s suho krpo pred ponovno uporabo.

Vzdrževanje

1. Hranite stran od visokih temperatur in vlage.
2. Če naprava dlje časa ni v uporabi, jo pokrijte s pokrovom proti prahu (kupljen posebej), da preprečite nabiranje prahu.

DELOVNO IN SKLADIŠČNO OKOLJE

1. Ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali vlago.
2. Shranjujte na suhem mestu stran od neposredne sončne svetlobe.
3. Izogibajte se uporabi v prašnih ali mokrih okoljih.
4. Ne uporabljajte na območjih, kjer so vibracije ali vnetljive snovi.
5. Uporabljajte samo priložen polnilni kabel.
6. Pred čiščenjem izklopite in odklopite napravo.

POGOSTE TEŽAVE IN REŠITVE

Če naprava ne deluje pravilno, izvedite naslednje preglede. Če težava ostaja, odklopite napajanje in se obrnite na strokovno osebje. Naprave ne razstavljajte sami.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Nizka baterija	Polno napolnite pred uporabo
	Naprava ni zagnana	Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde
	Polnjenje	Naprava med polnjenjem ne deluje
Naprava se ne polni	Polnilni kabel ni pravilno priključen	Preverite kabel in priključek
	Notranja napaka	Obrnite se na servis
	Nizka baterija	Polno napolnite

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ustavi med uporabo	Časovnik se je iztekel	Ponovno zaženite napravo
Šibka intenzivnost masaže	Nizka baterija	Hitro napolnite
Brez funkcije toplote	Toplota ni aktivirana	Pritisnite gumb za topel oblog

VARNOSTNA NAVODILA

Nevarnost

Ne uporabljajte tega izdelka skupaj z naslednjimi medicinskimi elektronskimi napravami, saj lahko pride do okvare in resne nevarnosti:

- Srčni spodbujevalniki ali druge vsadljive medicinske elektronske naprave
- Naprave za podporo življenju, npr. umetni srčno-pljučni aparati
- EKG in podobne spremljevalne naprave

Pomembne varnostne informacije

- Pred uporabo natančno preberite ta priročnik.
- Če med uporabo občutite nelagodje, takoj prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.
- Če naprava ne deluje pravilno, takoj izklopite napajanje, da preprečite pregrevanje ali kratki stik. Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.
- Ne priklaplajte ali odklapljajte polnilnega kabla z mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte med nošenjem ogrlice.
- Ne uporabljajte med ležanjem na hrbtu.
- Ne uporabljajte v vnetljivem ali eksplozivnem okolju (npr. bencinske črpalke, prašne delavnice).
- Ne uporabljajte med vožnjo ali nevarnimi aktivnostmi.
- Ne uporabljajte med spanjem ali nezavestjo.
- Hranite izven dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte na poškodovanih, otečenih, vnetih, podplutih ali pred kratkim operiranih delih telesa.
- Ne uporabljajte, če imate srčne bolezni, akutne bolezni, zlonamerne tumorje, nevrološke motnje, krvni tlak, osteoporozo, zgodovino možganske kapi ali nagnjenost k krvavitvam.
- Starejši uporabniki nad 65 let naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom in strogo omejijo čas uporabe.

Opozorilo

- To je izdelek za osebno nego in ne nadomešča medicinskega zdravljenja.
- Ne uporabljajte na srcu, glavi, prsih, trebuhu, genitalijah ali drugih občutljivih predelih.
- Na istem predelu telesa ne uporabljajte več kot 10 minut, da se izognete opeklinam ali prekomerni stimulaciji.
- Uporabniki z zmanjšano občutljivostjo za toploto naj bodite previdni, da preprečite opekline.
- Ne razstavljajte, ne spreminjajte, ne potaplajte v vodo in ne mečite v ogenj.
- Ne izpostavljajte izdelka visokim temperaturam.

- Ne uporabljajte več enot hkrati.
- Ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom.

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če:

- Prejemate medicinsko zdravljenje
- Imate nalezljive bolezni
- Imate nenormalen krvni tlak
- Imate težave s prekrvavitvijo zaradi sladkorne bolezni
- Imate vročino (nad 38°C)
- Ste noseči ali po porodu
- Imate kognitivne motnje

ODSTRANITEV BATERIJE

Nevarnost

- Polnilna baterija je namenjena samo temu izdelku.
- Ne polnite baterije po odstranitvi.
- Ne mečite v ogenj, ne preluknjajte, zdrobite ali razstavljajte.
- Ne kratkostičite baterijskih priključkov.
- Ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Nepravilna uporaba lahko povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.

Opozorilo

- Odstranjene baterije hranite stran od otrok.
- Če jih pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če tekočina iz baterije pride v oči, takoj sperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Če tekočina pride na kožo, jo temeljito sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč, če draženje ostane.

Odstranitev baterije

1. Izklopite napravo.
2. S križnim izvijačem odstranite vijake ohišja.
3. Odklopite ali prerežite baterijske žice.
4. Baterijo odstranite in pravilno zavržite.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.