

SK: MASSORA – NÁVOD NA POUŽITIE

Masážny prístroj na ramená a krk

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Názov produktu: MASSORA

Model: FZ-831 / N7

Batéria: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Menovitý vstup: 5V

Menovitý výkon: 10W


Použiteľné normy: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Poznámka: Riadte sa skutočným produktom. Ilustrácie v tomto návode slúžia len na referenčné účely. Aktualizácie produktu môžu prebehnúť bez predchádzajúceho upozornenia.


VLASTNOSTI PRODUKTU

- Masáž oboma dlaňami**
Simuluje skutočnú masáž rukami s použitím desiatich prstov a presne cieli na akupresúrne body.
- Materiál šetrný k pokožke**
Vyrobené z potravinárskeho silikónu, ktorý poskytuje mäkký a pohodlný dotyk podobný ľudskej ruke.
- Ľahký a prenosný dizajn**
Váži iba 760 g, znižuje zaťaženie ramien a umožňuje jednoduché prenášanie.
- Výkonná prevádzka**
Vybavený bezuhlíkovým tichým motorom pre plynulú a pohodlnú masáž.
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom**
Ovládanie jedným tlačidlom zabezpečuje jednoduché používanie a rýchle spustenie.
- Nastaviteľná funkcia ohrevu**
Funkcia teplého obkladu s nastaviteľnou úrovňou teploty pre hlbšiu relaxáciu a vyšší komfort.

PREHĽAD PRODUKTU

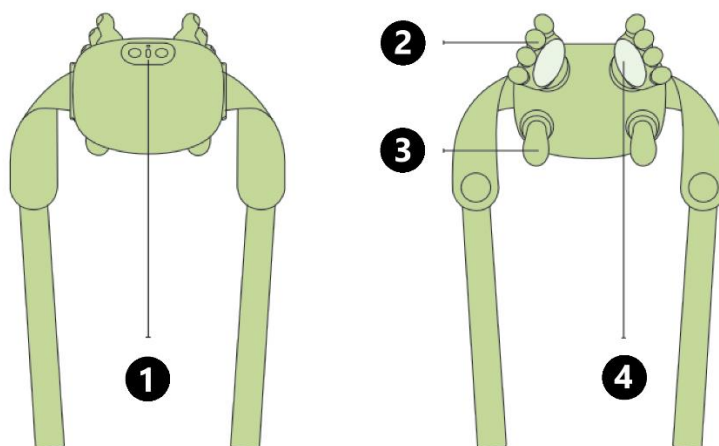

1. Ovládacie tlačidlá
2. Horná masážna hlavica
3. Dolná masážna hlavica
4. Oblasť teplého obkladu

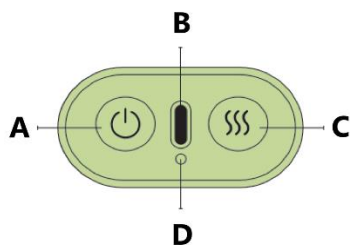

A. Tlačidlo napájania


Podržte 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Krátke stlačenie prepína režim masáže.

B. Nabíjací port

C. Tlačidlo teplého obkladu

D. Indikačné svetlo

POUŽITIE PRODUKTU

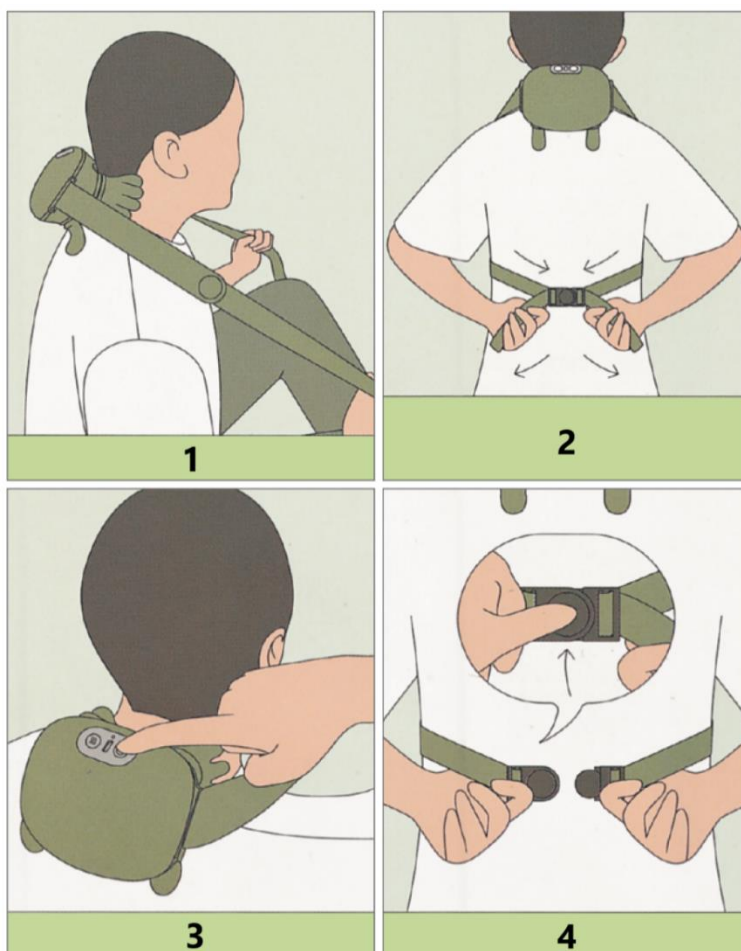

1. Umiestnite masážny prístroj pohodlne na ramená.
 2. Potiahnite pracku za chrbtom a pevne ju upevnite. Nastavte oba popruhy na rovnakú dĺžku, aby ste predišli nepohodliu spôsobenému nerovnomerným napätím.
 3. Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy na spustenie zariadenia.
 4. Po použití stlačte pracku na uvoľnenie popruhu a zariadenie zložte.
-

FUNKCIE TLAČIDIEL

Zapnutie/Vypnutie

Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Po zapnutí zariadenia:

- Rozsvieti sa biele indikačné svetlo.
 - Zariadenie sa predvolene spustí v Masážnom režime 1 a nízkej úrovni ohrevu.
 - Predvolený čas masáže je 15 minút. Po jeho uplynutí sa zariadenie automaticky vypne a biele svetlo zhasne.
-

Prepínanie režimu masáže

Keď je zariadenie zapnuté, krátko stlačte tlačidlo napájania na prepínanie medzi režimami masáže:

1. Masážny režim 1 – biele svetlo blikne raz
2. Masážny režim 2 – biele svetlo blikne dvakrát
3. Masážny režim 3 – biele svetlo blikne trikrát

Nastavenie ohrevu zostáva pri zmene režimu masáže nezmenené.

Prepínanie úrovne ohrevu

Po zapnutí zariadenie štandardne pracuje v režime nízkeho ohrevu.

Krátko stlačte tlačidlo teplého obkladu na zmenu úrovne ohrevu:

1. Nízka – červené svetlo blikne raz
2. Vysoká – červené svetlo blikne dvakrát
3. Vypnuté – červené svetlo zhasne

Zmena úrovne ohrevu nemá vplyv na režim masáže.

Indikátor nabíjania

- Biele svetlo svieti: zariadenie je v prevádzke.
 - Červené svetlo bliká: nízka kapacita batérie, nabite zariadenie.
 - Červené svetlo svieti nepretržite: prebieha nabíjanie.
 - Biele svetlo svieti nepretržite: plne nabité.
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Skladovanie

1. Uchovávajte produkt v originálnom balení na bezpečnom, suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, keď sa nepoužíva.
2. Pred uskladnením sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
3. Nevešajte produkt za nabíjací kábel.
4. Zabráňte poškriabaniu povrchu ostrými predmetmi.
5. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami.

Čistenie

- Pred čistením odpojte zariadenie od napájania. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Povrch utrite mäkkou a čistou handričkou.
- Pri silnejšom znečistení jemne navlhčíte handričku vodou, dobre ju vyžmýkajte a utrite povrch.
- Pred opätovným použitím dôkladne osušte suchou handričkou.

Údržba

1. Udržujte mimo dosahu vysokého tepla a vlhkosti.
2. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, prikryte ho protiprachovým obalom (predáva sa samostatne), aby sa zabránilo usádzaniu prachu.

PODMIENKY POUŽÍVANIA A SKLADOVANIA

1. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
2. Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
3. Vyhnite sa používaniu v prašnom alebo vlhkom prostredí.
4. Nepoužívajte v oblastiach vystavených vibráciám alebo horľavým látkam.
5. Používajte iba dodaný nabíjací kábel.
6. Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte.

BEŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

Ak zariadenie nefunguje správne, vykonajte nasledujúce kontroly. Ak problém pretrváva, odpojte zariadenie a kontaktujte autorizovaný servis. Zariadenie nerozoberajte sami.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nedá sa zapnúť	Nízka batéria	Plne nabite pred použitím
	Zariadenie nebolo spustené	Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy
	Prebieha nabíjanie	Počas nabíjania nie je možné používať
Nenabíja sa	Kábel nie je správne pripojený	Skontrolujte pevné pripojenie kábla a portu
	Vnútoraná porucha	Kontaktujte servis
	Nízka batéria	Plne nabite

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zastaví sa počas používania	Časovač ukončený	Zariadenie znovu zapnite
Slabá intenzita masáže	Nízka batéria	Okamžite nabite
Funkcia ohrevu nefunguje	Ohrev nie je aktivovaný	Stlačte tlačidlo teplého obkladu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nebezpečenstvo

Nepoužívajte tento produkt spolu s nasledujúcimi lekárskymi elektronickými zariadeniami, môže dôjsť k poruche alebo vážnemu riziku:

- Kardiostimulátory alebo iné implantované zdravotnícke zariadenia
- Zariadenia na podporu životných funkcií, napríklad srdcovo-pľúcne prístroje
- EKG a podobné monitorovacie zariadenia

Dôležité bezpečnostné informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- V prípade nepohodlia počas používania okamžite prestaňte a poraďte sa s lekárom.
- V prípade poruchy zariadenie okamžite vypnite, aby ste predišli prehriatiu alebo skratu. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Nezapájajte ani neodpájajte kábel mokrými rukami.
- Nepoužívajte s náhrdelníkmi alebo šperkmi na krku.
- Nepoužívajte v ľahu.
- Nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí (napr. čerpace stanice, prašné dielne).
- Nepoužívajte počas šoférovania alebo nebezpečných činností.
- Nepoužívajte počas spánku alebo bezvedomia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte na poranené, opuchnuté, zapálené, pomliaždené alebo nedávno operované miesta.
- Nepoužívajte pri ochoreniach srdca, akútnych ochoreniach, zhubných nádoroch, neurologických poruchách, abnormálnom krvnom tlaku, osteoporóze, po prekonaní mŕtvice alebo pri sklone ku krvácaniu.
- Osoby staršie ako 65 rokov by sa mali pred použitím poradiť s lekárom a prísne kontrolovať dobu používania.

Upozornenie

- Toto je produkt osobnej starostlivosti a nenahrádza lekársku liečbu.
- Nepoužívajte na srdci, hlave, hrudi, bruchu, genitáliách ani iných citlivých oblastiach.
- Nepoužívajte dlhšie ako 10 minút na tom istom mieste tela, aby ste predišli popáleninám alebo nadmernému podráždeniu.
- Osoby so zníženou citlivosťou na teplo musia byť opatrné, aby predišli popáleniu.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody ani nevhadzujte do ohňa.
- Nevystavujte vysokým teplotám.
- Nepoužívajte viac zariadení súčasne.

- Nepoužívajte s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak:

- Ste v lekárskej starostlivosti
- Máte infekčné ochorenie
- Máte abnormálny krvný tlak
- Máte problémy s krvným obehom súvisiace s cukrovkou
- Máte horúčku nad 38 °C
- Ste tehotná alebo po pôrode
- Máte kognitívne poruchy

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Nebezpečenstvo

- Nabíjateľná batéria je určená výhradne pre tento produkt.
- Po vybratí batériu znovu nenabíjajte.
- Nevhadzujte do ohňa, neprepichujte, nedrvte ani nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty batérie.
- Nevystavujte vysokým teplotám.

Nesprávna manipulácia môže spôsobiť prehriatie, požiar alebo výbuch.

Upozornenie

- Vybraté batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa tekutina z batérie dostane do očí, vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára.
- Ak sa tekutina dostane na pokožku, dôkladne opláchnite vodou a ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.

Vybratie batérie

1. Vypnite zariadenie.
2. Použite krížový skrutkovač na odstránenie skrutiek krytu.
3. Odpojte alebo odstrihnite vodiče batérie.
4. Vyberte batériu a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.