



BG: MEGANECK – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Описание на компонентите и частите на устройството

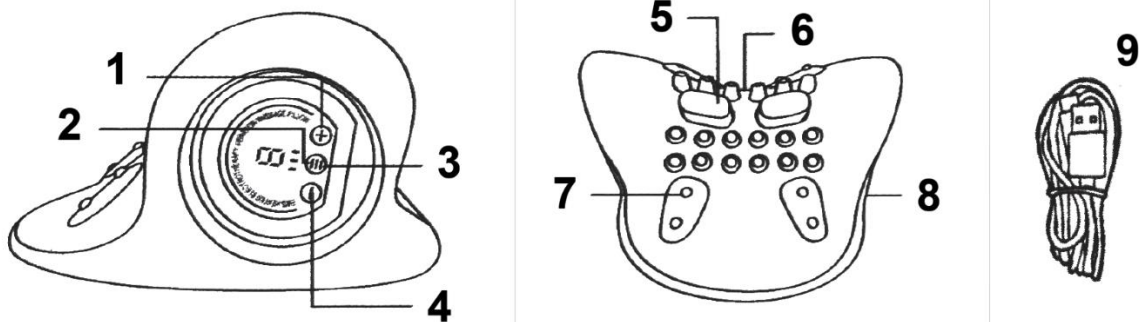

1. Бутон + (Увеличаване)
2. EMS / Загряване / Вибрации – функционални бутони
3. Бутон за захранване (ON/OFF)
4. Бутон – (Намаляване)
5. Нагряваща EMS подложка
6. Масажни възли
7. Магнитни вложки
8. USB Type-C порт
9. USB Type-C кабел за зареждане

Начин на зареждане

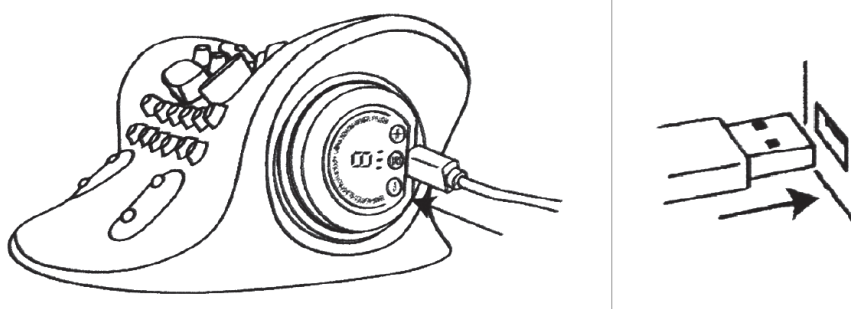


1. Поставете предоставения USB кабел в USB Type-C порта на устройството.
2. Свържете другия край на USB кабела към USB адаптер или външна батерия (power bank). USB адаптерът или външната батерия трябва да се осигурят отделно. Препоръчва се захранване 5 V / 1 A или по-високо.
3. По време на зареждане червеният индикатор мига. Когато устройството е напълно заредено, зеленият индикатор свети постоянно.


Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди, за да включите или изключите устройството.

След включване устройството може да се управлява и чрез дистанционното управление, където бутонът M се използва за смяна на функциите.

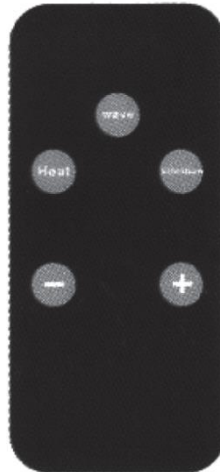

Бутони на дистанционното управление

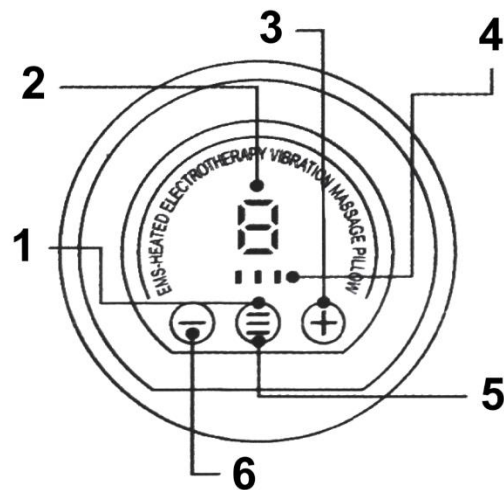

1. EMS / Загряване / Вибрации – функционален бутон
 2. Индикатор за ниво на интензивност
 3. Бутон + (Увеличаване)
 4. Индикаторна светлина
 5. Бутон за захранване (ON/OFF)
 6. Бутон – (Намаляване)
-

Начин на използване

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди, за да включите устройството. Индикаторът за режим ще се появи на първа позиция. Натиснете бутона за увеличаване (+). Когато в зоната за интензивност се появи ниво 1, функцията EMS се активира. След това можете да регулирате интензивността на EMS чрез бутоните + или -. Общо са налични 6 нива на интензивност. Когато индикаторът за интензивност показва 0, функцията EMS е изключена.
2. Натиснете отново бутона за захранване. Когато индикаторът за режим се премести на втора позиция, устройството преминава в режим на загревяване. Когато в зоната за интензивност се появи ниво 1, функцията за загревяване се активира. Налични са 3 нива на загревяване.
Внимание: Изберете подходящото ниво според вашите нужди. Избягвайте прекомерната топлина, за да предотвратите изгаряния.
3. Натиснете отново бутона за захранване. Когато индикаторът за режим се премести на трета позиция, се активира режимът на вибрации. Когато се появи ниво 1, функцията за вибрации започва да работи. Налични са 3 нива на вибрации.
4. Устройството се изключва автоматично след 15 минути работа.
5. Функциите EMS, загревяване и вибрации могат да се използват едновременно или поотделно.

Важни бележки относно функцията за загревяване

Не използвайте функцията за загревяване непрекъснато за продължителен период от време. Дори при сравнително ниски температури (40–50 °C) продължителният контакт с кожата може да причини изгаряния при ниска температура, дори ако не усещате незабавен дискомфорт или болка.

Не използвайте функцията EMS по време на дейности, свързани с вода (например готвене, миене или работа с животни).

Важно предупреждение


Този продукт не е медицинско изделие и не е предназначен за медицинско лечение.

Инструкции за употреба

Поставете устройството така, че нагриващите EMS подложки да се намират върху желаната зона на вашия врат. Както е показано на изображението, устройството може да се използва в двете ориентации. Поставете го на врата си и го регулирайте до най-удобната позиция.

Този продукт е предназначен специално за използване върху врата. Не го използвайте върху други части на тялото, като ръце или крака.

Функцията EMS предава стимулация чрез влага. Преди употреба леко навлажнете областта на врата, където подложките ще бъдат в контакт с кожата, с вода или хладка вода.

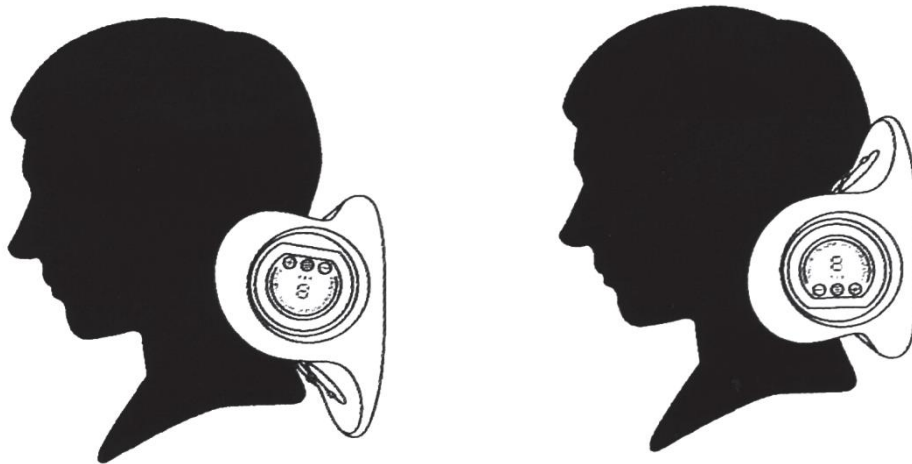

Поддръжка

Почиствайте и поддържайте нагряващите EMS подложки след всяка употреба.

- Изстискайте кърпа, напоена с вода, и избършете подложките, докато са още леко топли.
- Почистете внимателно EMS подложките.
- Ако има замърсяване, използвайте мека кърпа, леко навлажнена с топла вода и разреден неутрален почистващ препарат, изстискайте я и избършете повърхността на устройството.
- Не потапяйте устройството във вода и не го мийте директно.
- Не използвайте разтворители като алкохол, разреждател или бензен, тъй като те могат да причинят повреда, увреждане на компонентите или обезцветяване.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.