



ES: MEGANECK – MANUAL DEL USUARIO

Descripción de componentes y piezas

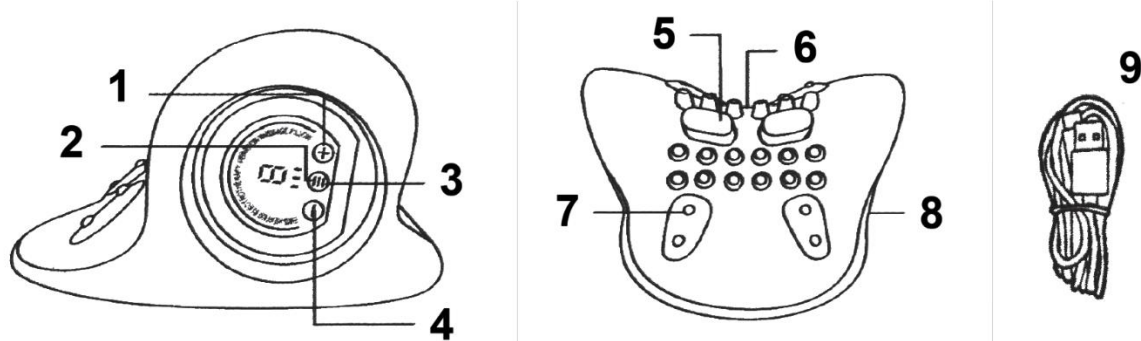

1. + Botón (aumentar)
2. EMS / calefacción / vibración – botones de función
3. Botón de encendido (ON/OFF)
4. – Botón (disminuir)
5. Almohadilla EMS calefactable
6. Nodos de masaje
7. Inserciones magnéticas
8. Puerto USB Type-C
9. Cable de carga USB Type-C

Método de carga

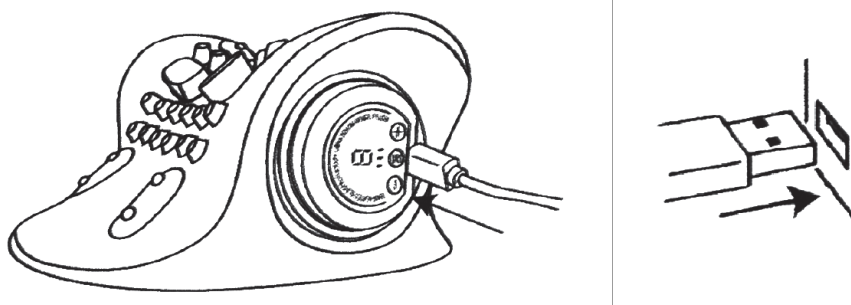


1. Inserte el cable USB incluido en el puerto USB Type-C del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable USB a un adaptador USB o a una power bank. El adaptador USB o la power bank deben prepararse por separado. Se recomienda una fuente de alimentación de 5 V / 1 A o superior.
3. Durante la carga, la luz indicadora roja parpadea. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora verde permanece encendida.


Encendido y apagado del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Después de encender el dispositivo, también puede manejarse mediante el control remoto, donde el botón M se utiliza para cambiar las funciones.

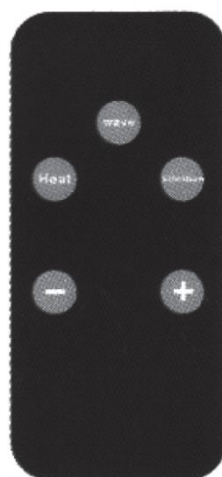

Botones del control remoto

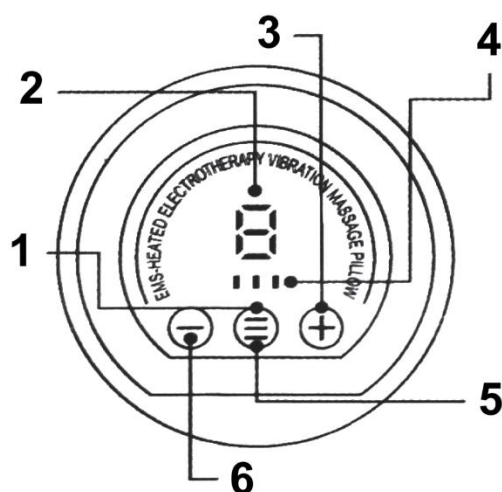

1. EMS / calefacción / vibración – botón de función
2. Indicador del nivel de intensidad
3. + Botón (aumentar)
4. Luz indicadora
5. Botón de encendido (ON/OFF)
6. – Botón (disminuir)

Cómo usarlo

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos para encender el dispositivo. La luz indicadora de modo aparecerá en la primera posición. Pulse el botón de aumento (+). Cuando se muestra el nivel 1 en el área de intensidad, la función EMS está activada. Después puede ajustar la intensidad EMS con los botones + o -. Hay un total de 6 niveles de intensidad disponibles. Cuando la pantalla de intensidad muestra 0, la función EMS está apagada.
2. Pulse de nuevo el botón de encendido. Cuando la luz indicadora de modo se desplaza a la segunda posición, el dispositivo entra en el modo de calefacción. Cuando se muestra el nivel 1 en el área de intensidad, la función de calefacción está activada. Hay 3 niveles de calefacción disponibles.

Advertencia: Seleccione el nivel adecuado según sus necesidades. Evite el calor excesivo para prevenir quemaduras.

3. Pulse de nuevo el botón de encendido. Cuando la luz indicadora de modo se desplaza a la tercera posición, se activa el modo de vibración. Cuando se muestra el nivel 1, se inicia la función de vibración. Hay 3 niveles de vibración disponibles.
4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento.
5. Las funciones EMS, calefacción y vibración pueden utilizarse simultáneamente o por separado.

Notas importantes sobre la función de calefacción

No utilice la función de calefacción de forma continua durante períodos prolongados. Incluso a temperaturas relativamente bajas (40–50 °C), el contacto prolongado con la piel puede causar quemaduras por baja temperatura, aunque no se sienta molestia o dolor de inmediato.

No utilice la función EMS mientras realiza actividades relacionadas con el agua (como cocinar, lavar o manipular mascotas).

Aviso importante


Este producto no es un dispositivo médico y no está destinado a tratamientos médicos.

Instrucciones de uso

Ajuste el dispositivo de modo que las almohadillas EMS calefactables queden colocadas en la zona deseada del cuello. Como se muestra en la ilustración, el dispositivo puede utilizarse en ambas orientaciones. Pruébalo en el cuello y ajústelo en la posición más cómoda.

Este producto está diseñado específicamente para su uso en el cuello. No lo utilice en otras partes del cuerpo como brazos o piernas.

La función EMS transmite la estimulación a través de la humedad. Antes de usarlo, humedezca ligeramente con agua o agua tibia la zona del cuello donde las almohadillas estarán en contacto con la piel.

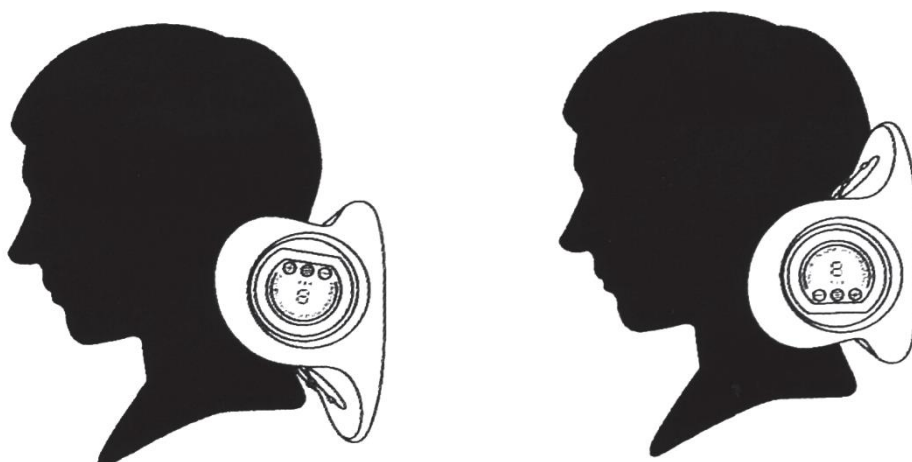

Mantenimiento

Limpie y realice el mantenimiento de las almohadillas EMS calefactables después de cada uso.

- Escurra un paño humedecido en agua y limpie las almohadillas mientras aún estén ligeramente calientes.
- Limpie cuidadosamente las almohadillas EMS.
- Si hay suciedad, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia y detergente neutro diluido, escúrralo y limpie la superficie del dispositivo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo lave directamente.
- No utilice disolventes como alcohol, diluyente o benceno, ya que pueden causar fallos de funcionamiento, daños en los componentes o decoloración.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.