



HR: MEGANECK – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Opis komponenti i dijelova

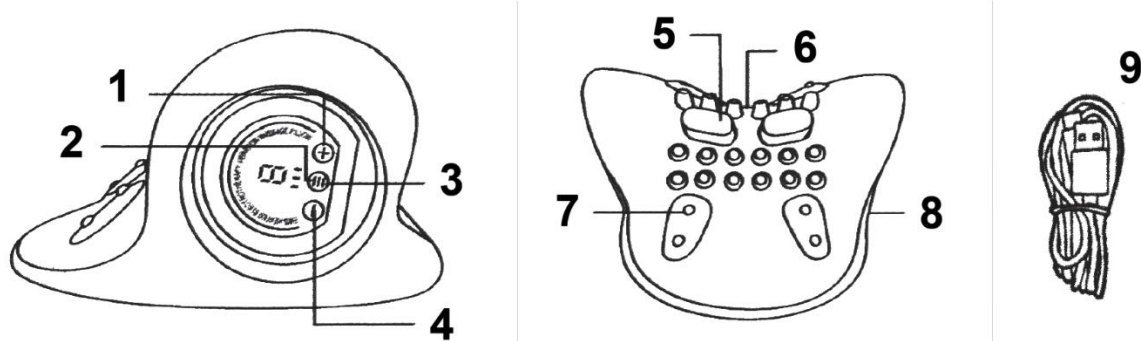

1. + Gumb (povećanje)
2. EMS / grijanje / vibracija – funkcijski gumbi
3. Gumb za uključivanje (ON/OFF)
4. – Gumb (smanjenje)
5. EMS jastučić za grijanje
6. Masažni čvorovi
7. Magnetski umetci
8. USB Type-C priključak
9. USB Type-C kabel za punjenje

Način punjenja

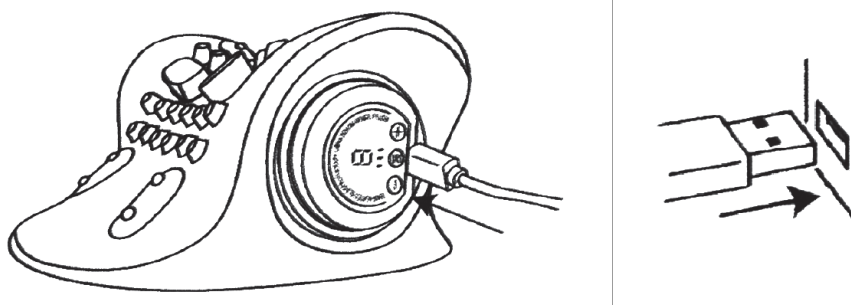


1. Umetnite priloženi USB kabel u USB Type-C priključak na uređaju.
2. Drugi kraj USB kabela spojite na USB adapter ili power bank. USB adapter ili power bank treba pripremiti zasebno. Preporučuje se napajanje od 5 V / 1 A ili više.
3. Tijekom punjenja crveno indikatorsko svjetlo treperi. Kada je uređaj potpuno napunjen, zeleno indikatorsko svjetlo ostaje uključeno.


Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje približno 3 sekunde kako biste uključili ili isključili uređaj.

Nakon uključivanja uređajem se može upravljati i pomoću daljinskog upravljača, pri čemu se gumb M koristi za promjenu funkcija.

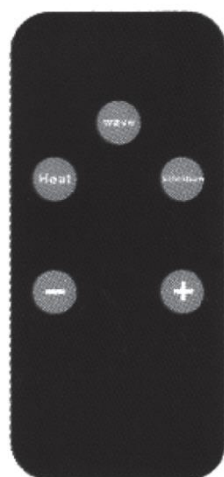

Gumbi daljinskog upravljača

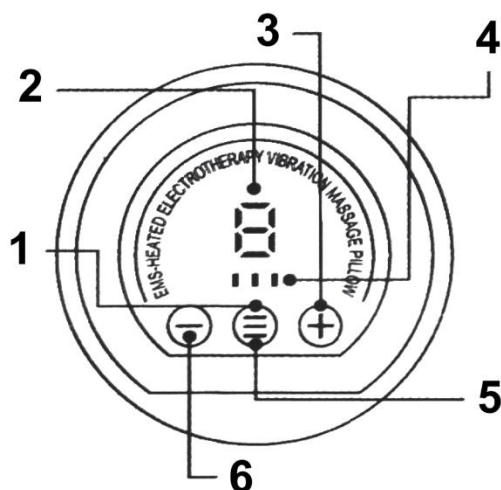

1. EMS / grijanje / vibracija – funkcijski gumb
2. Indikator razine intenziteta
3. + Gumb (povećanje)
4. Indikatorsko svjetlo
5. Gumb za uključivanje (ON/OFF)
6. – Gumb (smanjenje)

Kako koristiti

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje oko 3 sekunde kako biste uključili uređaj. Indikatorsko svjetlo načina rada pojavit će se na prvom položaju. Pritisnite gumb za povećanje (+). Kada je u području intenziteta prikazana razina 1, EMS funkcija je aktivirana. Nakon toga možete podešavati EMS intenzitet pomoću gumba + ili -. Ukupno je dostupno 6 razina intenziteta. Kada prikaz intenziteta pokazuje 0, EMS funkcija je isključena.
2. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje. Kada se indikatorsko svjetlo načina rada pomakne na drugi položaj, uređaj ulazi u način grijanja. Kada je u području intenziteta prikazana razina 1, funkcija grijanja je aktivirana. Dostupne su 3 razine grijanja.
Upozorenje: Odaberite odgovarajuću razinu prema svojim potrebama. Izbjegavajte prekomjernu toplinu kako biste spriječili opekline.

3. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje. Kada se indikatorsko svjetlo načina rada pomakne na treći položaj, aktivira se način vibracije. Kada je prikazana razina 1, funkcija vibracije se pokreće. Dostupne su 3 razine vibracije.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 15 minuta rada.
5. EMS, grijanje i vibracijske funkcije mogu se koristiti istovremeno ili zasebno.

Važne napomene za funkciju grijanja

Nemojte koristiti funkciju grijanja neprekidno tijekom duljeg razdoblja. Čak i pri relativno niskim temperaturama (40–50 °C), produljeni kontakt s kožom može uzrokovati opekline od niske temperature, čak i ako nema neposredne nelagode ili boli.

Nemojte koristiti EMS funkciju tijekom aktivnosti koje uključuju vodu (kao što su kuhanje, pranje ili rukovanje kućnim ljubimcima).

Važna obavijest


Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i nije namijenjen za medicinsko liječenje.

Upute za uporabu

Podesite uređaj tako da grijani EMS jastučići budu postavljeni na željeno područje vašeg vrata. Kao što je prikazano na ilustraciji, uređaj se može koristiti u oba položaja. Isprobajte ga na vratu i prilagodite u najudobniji položaj.

Ovaj proizvod je dizajniran posebno za uporabu na vratu. Nemojte ga koristiti na drugim dijelovima tijela kao što su ruke ili noge.

EMS funkcija prenosi stimulaciju putem vlage. Prije uporabe lagano navlažite područje vrata gdje će jastučići biti u kontaktu s kožom vodom ili mlakom vodom.

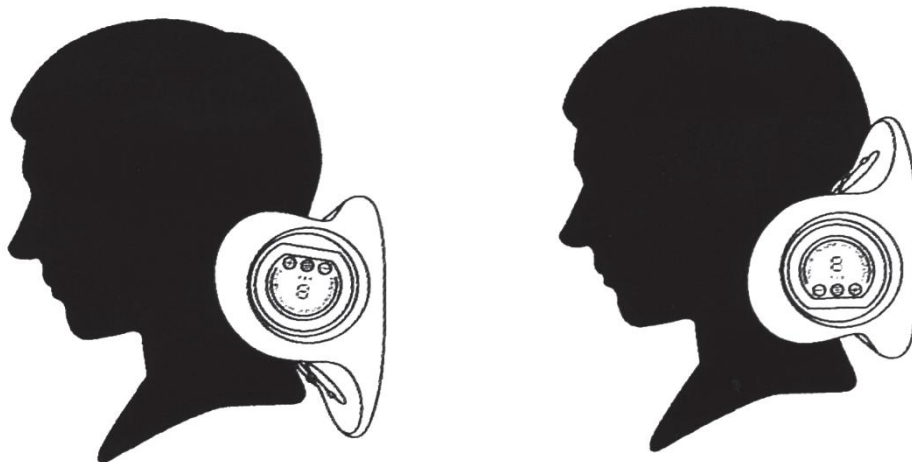

Održavanje

Očistite i održavajte EMS jastučiće za grijanje nakon svake uporabe.

- Iscijedite krpu namočenu u vodi i obrišite jastučiće dok su još blago topli.

- Pažljivo očistite EMS jastučice.
- Ako je prisutna prljavština, upotrijebite meku krpu lagano namočenu u toplu vodu s razrijeđenim neutralnim deterdžentom, iscijedite je i obrišite površinu uređaja.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu niti ga prati izravno.
- Nemojte koristiti otapala kao što su alkohol, razrjeđivač ili benzin jer mogu uzrokovati neispravan rad, oštećenje komponenti ili promjenu boje.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.